

müster
PROFESSIONAL



BEAUTY DIVISION
V EDITION

FACE young and luminous

Beauty Oxygen	2	Face Program Ultrasonic	14
Face Studio + Unique	6	Comby 8	15
H.F. Synthesis	11	Accessori	18
iFace	12		

DEPY sweet and delicate

X-Pulsar	24	Complex	40
Follow Me	28	Flash-Bend	42
Synergy	32	Accessori	43
Epylab	36	Cerette	100
Quickly Plus	38	Scaldacera	104
Mixing Advantage	39		

BODY beauty and harmony

Optima 800 kHz	46	Beauty Partner	74
Body Kiss	49	Perfect Beauty	77
Well & Tonic	52	Check In	80
Well & Tonic Ultrasonic professional	53	Reducer	84
Soft & Solve	57	Press Tonic	86
Optima Total Cavity	60	In Shape	88
Modeling	62	Power Tone	90
Benexere	64	Fisiosaune	92
Beauty Reducer	67	Termocoperte	94
Body Sculpture	70	Accessori	95

EQUIPMENT new look for professional Institutes

Sterilizzatori	108	Pododense	119
Fornetti unghie	109	Lettini	120
Lenti	111	Carrelli	131
Vaporizzatori	115	Seggiolini	133
Frese	118	Cromoterapia	136
Rotax	118		

Beauty Oxygen

Elisir di Giovinezza

Ossigeno

Radio Frequenza

Soft Peeling (Micro Dermoabrasione)

L'ossigeno è ciò che ci permette di vivere. Se si pensa a questo si può immediatamente intuire l'importanza che ha l'ossigeno per un corpo sano. Ogni cellula del nostro corpo ha bisogno di ossigeno. Il processo di invecchiamento della pelle dipende anche dal livello di ossigeno che essa contiene. Il Trattamento all'ossigeno si basa sull'applicazione di ossigeno puro nella pelle; col passare degli anni infatti i depositi di ossigeno nel derma diminuiscono.

Beauty Oxygen favorisce il recupero dell'elasticità, rallenta l'invecchiamento e stimola la rigenerazione del collagene, che impedisce la flaccidezza e dà tono, compattezza e luminosità all'epidermide: EFFETTO BENESSERE.

Beauty Oxygen: un innovativo sistema per trattamenti specifici viso, collo e décolleté che contrasta quelli che sono più comunemente definiti i "segni" dell'invecchiamento e consente di eseguire trattamenti personalizzati per favorire il ringiovanimento e la corretta idratazione della pelle.

Con l'età, l'ossigeno diminuisce soprattutto nelle cellule del viso, che subisce un calo maggiore dei suoi livelli, causando una pelle grinzosa e pallida. L'uso di Beauty Oxygen attraverso un sistema di flusso, abbinato a specifici prodotti, dà alla pelle una nuova vita.

Beauty Oxygen: un'apparecchiatura da sogno che impiega la sinergia di TRE differenti tecnologie:

- Ossigeno
- Radio Frequenza
- Soft Micro Dermoabrasione

Facile da utilizzare: ottimi risultati in breve tempo. Dopo l'applicazione, la pelle appare subito distesa e nutrita, riduzione dei tipici segni dell'età, degli effetti negativi di prolungate esposizioni al sole e delle aggressioni degli agenti atmosferici.

Beauty Oxygen permette di intervenire su casi fino ad oggi giudicati difficili anche per l'estetista. Un mix di delicati trattamenti, non invasivi, che dosati nel modo corretto regalano al viso una nuova giovinezza.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Beauty Oxygen

Elisir di Giovinezza

Per i trattamenti di ringiovanimento e di benessere vengono impiegati metodi quali: nuovissimo sistema di **Micro Dermoabrasione - Ossigeno - Radio Frequenza**.

Soft Micro dermoabrasione - Questa nuova metodica, priva di controindicazioni, è facilmente eseguibile dall'operatore estetico senza essere invasiva e traumatica. Tale metodologia è riconosciuta come efficace dai principali centri estetici e i risultati raggiunti ne fanno un sistema notevolmente evoluto rispetto ai tradizionali metodi. L'azione del suo manipolo permette un lavoro uniforme e garantisce l'asportazione degli strati epidermici superficiali, favorendo l'aumento del ricambio cellulare del tessuto trattato e una migliore permeabilità della cute stessa ed il conseguente maggior assorbimento dei prodotti cosmetici che vengono utilizzati durante il trattamento.

Radio Frequenza: utilizzando un'onda diatermica stimola alcuni processi naturali quali la produzione di Collagene, Elastina e Acido Jaluronico incrementando la loro azione per ottenere un riequilibrio di tutte le zone trattate.

L'Ossigeno è un trattamento non invasivo, privo di effetti collaterali e assolutamente indolore che ha un grande effetto rigenerante, rinvigorente e rassodante. Grazie alle sue proprietà, stimola la respirazione cellulare, per cui la pelle appare subito più tonica, compatta e luminosa. Riduce le irritazioni, ottimo lenitivo e antibatterico.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230 Vca 50 - 60 Hz.
Assorbimento: MAX. 50 WATT

MECCANISMO D'AZIONE

OSSIGENO

L'impiego di ossigeno puro favorisce la microcircolazione ed il metabolismo cutaneo. In termini pratici, invecchiamento, stress, inquinamento, malattie, sono tutti fattori che agiscono negativamente sui microcapillari avviando un processo di degradazione del collagene e dell'elastina: ossigenare la pelle vuol quindi dire "rivascolarizzarla" rendendola più sana, tonica, luminosa e morbida. Se ne deduce che il grande successo che questa tecnica sta riscuotendo in tutto il mondo è legato sia al potere dell'ossigeno stesso che all'azione dei prodotti specifici impiegati.

Effetti Radio Frequenza a livello dermico:

Miglioramento della microcircolazione cutanea con incremento dell'ossigenazione tissutale.

Incremento della permeabilità delle membrane citoplasmatiche, delle cellule dello strato basale con conseguente incremento delle reazioni biochimiche in generale.

Incremento dell'idratazione, grazie ai fenomeni osmotici attivati dall'effetto di compressione e decompressione dei liquidi interstiziali.

Micromassaggio: effetto meccanico

Termico: modificazione della temperatura

Chimico: migrazione di sostanze collagene, eliminazione di gas, distruzione di batteri.

Trattamento delle rughe

La cute mantiene la sua elasticità grazie a particolari proteine adibite a questo scopo. Con l'avanzare dell'età o in condizioni di non perfetto benessere possono comparire fenomeni depressivi cutanei che prendono il nome di RUGHE.

La causa principale è da attribuirsi ad una riduzione del metabolismo di mantenimento cutaneo ove le cellule tendono a stratificarsi sull'epidermide impedendo la trasformazione e lo sviluppo di nuove cellule. Un tempestivo intervento con la RADIO FREQUENZA può limitare questo fenomeno e ritardare, se non impedire, la sua invecchiamento.

MEMORY CARD

Beauty Oxygen memorizza su Memory Card una serie di programmi e trattamenti.

MERCHANDISING

Supporti pubblicitari per la vendita



Art. I 10913301001
Depliant informativi consumatrice



Art. 99177
Roto-Banner
80x210 cm



Kit *lifty* antiage

Art. 40000589

Il kit contiene un trattamento completo per
6 APPLICAZIONI IN ISTITUTO
+ IL PRODOTTO DOMICILIARE:

- n. 6 Siero Ossigeno Attivo Effetto Antiage – 9ml
- n. 1 Maschera Antiage – 150ml
- n. 1 Crema Viso Antiage - Autocura – 50ml

Kit *nutritive* - iperidratante

Art. 40000590

Il kit contiene un trattamento completo per
6 APPLICAZIONI IN ISTITUTO
+ IL PRODOTTO DOMICILIARE:

- n. 6 Siero Ossigeno Attivo Effetto Idratante – 9ml
- n. 1 Maschera Nutritiva Iperidratante – 150ml
- n. 1 Crema Viso Nutritiva Iperidratante - Autocura – 50ml

Accessori [pag. 18-22]

- n. l art. 9935 – Manipolo porta testina abrasiva (Solo manipolo).
- n. l art. 9936S – Testina abrasiva, finitura leggera, completa di filtro.
- n. l art. 9937S – Testina abrasiva, finitura media, completa di filtro.
- n. l art. 9938S – Testina abrasiva, finitura grossa, completa di filtro.
- n. l art. 9939S – Testina in gomma per massaggio.
- n. l art. 9727 – Interruttore a pedale completo di cavo e spinotto.
- n. l art. 99153 – Penna Touch Screen
- n. l art. 9941 – Tubetto di connessione aspirazione dermoabrasione, con attacco rapido.
- n. l art. 9714 – Tubo per funzione spray.
- n. l art. 99176 – Aero-Beauty Oxygen
- n. l art. 99186 – Manipolo Bipolare Radio Frequenza Viso, aree piccole
- n. l0 art. 99200 – Memory Card
- n. l art. 40000589 – Kit Lifty antiage
- n. l art. 40000590 – Kit nutritive - iperidratante

antiage treatments

SIERO OSSIGENO ATTIVO

Specifico siero Antiage con Argilene Peptide, dall'azione simile al botulino, miscelata con Plancton Marino sviluppatore di Ossigeno Attivo, unita al flusso generato dall'apparecchio, producono un effetto lifting e rassodante riducendo la formazione di linee sottili d'espressione e rughe causate dalla contrazione continua dei muscoli del viso. L'Allantoina inoltre svolge un'importante azione dermoprotettiva e lenitiva.



9ml

MASCHERA ANTIAGE ELASTICIZZANTE RESTITUTIVA

La maschera, con complesso a base di Fucosio per un trattamento idratante ed elasticizzante "Long Lasting", tonifica l'epidermide grazie ad oli trattati ed ingredienti attivi che rallentano i fenomeni di invecchiamento cutaneo.



150 ml

CREMA VISO ANTIAGE - AUTOCURA

La Crema Viso Antiage a base di Cellule Staminali, complesso a base di Fucosio e con Vitamina E, è di importante supporto al trattamento eseguito in Istituto. Contrasta attivamente i segni d'invecchiamento e la formazione delle rughe grazie ad una profonda azione energizzante e anti radicali liberi.



50 ml

nutritive treatments

SIERO OSSIGENO ATTIVO

Specifico siero Nutriente e Iperidratante con Aosaine, complesso derivante dalle alghe Marine che, miscelata con Plancton Marino sviluppatore di Ossigeno Attivo, unita al flusso generato dall'apparecchio, producono un effetto Iperidratante e Nutriente generando idratazione profonda con un effetto conseguente di maggior tonicità e luminosità. L'Allantoina inoltre svolge un'importante azione dermoprotettiva e lenitiva.



9ml

MASCHERA ANTI-STRESS

La maschera, con Mirtillo, Hamamelis e Zinco Micronizzato, attenua le irritazioni della cute, lasciando la pelle luminosa e decongestionata.



150 ml

CREMA VISO IPERIDRATANTE - AUTOCURA

La Crema Viso Iperidratante con estratto di geranio Rosa e Olio di Crusca di Riso, è un vero e proprio concentrato di sostanze funzionali, atte a proteggere ed idratare la pelle, nutrendola profondamente.



50 ml

Face Progress Unique e Face Studio



Art. 9075 Face Studio

2 “riuniti viso” che mettono a disposizione dell'operatore estetico un'ampissima gamma di trattamenti.



Art. 9089 Unique



Predisposizione per lampada a lente autoilluminante.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presenza di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Face Progress Unique

Ultrasuono 25KHz con applicatore a lama (solo Unique)

Sfruttando l'azione pulsata degli Ultrasuoni, si favorisce l'aumento nutritivo dei capillari interessati dal trattamento (iperemia) stimolandone la circolazione localizzata. Contribuisce al "turn over" cellulare, apportando un benefico contributo all'azione idratante della pelle che apparirà visibilmente tonificata, luminosa e dall'effetto setoso al tatto.

Invertendo il flusso della corrente biodinamica integrata favorisce l'assorbimento e la corretta distribuzione di opportuni prodotti cosmetici.

10 programmi suddivisi in 3 fasi di lavoro e 4 trattamenti specifici elaborati per facilitare la selezione del trattamento più idoneo:

PROGR. 1 Pulizia viso: peeling profondo + massaggio iperdistensivo e veicolazione + vibromassaggio.

PROGR. 2 Pelle disidratata: peeling medio + massaggio iperdistensivo e veicolazione + vibromassaggio stimolante.

PROGR. 3 Pelle grassa: peeling + massaggio iperdistensivo e veicolazione + vibromassaggio drenante.

PROGR. 4 Pelle secca (asfittica): peeling profondo + vibro-massaggio stimolante + massaggio iperdistensivo.

PROGR. 5 Pelle senescente (iperemia): peeling profondo + vibro-massaggio stimolante + massaggio iperdistensivo.

PROGR. 6 Decollète: peeling medio + massaggio iperdistensivo + veicolazione.

PROGR. 7 Macchie cutanee: peeling medio + massaggio iperdistensivo e veicolazione + vibro-massaggio stimolante e veicolazione.

PROGR. 8 Rassodamento bio-dinamico tissutale: peeling medio + massaggio iperdistensivo + massaggio vibro-stimolante e veicolazione.

PROGR. 9 Rassodamento tessutale: peeling intensivo + elettrostimolazione + drenaggio.

PROGR. 10 Stimolazione drenante: peeling intenso + leafing + drenaggio.

Trattamenti specifici

- Peeling leggero.
- Peeling medio.
- Peeling intenso.
- Correnti galvaniche (veicolazione).

Ultrasuono 3MHz con applicatore cilindrico (solo Unique)

Mediante l'applicazione degli ultrasuoni a 3MHz, a livello del derma, si favorisce:

- miglioramento della microcircolazione cutanea con incremento dell'ossigenazione tissutale;
- incremento della permeabilità cellulare per favorire l'attivazione delle reazioni chimiche ed enzimatiche;
- aumento dell'idratazione grazie ai fenomeni osmotici attivati dall'effetto di positivo dell'onda ultrasonica;
- effetto meccanico del micro-massaggio;
- effetto termico per la modificazione della temperatura;
- effetto chimico per la migrazione di sostanze nutritive e la conseguente eliminazione di sostanze in eccesso (trattamento).




Micro Dermo Abrasione - Soft Scrub (solo Unique)

La funzione Soft Scrub, o peeling meccanico, è un innovativo metodo semplice e sicuro per effettuare trattamenti di:

- rimozione delle cellule morte;
- riduzione dell'ispessimento cutaneo, migliorando l'assorbimento di opportuni prodotti cosmetici;
- asportazione piccoli comedoni superficiali;
- schiarire macchie cutanee non eccessivamente profonde o causate dall'acne;
- levigare la cute eliminando piccoli solchi superficiali, preparare la pelle colpita da smagliature a veicolare l'attivo specifico per migliorare l'inestetismo.

Per mezzo di un apposito manipolo, sul quale vengono applicati gli opportune testine realizzate con tre differenti gradienti di abrasione, si procede al trattamento applicando una leggera pressione in considerazione al trattamento da effettuare.

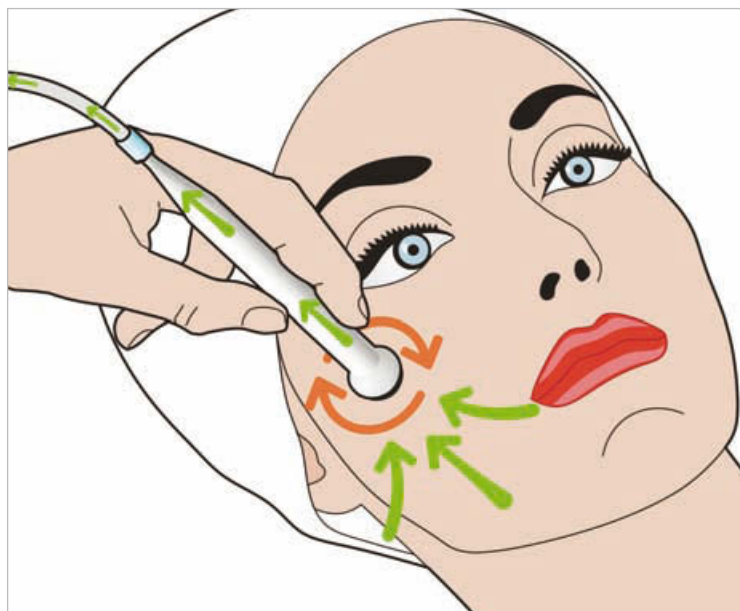

Face Progress Unique e Face Studio

Brush

Elimina le impurità e le cellule morte, le disperde e libera l'epidermide lasciandola immediatamente e visibilmente più liscia e luminosa. Possibilità di impostare 3 differenti sistemi di rotazione delle spazzole: - rotazione in senso orario - rotazione in senso anti-orario - rotazione automatica nei due sensi



Micro-Jono

Accelera l'azione delle sostanze cosmetiche applicate, migliorandone la penetrazione e l'efficacia.



Disincrostante

Estrae le impurità trattenute dall'epidermide lasciando la pelle più chiara e setosa, preparandola per accogliere eventuali prodotti cosmetici, aumentandone l'efficacia.



Thermo

Sfruttando l'azione positiva del calore crea una leggera e locale iperemia che favorisce l'assorbimento di opportune sostanze cosmetiche.



Air Massage

È una successione ritmica e rapida d'aspirazioni e compressioni che, attraverso l'impiego di apposite coppette in cristallo, permettono di elaborare un micromassaggio drenante migliorando la circolazione superficiale dell'epidermide.



Alta Frequenza

Effettua un micromassaggio riattivante che, grazie alle micropulsioni prodotte dall'apparecchiatura, svolge un benefico massaggio riattivando la circolazione superficiale cutanea producendo un'azione antisettica.



Controllo Idratazione

Test per identificare lo stato di idratazione della pelle.



Face Progress Unique e Face Studio

Stimol

Riattiva le fasce muscolari impiegando molteplici forme d'onda per ottimizzare il risultato evitando l'accomodamento muscolare. L'azione elettrostimolante differenziata, agisce sulla muscolatura del viso laddove è necessario tonificare e recuperare la forma muscolare unitamente al miglioramento dell'aspetto dell'epidermide. Quest'effetto è coadiuvato dal drenaggio elettro-linfatico che, associato alla contrazione involontaria delle fasce muscolari, permette di ottenere un visibile miglioramento dell'aspetto della pelle, effetto Lifting, coadiuvato da un maggior tono muscolare.



Face Progress Face Studio

Spray (solo Face Studio)

Nebulizzatore per prodotti tonici o similari.



Vacuum (solo Face Studio)

Aspira i comedoni evitando l'azione meccanica eseguita manualmente.



Optional per Unique e Face Studio [pag. 18-22]

- n. 1 art. 9725 – Spazzola dura in setola Ø 100 mm.
- n. 1 art. 9726 – Spazzola dura in setola Ø 70 mm.
- n. 1 art. 9703 – Elettrodo pettine.
- n. 1 art. 9704 – Elettrodo saturatore.
- n. 1 art. 9705 – Elettrodo folgoratore curvo.

Accessori per Unique e Face Studio [pag. 18-22]

- n. 1 art. 9720 – Spazzola dura in setola Ø 40 mm.
- n. 2 art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra Ø 40 mm.
- n. 1 art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra Ø 20 mm.
- n. 1 art. 9723 – Spazzola dura in setola Ø 20 mm.
- n. 1 art. 9728 – Dischetto in spugna Ø 40 mm.
- n. 1 art. 9840 – Manipolo porta spazzole, spina **Plug In**.
- n. 3 art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip completo di adattatore, dim. 60x80H. mm.
- n. 1 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm.
- n. 3 art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da 260 gr.
- n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm.
- n. 2 art. 99193 – Tubetto di connessione Air Massage, ad attacco rapido.
- n. 2 art. 99189 – Campanella Air Massage Ø 35 mm.
- n. 2 art. 99191 – Campanella Air Massage, tipo schiacciata.
- n. 2 art. 99190 – Campanella Air Massage Ø 20 mm.
- n. 1 art. 99156 – Manipolo H.F. elettronico con regolazione di potenza.
- n. 3 art. 9784N – Adattatore per elettrodo placca.
- n. 1 art. 9701 – Elettrodo cipolla.
- n. 1 art. 9702 – Elettrodo cipollina.
- n. 1 art. 9706 – Elettrodo collo.
- n. 1 art. 9707 – Elettrodo rullo.
- n. 1 art. 9947 – Cavo bipolare per Jono e Disincrostante, spinotti positivo e negativo Ø 4 mm, spina **Plug In**.
- n. 1 art. 9948 – Cavo bipolare per Stimolazione, presa femmina positivo e negativo Ø 4 mm, spina **Plug In**.
- n. 1 art. 9949 – Cavo per Test Idratazione, presa e maschio positivo e negativo Ø 4 mm, spina **Plug In**.
- n. 1 art. 9950 – Manipolo Test Idratazione.
- n. 1 art. 9951 – Manipolo Stimol con spinotto Ø 4 mm positivo.
- n. 1 art. 9952 – Manipolo Stimol con spinotto Ø 4 mm negativo.
- n. 1 art. 9953 – Manipolo Soft Stimol con spinotti Ø 4 mm negativo e positivo.
- n. 1 art. 9954 – Manipolo Jono e Disincrostante con spinotti Ø 4 mm negativo e positivo.
- n. 1 art. 9955 – Terminale cilindro per trattamento Disincrostante.
- n. 1 art. 9956 – Terminale rullo per trattamento Micro-Jono.
- n. 1 art. 9957 – Terminale piattello per Hydro Test.
- n. 3 art. 9958 – Terminale micro-sfera per Micro-Jono rughe e piccoli solchi.

Accessori per Unique [pag. 18-22]

- n. 1 art. 9832 – Manipolo Ultrasonico con testina d'emissione a lama.
- n. 1 art. 9934 – Manipolo ultrasonico con testina d'emissione a cilindro.
- n. 1 art. 9727 – Comando a pedale.
- n. 1 art. 9759 – Cavo unipolare per connessione placca.
- n. 1 art. 9935 – Manipolo porta testina abrasiva.
- n. 1 art. 9936S – Testina abrasiva, finitura leggera, completa di filtro.
- n. 1 art. 9937S – Testina abrasiva, finitura media, completa di filtro.
- n. 1 art. 9938S – Testina abrasiva, finitura grossa, completa di filtro.
- n. 1 art. 9939S – Testina in gomma per massaggio.
- n. 1 art. 9941 – Tubetto di connessione aspirazione dermoabrasione, con attacco rapido.

Accessori per Face Studio [pag. 18-22]

- n. 1 art. 9714 – Tubetto di connessione Spray, ad attacco rapido.
- n. 2 art. 9717 – Contenitore con ugello nebulizzatore.
- n. 1 art. 99192 – Tubetto di connessione Vacuum con filtro anti-impurità, ad attacco rapido.
- n. 1 art. 99187 – Canula aspira comedoni foro piccolo.
- n. 1 art. 99188 – Canula aspira comedoni foro grande.
- n. 1 art. 9842 – Manipolo Thermo.

HF Synthesis



Optional

- n. l art. 9703 – Elettrodo pettine (03)
- n. l art. 9704 – Elettrodo saturatore (04)
- n. l art. 9705 – Elettrodo folgoratore (05)
- n. l art. 9706 – Elettrodo collo (06)
- n. l art. 9707 – Elettrodo rullo (07)

Art. 9113


Kit professionale per trattamenti estetici di Alta Frequenza (HF) completo di:

- n. l art. 99156 – Manipolo con regolazione di potenza
- n. l art. 99160 – Valigetta da trasporto anti-urto
- n. l art. 99157 – Unità di collegamento alla rete
- n. l art. 9701 – Elettrodo cipolla (01)
- n. l art. 9702 – Elettrodo cipollina (02)



Art. 99156 - Manipolo H.F. con regolazione di potenza per apparecchi: 9049/E - 9065 - 9075 - 9089
230V ~ 50 Hz - 17W

Art. 9114 - Manipolo H.F. con regolazione di potenza completa di 2 elettrodi:
art. 9701 Cipolla (01)
art. 9702 Cipollina (02)

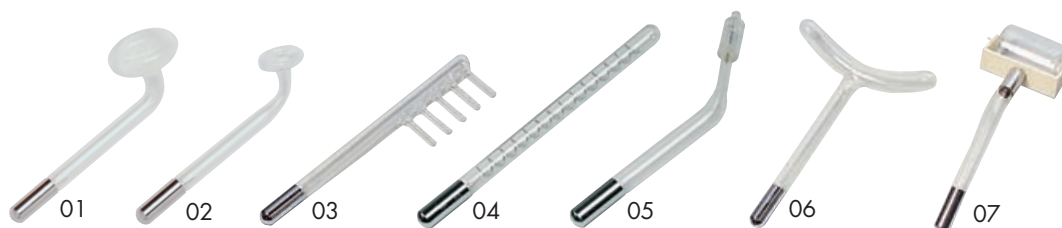

- Art. 9701 – Elettrodo cipolla (01)
- Art. 9702 – Elettrodo cipollina (02)
- Art. 9703 – Elettrodo pettine (03)
- Art. 9704 – Elettrodo saturatore (04)

- Art. 9705 – Elettrodo folgoratore (05)
- Art. 9706 – Elettrodo collo (06)
- Art. 9707 – Elettrodo rullo (07)

iFace R.F. System

iFace R.F. dispone di un sistema di emissione bipolare con due differenti manipoli:

- sistema **Bipolare**, per applicazioni al viso
- sistema **Bipolare**, per applicazioni al corpo

Radiofrequenza nei trattamenti estetici

La metodologia ed il principio fisico è strettamente legato all'ipertermia localizzata.

Le proprietà antalgiche e terapeutiche del calore sono ben note ai ricercatori e sperimentatori, i quali, hanno utilizzato i più disparati sistemi per indurre calore sul corpo umano.

La radiofrequenza rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei trattamenti anti-age e del rilassamento cutaneo, attenuando con una certa stabilità le rughe e le lassità cutanee anche del corpo, oltre a contribuire efficacemente nei trattamenti contro le adiposità localizzate (cellulite).

La radiofrequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza, generalmente tra 1 e 6 MHz, a flusso variabile; tale flusso di energia non stimola il tessuto nervoso e muscolare ma produce un "effetto termico controllato", favorendo l'aumento della temperatura del derma.

Il trattamento con radiofrequenza permette di surriscaldare il sottocutaneo, per un'azione anti-aging, ristrutturante e rimodellante.

Il flusso della radiofrequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di collagene e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo collagene. È evidente che, dopo il ciclo di sedute previste, l'aspetto della pelle troverà nuovo turgore attenuando notevolmente gli antiestetici segni dell'invecchiamento cutaneo.

Dopo il trattamento si osserva un miglioramento del microcircolo e una corretta ripartizione del tessuto trattato, con marcata diminuzione dei noduli antiestetici della pelle, degli inestetismi dell'edema locale apportando un evidente effetto anti-lipolitico.

Particolarmente indicato dopo trattamenti dimagranti per rassodare e ripristinare l'area trattata.

Gli effetti della radiofrequenza non sono immediati ma gradualmente e si evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere, in alcuni casi, il massimo effetto dopo 1/2 mesi dal trattamento.



Art. 9069



iFace R.F. oltre alla programmazione individuale, dispone di 2 differenti programmi di lavoro: Continuo e Pulsato, “Soft & Intensive”, che permettono di gestire automaticamente l'erogazione della temperatura.

Accessori [pag. 18-22]

- n. l art. 99143 – Manipolo Bipolare RFViso
- n. l art. 99142 – Manipolo Bipolare RF Corpo
- n. l art. 9816 – Gel

Face Program Ultrasonic

Sfruttando l'azione pulsata degli Ultrasuoni, si favorisce l'aumento nutritivo dei capillari interessati dal trattamento (iperemia), stimolandone la circolazione localizzata. Contribuisce al "turn over" cellulare, con un benefico apporto all'azione idratante della pelle che apparirà visibilmente tonificata, luminosa e dall'effetto setoso al tatto. Invertendo il flusso della corrente biodinamica integrata, Ultrasonic favorisce l'assorbimento e la corretta distribuzione di opportuni prodotti cosmetici.



Art. 9063

15 programmi elaborati per facilitare la selezione del trattamento più idoneo:

- Peeling con tre livelli d'intensità.
- Idratazione
- Rimozione delle impurità
- Rimozione delle cellule morte
- Favorisce la rivitalizzazione delle aree cutanee trattate
- Contribuisce all'assorbimento di opportuni prodotti cosmetici.



Accessori [pag. 18-22]

- n. l art. 9832 – Manipolo Ultrasonico
- n. l art. 9727 – Comando a pedale
- n. l art. 9771 – Elettrodo placca dim. 60x80 cm
- n. l art. 9784 – Adattatore per elettrodo placca
- n. l art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. l art. 9759 – Cavo unipolare per connessione placca

Comby 8

Apparecchio multifunzionale per **8** trattamenti estetici al viso.



Art. 9049A versione con porta accessori

Art. 9049/E versione senza porta accessori

TRATTAMENTI

Massaggio ad aria

Controllo idratazione

Spray

Micro-Jonoforesi e disincrostante elettronico

Vacuum

Elettrostimolazione - Lifting

Thermo

Esfoliazione (peeling)

Comby 8

TRATTAMENTI

Massaggio ad aria

È una successione ritmica e rapida d'aspirazioni e compressioni che, attraverso l'impiego di apposite coppette in cristallo, permettono di elaborare un micromassaggio drenante migliorando la circolazione superficiale dell'epidermide.



Spray

Mediante l'utilizzo degli appositi contenitori è possibile nebulizzare sostanze cosmetiche senza l'impiego di gas aggiuntivi.



Vacuum

Utile per rimuovere le impurità visibili sulla superficie della pelle, attraverso la loro aspirazione con l'uso di apposite canule in cristallo.



Thermo

L'erogazione controllata della temperatura, distribuita uniformemente sulla superficie dell'apposito Manipolo Thermo, favorisce l'assorbimento di opportuni prodotti cosmetici aumentandone l'efficacia.



Esfoliazione (peeling)

Effettua un'ottima detersione dello strato corneo superficiale eliminando le cellule morte mediante l'utilizzo d'apposite spazzole rotanti, con setole dure e morbide. In considerazione delle caratteristiche individuali della pelle, è possibile impostare la corretta velocità ed il senso di rotazione del micromotore.



Controllo idratazione

Si rivela un valido strumento per l'identificazione del tipo di pelle da trattare determinando lo stato d'idratazione dell'epidermide.



Micro-Jonoforesi e disincrostante elettronico

La corrente di micro-jonoforesi favorisce la corretta distribuzione di opportuni prodotti cosmetici e lo sviluppo dei loro benefici effetti nelle zone d'applicazione.

Il disincrostante elettronico libera in profondità l'epidermide dall'eccesso di sebo ed impurità, preparandola adeguatamente per applicazioni con opportuni prodotti cosmetici di cui amplifica il risultato.



Elettrostimolazione - Lifting

L'azione elettrostimolante differenziata, agisce sulla muscolatura del viso laddove è necessario tonificare e recuperare la forma muscolare unitamente al miglioramento dell'aspetto dell'epidermide. Quest'effetto è coadiuvato dal drenaggio elettro-linfatico che, associato alla contrazione involontaria delle fasce muscolari, permette di ottenere un visibile miglioramento dell'aspetto della pelle, effetto Lifting, coadiuvato da un maggior tono muscolare.



Accessori [pag. 18-22]

- n. 1 art. 9720 – Spazzola dura in setola ø 40 mm.
- n. 1 art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm.
- n. 1 art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm.
- n. 1 art. 9723 – Spazzola dura in setola ø 20 mm.
- n. 1 art. 9728 – Dischetto in spugna ø 40 mm.
- n. 1 art. 9730 – Manipolo porta spazzole.
- n. 2 art. 9731 – Cavo bipolare con spinotti ø 4 mm.
- n. 3 art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip, dim. 60x80H mm.
- n. 1 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H cm.
- n. 3 art. 9784 – Adattatore per placca con innesto spinotto ø 4 mm.
- n. 2 art. 9791 – Manipolo isolato per l'utilizzo dei puntali: sfera, cilindro, piattello.
- n. 1 art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
- n. 2 art. 9793 – Puntale a cilindro per elettrostimolazione.
- n. 1 art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante.
- n. 2 art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da 260 gr.
- n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm.
- n. 1 art. 9811 – Manipolo elettronico termoriscaldante.

OPTIONAL

Alta frequenza art. 99156 - solo manipolo

L'apparecchio è predisposto per integrare il trattamento senza apportarvi alcuna modifica. L'utilizzo dell'Alta Frequenza favorisce il miglioramento della microstimolazione cutanea aumentando l'ossigenazione della pelle, unitamente all'azione antisettica localizzata.



Accessori [pag. 18-22]

- n. 2 art. 99193 – Tubetto di connessione Air Massage, ad attacco rapido.
- n. 2 art. 99189 – Campanella Air Massage ø 35 mm.
- n. 2 art. 99191 – Campanella Air Massage, tipo schiacciata.
- n. 2 art. 99190 – Campanella Air Massage ø 20 mm.
- n. 1 art. 9714 – Tubetto di connessione Spray, ad attacco rapido.
- n. 2 art. 9717 – Contenitore con ugello nebulizzatore.
- n. 1 art. 99192 – Tubetto di connessione Vacuum con filtro anti-impurità, ad attacco rapido.
- n. 1 art. 99187 – Canula aspira comedoni foro piccolo.
- n. 1 art. 99188 – Canula aspira comedoni foro grande.

Optional [pag. 18-22]

- n. 1 art. 9725 – Spazzola dura in setola ø 100 mm.
- n. 1 art. 9726 – Spazzola dura in setola ø 70 mm.
- n. 1 art. 9817 – Manipolo bipolare con sfere per elettrostimolazione.
- n. 1 art. 9068 – Kit Alta Frequenza composto da:
 - n. 1 art. 99156 - Manipolo HF elettronico con regolazione di potenza.
 - n. 1 art. 9701 - Elettrodo cipolla.
 - n. 1 art. 9702 - Elettrodo cipollina.
 - n. 1 art. 9704 - Elettrodo saturatore.
 - n. 1 art. 9705 - Elettrodo folgoratore curvo.
- n. 1 art. 9703 – Elettrodo pettine.
- n. 1 art. 9706 – Elettrodo collo.
- n. 1 art. 9707 – Elettrodo rullo.

FACE PROGRAM ACCESSORIES



Art. 9701 Electrodo cipolla.




Art. 9702 Electrodo cipollina.



Art. 9703 Electrodo pettine.




Art. 9704 Electrodo saturatore.

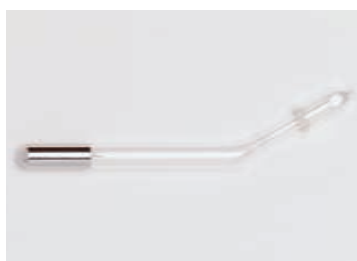

Art. 9705 Electrodo folgoratore.



Art. 9706 Electrodo collo.

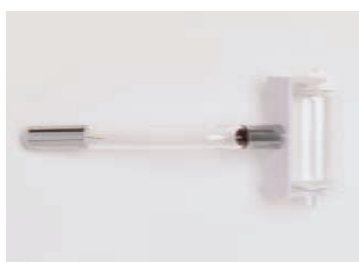

Art. 9707 Electrodo rullo.



Art. 99156 Manipolo H.F., con regolazione di potenza, per apparecchi: 9049/E - 9065 - 9075.



Art. 9741 Confezione contenente 4 elettrodi placca con attacco automatico, dim: 35x45 mm.



Art. 9710 Canula aspira-comedoni foro grande.



Art. 9709 Canula aspira-comedoni foro piccolo.



Art. 9717 Contenitore con ugello nebulizzatore.



Art. 9711 Campanella Air Massage ø 40 mm.



Art. 9712 Campanella Air Massage ø 30 mm.



Art. 9860 Campanella Air Massage ø 15 mm.



Art. 9713 Campanella Air Massage, tipo schiacciata.



Art. 99189 Campanella Air Massage ø 35 mm.



Art. 99190 Campanella Air Massage ø 20 mm.



Art. 99191 Campanella Air Massage, tipo schiacciata.



Art. 9714 Tubo per funzione spray.



Art. 9715 Tubo per funzione Vacuum.



Art. 9716 Tubo per funzione Air Massage.



Art. 99192 Tubetto di connessione Vacuum con filtro anti-impurità, ad attacco rapido.



Art. 99193 Tubetto di connessione Air Massage, ad attacco rapido.



Art. 9941 Tubetto di connessione aspirazione dermoabrasione, con attacco rapido.



Art. 99187 Canula aspira comedoni foro piccolo.



Art. 99188 Canula aspira comedoni foro grande.



Art. 9720 Spazzola dura in setola ø 40 mm.



Art. 9721 Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm.



Art. 9722 Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm.



Art. 9723 Spazzola dura in setola ø 20 mm.



Art. 9725 Spazzola in setola ø 100 mm.



Art. 9726 Spazzola in setola ø 70 mm.



Art. 9728 Dischetto in spugna ø 40 mm.



Art. 9791 Manipolo isolato per l'utilizzo di puntali: sfera, cilindro, piattello.



Art. 9792 Puntale a sfera per micro-jono.



Art. 9793 Puntale a cilindro per trattamenti di stimolazione.



Art. 9794 Puntale a piattello per disincrostante.



Art. 9784R Adattatore per placca con innesto spinotto ø 4 mm (rosso).



Art. 9784N Adattatore per placca con innesto spinotto ø 4 mm (nero).



Art. 9772 Fascia elastica per fissaggio placca, dim. 40x10H cm.



Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in spugna dim. 80x60 mm.



Art. 9731 Cavo bipolare con spinotti ø 4 mm.



Art. 9840 Manipolo porta spazzole per Face Studio - Unique.



Art. 9832 Manipolo ultrasuoni.



Art. 9816 Confezione di gel conduttivo da 260gr.



Art. 9730 Manipolo porta spazzole per: 9049/E - 9065.



Art. 9935 Manipolo porta testina abrasiva (Solo manipolo).



Art. 9936S Testina abrasiva, finitura leggera, completa di filtro. Confezione contenente 10 pezzi.



Art. 99176 Aero-Beauty Oxygen



Art. 9937S Testina abrasiva, finitura media, completa di filtro. Confezione contenente 10 pezzi.



Art. 9938S Testina abrasiva, finitura grossa, completa di filtro. Confezione contenente 10 pezzi.



Art. 9939S Testina in gomma per massaggio. Confezione contenente 5 pezzi.



Confezione testine abrasive.



Art. 981 I Manipolo elettronico termoriscaldante per: 9049/E - 9065.



Art. 9847 Manipolo per controllo idratazione Face Studio.



Art. 9934 Manipolo Ultrasonico con testina d'emissione a cilindro.



Art. 9817 Manipolo stimolazione per Comby 8.



Art. 9841 Manipolo stimolazione per Face Studio.



Art. 9842 Manipolo termoriscaldante per Face Studio - Unique.



Art. 9843 Cavo per jonoforesi Face Studio.



Art. 9844 Cavo per controllo idratazione Face Studio.



Art. 9846 Cavo per stimolazione Face Studio.



Art. 9947 Cavo bipolare per Jono e Disincrostante, spinotti positivo e negativo Ø 4 mm, spina Plug In.



Art. 9948 Cavo bipolare per Stimolazione, presa femmina positivo e negativo Ø 4 mm, spina Plug In.



Art. 9949 Cavo per Test Idratazione, presa femmina negativo, spinotto maschio positivo, Ø 4 mm, spina Plug In.



Art. 9759 Cavo unipolare per collegamento elettrodo placca.




Art. 9727 Interruttore a pedale completo di cavo e spinotto.



Art. 9950 Manipolo Test Idratazione. (Piattello escluso)



Art. 9951 Manipolo Stimol con spinotto Ø 4 mm positivo.

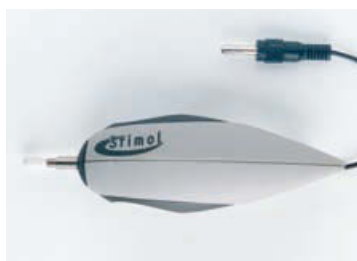

Art. 9952 Manipolo Stimol con spinotto Ø 4 mm negativo.



Art. 9953 Manipolo Soft Stimol con spinotti Ø 4 mm negativo e positivo.



Art. 9954 Manipolo Jono e Disincrostante con presa femmina Ø 4 mm positivo (Rullo escluso).



Art. 9955 Terminale cilindro per trattamento Disincrostante.



Art. 9956 Terminale rullo per trattamento Micro-Jono.



Art. 9957 Terminale piattello per Hydro Test.



Art. 9958 Terminale micro-sfera per Micro-Jono rughe e piccoli solchi.



Art. 99142 Manipolo bipolare RF corpo.



Art. 99143 Manipolo bipolare RF viso.




Art. 99153 Penna Touch Screen



Art. 99186 Manipolo Bipolare Radio Frequenza Viso, aree piccole



Art. 99200 Memory card

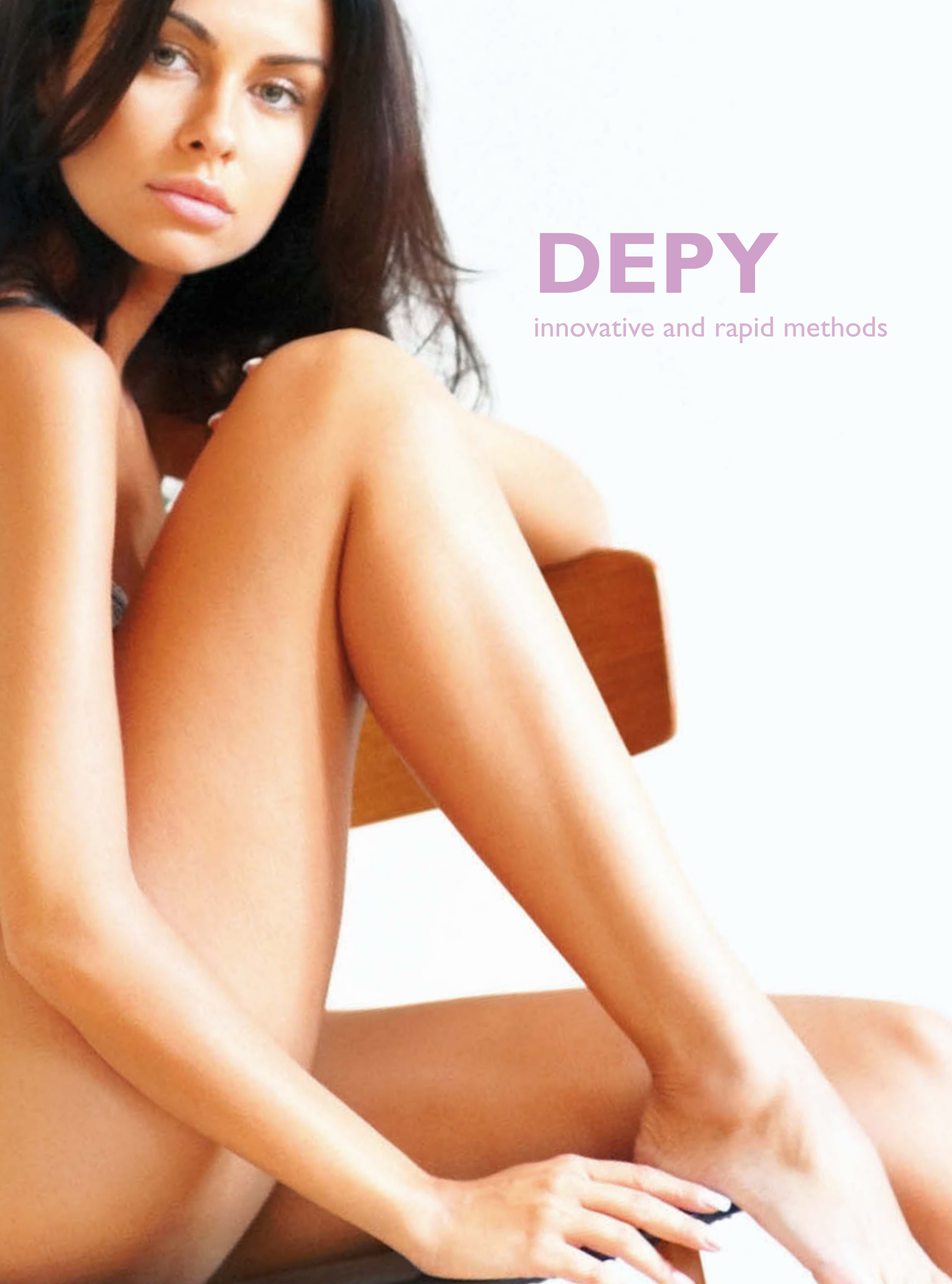

DEPY

innovative and rapid methods

Depy Progress X-Pulsar Intensive I.P.L.

Luce pulsata, nuova frontiera per la depilazione professionale.
Un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di
epilazione non invasivo. Sfruttando l'energia concentrata della luce
allo Xeno, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero con
risultati sorprendenti.




Art. 9132

Depy Progress X-Pulsar Intensive I.P.L.

La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità è un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di depilazione non invasivo per l'eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui.


Apparecchiatura professionale raffreddata ad aria ad alta potenza, tecnologia che permette di mantenere la parte in contatto con la pelle a temperatura costante garantendo una maggiore sicurezza d'uso e migliorando la qualità del trattamento. Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xeno, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero, con risultati sorprendenti. La zona da depilare è interessata da uno spot di luce che, per la sua frequenza d'irradiazione, è poco assorbito dalla cute; al contrario viene assorbito dal pelo che, grazie alla melanina contenuta, trasporta sino alla radice pilifera l'energia trasformata in calore, neutralizza i bulbi piliferi e ne ostacola la ricrescita. In base al principio della fototermolisi, il pigmento della melanina dei peli assorbe la luce in modo selettivo. La melanina è un cromoforo che assorbe la luce in una vasta gamma di frequenze; l'energia luminosa assorbita viene trasformata in energia termica che conduce alla distruzione del bulbo pilifero. La luce pulsata agisce direttamente sul bulbo pilifero (pelo in fase anagen), impedendo la ricrescita del pelo, senza intaccare la cute circostante. La particolare flessibilità dell'apparecchiatura permette di impostare i parametri in rapporto alle caratteristiche di cute e peli, rendendo così possibile la personalizzazione del trattamento secondo le specifiche esigenze.

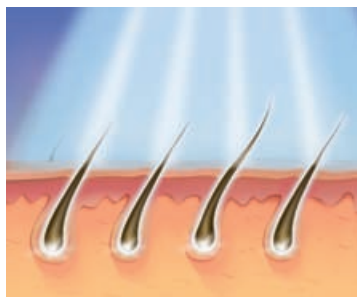

Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.

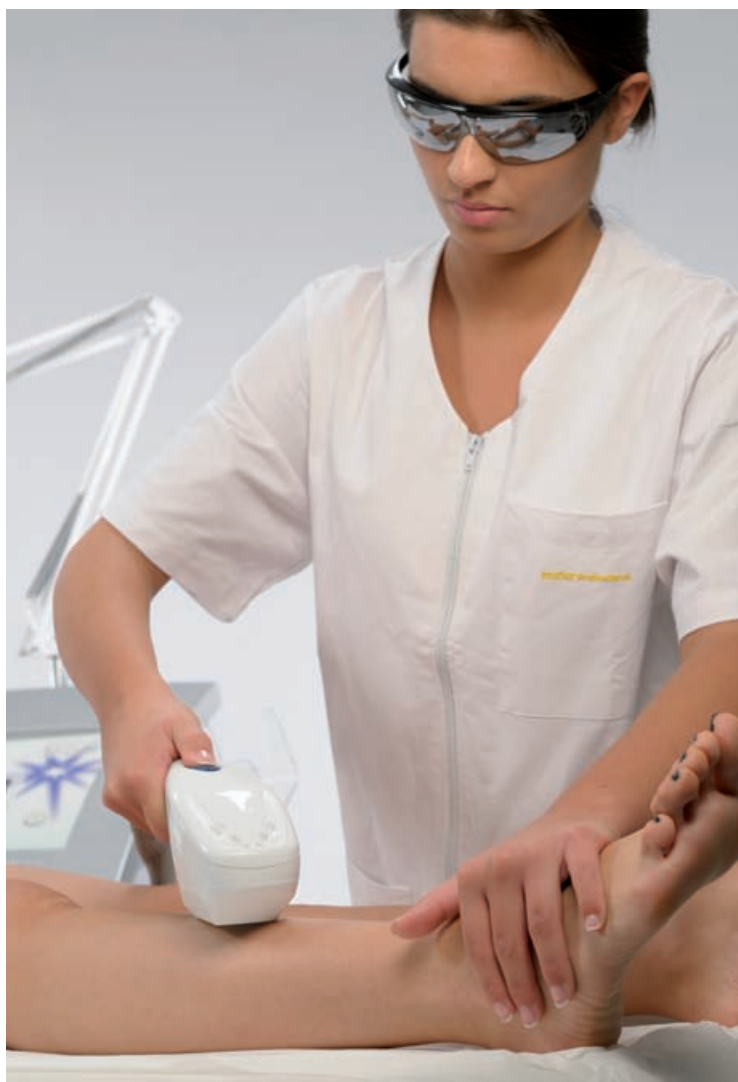

Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Depy progress X-Pulsar Intensive I.P.L.

Il trattamento di Fotoepilazione con Depy Progress X-Pulsar, consente di effettuare l'applicazione in breve tempo grazie all'ampia area d'azione: 40x30 mm per ogni impulso, ben 12 cmq.

L'azione è rapidissima: 9 millisecondi per ogni impulso.

I peli trattati sono quelli in fase di crescita (Anagen), per questa ragione i trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di circa 20-30 giorni, per colpire sempre i peli in fase anagena, fino alla completa scomparsa che avviene in 6-12 trattamenti (per ogni zona). La differenza del numero dei trattamenti è legata al colore del pelo, all'area ed alla fisiologia del soggetto trattato.

Anamnesi computerizzata

Il nuovissimo sistema di anamnesi computerizzata è semplice ed intuitivo: basta sfiorare il video in corrispondenza della funzione desiderata e l'apparecchio vi permette di considerare facilmente tutti i parametri per impostare un corretto trattamento: il tutto in pochissimi secondi.

X-Pulsar determina il livello adeguato di potenza e lo specifico filtro da utilizzare per il trattamento, selezionando, in pochissimi passaggi a video, i relativi parametri quali sesso, colore della pelle, colore e aspetto del pelo.

Al termine dell'anamnesi il video visualizzerà, per vostra opportuna verifica, il riepilogo dei dati selezionati e consentirà di procedere al trattamento.

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa: lampada alla xeno

Lunghezza d'onda lampada: 1000 nm

Lunghezza d'onda operativa filtro rosso: 620 nm

Lunghezza d'onda operativa filtro arancio: 600 nm

Lunghezza d'onda operativa filtro giallo: 550 nm

Durata dell'impulso: 9-10 ms

Potenza assorbita in stand-by: 17W

Potenza max assorbita in ricarica: 425W

Tempo di ricarica dopo impulso: da 2 a 8 secondi a seconda della potenza/densità selezionata

caratteristiche con lampada non filtrata

- Energia massima emessa 120J

- Fluenza massima emessa 10J/cm²

caratteristiche lampada con filtro

Filtro Rosso Energia massima emessa 60J

Fluenza massima emessa 5J/cm²

Filtro Arancio Energia massima emessa 60J

Fluenza massima emessa 5J/cm²

Filtro Giallo Energia massima emessa 66J

Fluenza massima emessa 5,5J/cm²

Dimensione massima della zona trattata per singolo spot:


30mm x 40mm = 12cm²

Sistema di raffreddamento lampade: aria ad elevata potenza

Vita lampada/manipolo: 11.000 spot.

Compiuti 11.000 spot il manipolo deve essere sostituito integralmente, art.99164.

In aggiunta il manipolo può essere ricondizionato ad un prezzo vantaggioso, art.99171.

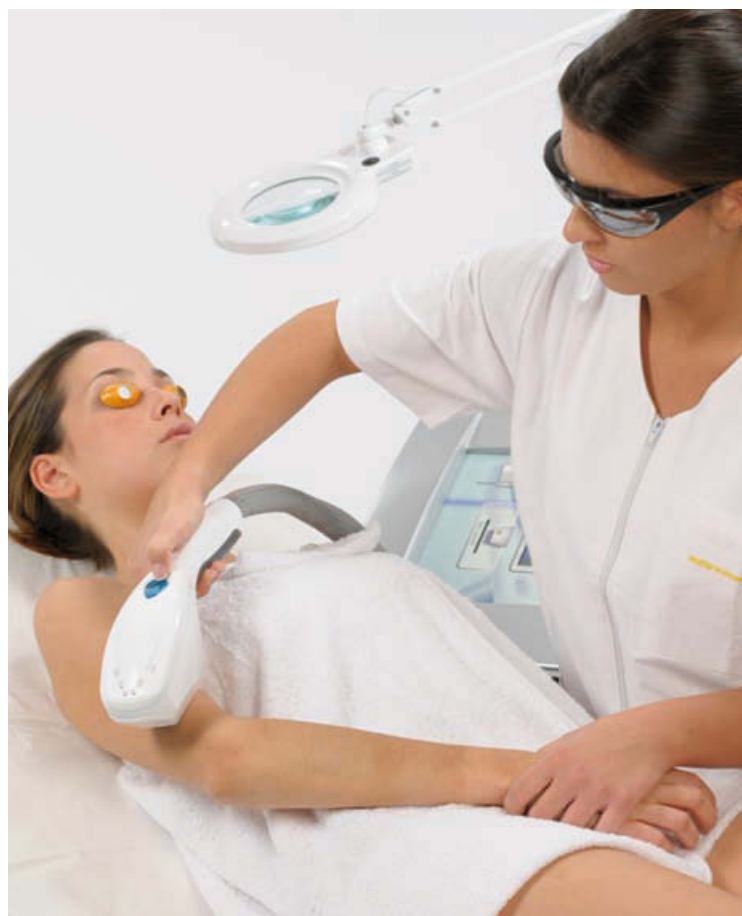

Elaborazione del prezzo di trattamento

X-Pulsar consente di impostare per ogni area da trattare il costo di trattamento con lo scopo di fornire, al termine della fase di anamnesi, il costo totale della seduta.



Trattamento Fotoringiovanimento cutaneo - (optional) Solo per uso Extra CEE.

Il fotoringiovanimento cutaneo si ottiene grazie ai benefici effetti prodotti dal trattamento a luce pulsata, che stimolano le aree interessate risvegliando il loro corretto e naturale funzionamento. Le tecnologie innovative proposte da Depy Progress X-Pulsar hanno fatto registrare miglioramenti visibili anche in condizioni di anomalie cutanee quali: couperose, rughe, capillari superficiali, ipotonicità dell'epidermide. Il flash luminoso è in grado di attivare la pelle in profondità, stimolando la produzione di nuovo collagene, che rivitalizza la tessitura e la consistenza della pelle.



MERCHANDISING

Supporti pubblicitari per la vendita



Art. I10908102001 Depliant informativi consumatrice



Art. 99175
Roto-Banner
80x210 cm

Accessori [pag. 43-45]

- n. l art. 99164 – Manipolo luce pulsata nuovo
- n. l art. 99165 – Set 4 riduzioni
- n. l art. 99166 – Filtro rosso per epilazione pelli scure
- n. l art. 99167 – Filtro arancio per epilazione pelli chiare
- n. l art. 99169 – Cornice porta filtro
- n. l art. 99170 – Supporto porta filtro (filtro escluso)
- n. l art. 99171 – Manipolo luce pulsata ricondizionato
- n. l art. 99200 – Memory card

Optional

- n. l art. 99168 - Filtro giallo per fotoringiovanimento.

Follow Me

Luce pulsata, nuova frontiera per la depilazione professionale.
Un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di
epilazione non invasivo.

Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xeno, l'applicazione
agisce direttamente sul bulbo pilifero con risultati sorprendenti.



Art. 9115

OVUNQUE LUCE PULSATA CON TE DALLA TUA CLIENTE!




La zona da depilare è interessata da uno spot di luce che, per la sua frequenza d'irradiazione, è poco assorbito dalla cute; al contrario viene assorbito dal pelo che, grazie alla melanina contenuta, trasporta sino alla radice pilifera l'energia trasformata in calore, neutralizza i bulbi piliferi e ne ostacola la ricrescita. In base al principio della fototermolisi, il pigmento della melanina dei peli assorbe la luce in modo selettivo.

La melanina è un cromoforo che assorbe la luce in una vasta gamma di frequenze; l'energia luminosa assorbita viene trasformata in energia termica che conduce alla distruzione del bulbo pilifero.

La luce pulsata agisce direttamente sul bulbo pilifero (pelo in fase anagen), impedendo la ricrescita del pelo, senza intaccare la cute circostante.

La particolare flessibilità dell'apparecchiatura permette di impostare i parametri in rapporto alle caratteristiche di cute e peli, rendendo così possibile la personalizzazione del trattamento secondo le specifiche esigenze.

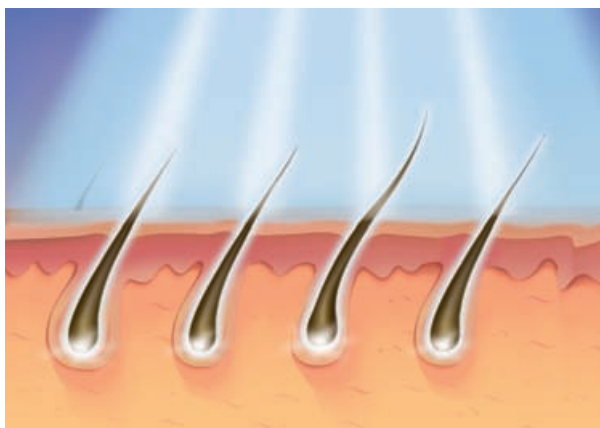

Follow Me



Il **trattamento di Fotoepilazione** con Depy Progress Follow Me, consente di effettuare l'applicazione in breve tempo grazie all'ampia area d'azione: 40x30 mm per ogni impulso, ben 12 cmq.
L'azione è rapidissima: 9 millisecondi per ogni impulso.
I peli trattati sono quelli in fase di crescita (Anagen), per questa ragione i trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di circa 20-30 giorni, per colpire sempre i peli in fase anagena, fino alla completa scomparsa.
La differenza del numero dei trattamenti è legata al colore del pelo, all'area ed alla fisiologia del soggetto trattato.



La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità è un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di depilazione non invasivo per l'eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui. Apparecchiatura professionale raffreddata ad aria ad alta potenza, tecnologia che permette di mantenere la parte in contatto con la pelle a temperatura costante garantendo una maggiore sicurezza d'uso e migliorando la qualità del trattamento. Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xeno, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero, con risultati sorprendenti.



Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa: lampada alla xeno
 Lunghezza d'onda lampada: 1000 nm
 Lunghezza d'onda operativa filtro rosso: 620 nm
 Lunghezza d'onda operativa filtro arancio: 600 nm
 Durata dell'impulso: 9-10 ms
 Potenza assorbita in stand-by: 17W
 Potenza max assorbita in ricarica: 425W
 Tempo di ricarica dopo impulso: da 2 a 8 secondi a seconda della potenza/densità selezionata.

caratteristiche con lampada non filtrata

- Energia massima emessa 120J
- Fluenza massima emessa 10J/cm²

caratteristiche lampada con filtro

Filtro Rosso: Energia massima emessa 60J
 Fluenza massima emessa 5J/cm²

Filtro Arancio: Energia massima emessa 60J
 Fluenza massima emessa 5J/cm²

Dimensione massima della zona trattata per singolo spot:
 30mm x 40mm = 12cm²

Sistema di raffreddamento lampade: aria ad elevata potenza

Vita lampada/manipolo: 11.000 spot.

Compiuti 11.000 spot il manipolo deve essere sostituito integralmente, art.99164.

In aggiunta il manipolo può essere ricondizionato ad un prezzo vantaggioso, art.99171.

Accessori [pag. 43-45]

- n. l art.99164 – Manipolo luce pulsata nuovo
- n. l art. 99165 – Set 4 riduzioni
- n. l art. 99166 – Filtro rosso per epilazione pelli scure
- n. l art. 99167 – Filtro arancio per epilazione pelli chiare
- n. l art. 99169 – Cornice porta filtro
- n. l art. 99170 – Supporto porta filtro (filtro escluso)
- n. l art. 99171 – Manipolo luce pulsata ricondizionato

Depy Progress Synergy

Luce pulsata, nuova frontiera per la depilazione professionale.
Un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di
epilazione non invasivo. Sfruttando l'energia concentrata della luce
allo Xeno, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero con
risultati sorprendenti.



Art. 9081

Depy Progress Synergy

La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità è un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di depilazione non invasivo per l'eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui.

Apparecchiatura professionale raffreddata ad aria ad alta potenza, tecnologia che permette di mantenere la parte in contatto con la pelle a temperatura costante garantendo una maggiore sicurezza d'uso e migliorando la qualità del trattamento. Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xeno, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero, con risultati sorprendenti.

La zona da depilare è interessata da uno spot di luce che, per la sua frequenza d'irradiazione, è poco assorbito dalla cute; al contrario viene assorbito dal pelo che, grazie alla melanina contenuta, trasporta sino alla radice pilifera l'energia trasformata in calore, neutralizza i bulbi piliferi e ne ostacola la ricrescita.

In base al principio della fototermolisi, il pigmento della melanina dei peli assorbe la luce in modo selettivo. La melanina è un cromoforo che assorbe la luce in una vasta gamma di frequenze; l'energia luminosa assorbita viene trasformata in energia termica che conduce alla distruzione del bulbo pilifero.


La luce pulsata agisce direttamente sul bulbo pilifero (pelo in fase anagen), impedendo la ricrescita del pelo, senza intaccare la cute circostante.

La particolare flessibilità dell'apparecchiatura permette di impostare i parametri in rapporto alle caratteristiche di cute e peli, rendendo così possibile la personalizzazione del trattamento secondo le specifiche esigenze.



Sonda Fototipo "Color Test"

Depy Progress Synergy dispone di un innovativo sensore per l'identificazione del fototipo dell'epidermide (classificazione di Fitzpatrick) che identifica e imposta automaticamente il livello corretto d'intensità dell'impulso luminoso in funzione del colore della cute. Tale livello di energia garantisce la corretta esecuzione del trattamento e può comunque essere modificato manualmente dall'operatore estetico per una taratura personalizzata.

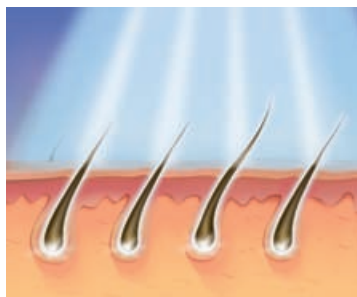

Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Depy progress synergy

Il trattamento di Fotoepilazione con Depy Progress Synergy, consente di effettuare l'applicazione in breve tempo grazie all'ampia area d'azione: 23x57 mm per ogni impulso, ben 13 cmq.

L'azione è rapidissima: da 8 a 35 millisecondi per ogni impulso, efficienza da primato! I peli trattati sono quelli in fase di crescita (Anagen), per questa ragione i trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di circa un mese, per colpire sempre i peli in fase anagena, fino alla completa scomparsa che avviene in 4 – 8 trattamenti (per ogni zona). La differenza del numero dei trattamenti è legata al colore del pelo, all'area ed alla fisiologia del soggetto trattato.

Trattamento di fotoringiovanimento cutaneo

Il fotoringiovanimento cutaneo si ottiene grazie ai benefici effetti prodotti dal trattamento a luce pulsata, che stimolano le aree interessate risvegliando il loro corretto e naturale funzionamento.

Le tecnologie innovative proposte da Depy Progress Synergy hanno fatto registrare miglioramenti visibili anche in condizioni di anomalie cutanee quali: couperose, rughe, capillari superficiali, ipotonicità dell'epidermide. Il flash luminoso è in grado di attivare la pelle in profondità, stimolando la produzione di nuovo collagene, che rivitalizza la tessitura e la consistenza della pelle. La durata del trattamento dipende dall'estensione dell'area interessata e dalla tipologia dell'applicazione; in generale si può affermare che la singola seduta dura dai 20 ai 40 minuti e debba essere ripetuta dalle 4 alle 6 volte.

Trattamento anti-acne

L'efficacia del trattamento nei casi di acne (acne vulgaris) evidenzia la sua azione battericida e fortemente igienizzante, pulendo a fondo l'area interessata. Come per ogni altra reazione fotochimica, l'efficacia del procedimento è legata alla concentrazione della luce e della conseguente temperatura a cui avviene la reazione fotochimica, nonché alla lunghezza d'onda utilizzata. Conseguentemente l'utilizzo combinato di luce e calore raddoppia la possibilità di produrre ossigeno in grado di eliminare il batterio responsabile dell'acne, senza che tale aumento della temperatura, per un tempo di 35/80 msec, comporti effetti negativi per il soggetto trattato.

Si può agire con successo in forme lievi e di media gravità. Sono in genere necessari più trattamenti, a distanza di 7 - 10 giorni uno dall'altro. La professionalità e l'esperienza dell'operatore estetico in materia di acne potrà essere d'aiuto per meglio definire la quantità e la periodicità dei trattamenti.

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa: 2 lampade allo xeno.

Lunghezza d'onda unità luminosa depilazione: 600-1200 nm colore giallo.

Lunghezza d'onda unità luminosa depilazione: 500-1200 nm colore giallo.

Solo per uso extra cee

Lunghezza d'onda unità luminosa anti-acne: 400-1100 nm colore verde.

Solo per uso extra cee

Lunghezza d'onda unità luminosa fotoringiovanimento: 550-1200 nm colore giallo/arancio. Solo per uso extra cee

Potenza emessa (regolabile): da 5 a 12J/cmq - 160 J totali.

Durata dell'impulso: da 8 a 35 millisecondi in funzione dell'unità luminosa utilizzata.

Potenza assorbita in stand-by: 80 W.

Potenza massima assorbita in ricarica: 1800 W per 1 secondo (picco).

Dimensione massima della zona trattata per singolo spot: 23x57 mm (13,1 cmq).

Sistema di raffreddamento lampade: aria aspirata ad alta potenza.

Tempo di rigenerazione impulsi: da 2 a 6 secondi in funzione della potenza emessa.





Accessori [pag. 43-45]

- n. 1 art. 9874 – Gruppo alimentazione sorgente luminosa.
- n. 1 art. 9875 – Sonda Fototipo "Color Test".
- n. 1 art. 9886 – Occhiali operatore.
- n. 2 art. 99183 – Unità luminosa per depilazione. 600 dark
- n. 3 art. 19550 – Occhiali cliente.
- n. 10 art. 9877 – Piastrina amovibile per sterilizzazione e pulizia - versione grande per area 23x57 mm = 13,1 cmq.
- n. 5 art. 9878 – Piastrina amovibile per sterilizzazione e pulizia - versione piccola per area 11x30 mm = 3,0 cmq.

Optional [pag. 43-45]

- n. 1 art. 9883 – Unità luminosa per anti-acne. Solo per uso extra cee
- n. 1 art. 9884 – Unità luminosa per fotoringiovanimento. Solo per uso extra cee
- n. 1 art. 9882 – Unità luminosa per depilazione 500 clear. Solo per uso extra cee

Depy Progress Epylab

L'interfaccia di Epylab garantisce, grazie all'ampio schermo digitale ed all'intuitiva predisposizione dei comandi, di lavorare con estrema semplicità sfruttando completamente le potenzialità dell'apparecchio.



Art. 9076

Depy Progress Epylab

L'utilizzo della Memory Card, dedicata per ogni singolo cliente, permette di impostare i dati per ogni metodologia di trattamento facilitando e diminuendo i tempi per l'impostazione dei parametri tecnici. I bellissimi supporti porta strumenti ed il carrello integrato, rendono pratico e funzionale l'utilizzo di Epylab, favorendone l'impiego e la disposizione.

Trattamenti

Si avvale dell'impiego di correnti miscelate di Termolisi + Elettrolisi, attraverso l'elettrodo ago, in sinergia all'innovativo sistema Flash e Super-Flash. Le funzioni Flash e Super-Flash erogando in pochi millesimi di secondo un impulso ad elevata intensità, contribuiscono a ridurre drasticamente la sensibilità del soggetto in trattamento, aumentandone il risultato visibile sin dalle prime sedute.

Con Epylab, l'operatore estetico può inoltre selezionare le sole correnti di Elettrolisi, adatte in zone particolarmente delicate o per soggetti sensibili alle correnti ad alta frequenza (Termolisi).

Epylab offre inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore Thermosoft che, utilizzando una particolare sonda di superficie in azione sinergica allo specifico prodotto Depy Gel, ne favorisce la conducibilità e l'azione inibente; il metodo è particolarmente adatto per zone delicate. Il sistema di depilazione Thermosoft permette di trattare ampie aree in tempi ridotti, indebolendo progressivamente il pelo.

Epylab può effettuare inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore avvalendosi dell'impiego di correnti di Termolisi ad altissima frequenza, erogate attraverso l'elettrodo a pinza.

Le funzioni di Anaforesi e Cataforesi permettono di effettuare trattamenti di disincrostazione elettronica, per un'efficace preparazione della zona da trattare e, come coadiuvante alla distribuzione di opportuni prodotti cosmetici post-depilatori ad azione lenitiva e/o inibente, aumentandone l'efficacia.

Trattamenti e principali caratteristiche

- Metodo Flash - Metodo Super-Flash.
- Metodo Flash-Blend.
- Metodo Termolisi con elettrodo ago.
- Metodo Termolisi con elettrodo pinza - Metodo Elettrolisi.
- Funzione Anaforesi - Funzione Cataforesi.
- Funzione Sense, erogazione dell'impulso in automatico senza l'azionamento del comando a pedale (abilitata per trattamenti con elettrodo ad ago).
- Programmi personalizzati con MEMORY CARD. Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato sia personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card nell'apposita presa.
- Regolazioni digitali di tutti i parametri e del tempo di durata dell'impulso, in millesimi di secondo.
- Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine della seduta.
- Conta impulsi.
- Ampio schermo retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa luminosità.



Predisposizione per lampada a lente autoilluminante



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Accessori [pag. 43-45]

- n. l art. 9743 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,075 mm.
- n. l art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,100 mm.
- n. l art. 9745 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,127 mm.
- n. l art. 9746 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,150 mm.
- n. l art. 9761 – Manipolo porta-ago.
- n. l art. 9727 – Comando a pedale.
- n. l art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca.
- n. l art. 9758 – Manipolo sonda, completo di cavo estraibile.
- n. l art. 9749 – Sonda per manipolo Thermosoft.
- n. 3 art. 9732 – Depy Gel, confezione di gel inibente, 200 ml.
- n. l art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile.
- n. l art. 9947 – Cavo bipolare con spinotti Ø 4 mm.
- n. 2 art. 9756 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip completo di adattatore, dim. 60x80 mm.
- n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm.
- n. 2 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm.
- n. l art. 9791 – Manipolo isolato per l'utilizzo dei puntali: sfera, piattello.
- n. l art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
- n. l art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante.
- n. l0 art. 9837 – Memory Card.

Depy Program Quickly Plus



Art. 9046/E

Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Quickly Plus si avvale dell'impiego di correnti di Termolisi, erogate attraverso l'elettrodo ad ago.

- Timer elettronico per impostare in automatico la durata del singolo impulso: da 0,5" a 10".
- Orologio digitale per visualizzare il tempo complessivo di ogni trattamento: funzione stand by, utile per sospendere momentaneamente il conteggio senza azzerare il display.
- Regolazione e visualizzazione luminosa di potenza.



Accessori [pag. 43-45]

- n. 5 art. 30109744 – Aghi per depilazione
- n. 1 art. 9761 – Manipolo porta-ago
- n. 1 art. 9727 – Comando a pedale

Depy Program Mixing Advantage


Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Depy Program Advantage si avvale dell'impiego di correnti di Termolisi, erogate attraverso l'elettrodo ad ago e pinza con il metodo indolore.



Art. 9062A - versione con porta accessori

Art. 9062 - versione senza porta accessori

- 18 programmi residenti e modificabili dall'operatore estetico.
- Regolazioni digitali di tutti i parametri.
- Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine della seduta.
- Conta impulsi.
- Display retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa luminosità.

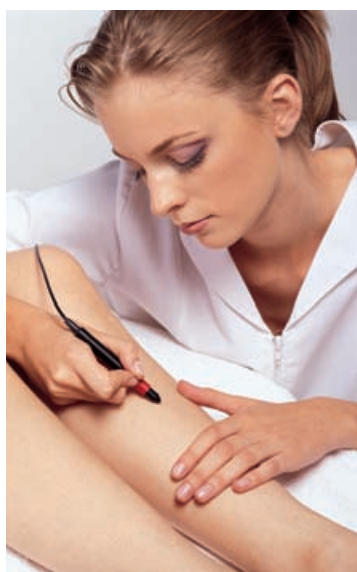

Accessori [pag. 43-45]

- n. l art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,100 mm
- n. l art. 9761 – Manipolo porta-ago
- n. l art. 9727 – Comando a pedale
- n. l art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile

Depy Program Complex

Con Depy Complex l'operatore estetico dispone di uno strumento completo per svolgere qualsiasi trattamento professionale di elettrodepilazione. Si avvale dell'impiego di correnti miscelate di Termolisi + Elettrolisi, attraverso l'elettrodo ago, in sinergia all'innovativo sistema Flash e Super-Flash.



Le funzioni Flash e Super-Flash erogando in pochi millesimi di secondo un impulso ad elevata intensità, contribuiscono a ridurre drasticamente la sensibilità del soggetto in trattamento, aumentandone il risultato visibile sin dalle prime sedute.

Con Depy Complex, l'operatore estetico può inoltre selezionare le sole correnti di Elettrolisi, adatte in zone particolarmente delicate o per soggetti sensibili alle correnti ad alta frequenza (Termolisi). Depy Complex offre inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore Thermosoft che, utilizzando una particolare sonda di superficie in azione sinergica allo specifico prodotto Depy Gel, ne favorisce la conducibilità e l'azione inibente; il metodo è particolarmente adatto per zone delicate.

Il sistema di depilazione Thermosoft permette di trattare ampie aree in tempi ridotti, indebolendo progressivamente il pelo.

Depy Complex può effettuare inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore avvalendosi dell'impiego di correnti di Termolisi ad altissima frequenza, erogate attraverso l'elettrodo a pinza.

Le funzioni di Anaforesi e Cataforesi permettono di effettuare trattamenti di disincretizzazione elettronica, per un'efficace preparazione della zona da trattare, e come coadiuvante alla distribuzione di opportuni prodotti cosmetici post-depilatori ad azione lenitiva e/o inibente, aumentandone l'efficacia.

Trattamenti e principali caratteristiche

- Metodo Flash - Metodo Super-Flash
- Metodo Flash-Blend
- Metodo Termolisi con elettrodo ago
- Metodo Termolisi con elettrodo pinza
- Metodo Elettrolisi





Art. 9043A - versione con porta accessori
Art. 9043/E - versione senza porta accessori



- Funzione Anaforesi - Funzione Cataforesi
- Funzione Sense, erogazione dell'impulso in automatico senza l'azionamento del comando a pedale
- Memory Key, memorizza ben 20 trattamenti, 4 per ogni metodo, e modificabili dall'operatore estetico
- Regolazioni digitali di tutti i parametri e del tempo di durata dell'impulso, in millesimi di secondo
- Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine della seduta
- Conta impulsi
- Ampio schermo retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa luminosità.

Accessori [pag. 43-45]

- n. l art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,100 mm
- n. l art. 9761 – Manipolo porta-ago
- n. l art. 9727 – Comando a pedale
- n. l art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca
- n. l art. 9758 – Manipolo sonda, completo di cavo estraibile
- n. l art. 9749 – Sonda per manipolo Thermosoft
- n. l art. 9732 – Depy Gel, confezione di gel inibente, 200 ml
- n. l art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile
- n. l art. 9731 – Cavo bipolare con spinotti Ø 4 mm
- n. l art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip, dim. 60x80H. mm
- n. l art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. l art. 9784 – Adattatore per elettrodo placca
- n. l art. 9791 – Manipolo isolato per l'utilizzo dei puntali: sfera, piattello
- n. l art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
- n. l art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante
- n. l art. 9779 – Memory Key

Depy Program Flash-Blend

Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Flash-Blend, si avvale dell'impiego di correnti miscelate di Termolisi + Elettrolisi, attraverso l'elettrodo ago, in sinergia all'innovativo sistema Flash. Il metodo Flash, erogando in pochi centesimi di secondo un impulso ad elevata intensità, contribuisce a ridurre drasticamente la sensibilità del soggetto in trattamento, aumentandone il risultato visibile sin dalle prime sedute.



Art. 9029A - versione con porta accessori

Art. 9029/E - versione senza porta accessori

Trattamenti e principali caratteristiche

- Metodo Flash
- Metodo Flash-Blend
- Metodo Elettrolisi
- Timer elettronico per impostare in automatico la durata del singolo impulso: da 0,5" a 10"
- Orologio digitale per visualizzare il tempo complessivo di ogni trattamento: funzione stand by, utile per sospendere momentaneamente il conteggio senza azzerare il display.
- Regolazioni e visualizzazioni luminose di potenza.



Accessori [pag. 43-45]

- n. l art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,100 mm
- n. l art. 9761 – Manipolo porta-ago
- n. l art. 9727 – Comando a pedale
- n. l art. 9771 – Elettrodo placca dim. 60x80 cm
- n. l art. 9784 – Adattatore per elettrodo placca - nero
- n. l art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. l art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca

DEPY PROGRAM ACCESSORIES



Art. 9732 Confezione Depy Gel per depilazione con sonda.



Art. 9743 Confezione aghi ø 0,075 mm (50 pz).



Art. 9744 Confezione aghi ø 0,100 mm (50 pz).



Art. 9745 Confezione aghi ø 0,127 mm (50 pz).



Art. 9746 Confezione aghi ø 0,150 mm (50 pz).



Art. 9759 Cavo unipolare per collegamento elettrodo placca.



Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in spugna dim. 80x60 mm.



Art. 9741 Confezione contenente 4 elettrodi placca con attacco automatico, dim: 35x45 mm.



Art. 9772 Fascia elastica per fissaggio placca dim. 40x10H cm.



Art. 9756 Elettrodo placca art. 9771 completo di adattatore art. 9784.



Art. 9779 Memory Key per Depy Complex art. 9043/E.



Art. 9837 Memory Card per Epylab.



Art. 9784R Adattatore per placca con innesto spinotto ø 4 mm (rosso).



Art. 9784N Adattatore per placca con innesto spinotto ø 4 mm (nero).



Art. 9791 Manipolo isolato per l'utilizzo di puntali: sfera, cilindro, piattello.



Art. 9749 Sonda per manipolo Thermosoft.




Art. 9794 Puntale a piattello per disincrostante.



Art. 9792 Puntale a sfera per micro-jono.



Art. 9731 Cavo bipolare con spinotti \varnothing 4 mm.

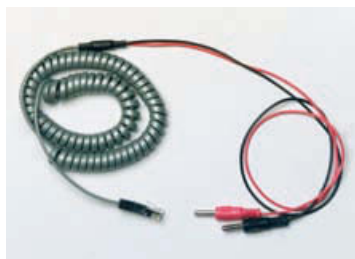

Art. 9947 Cavo bipolare per Jono e Disincrostante, spinotti positivo e negativo \varnothing 4 mm, spina Plug In.



Art. 9874 Gruppo alimentazione sorgente luminosa.



Art. 9883 Unità luminosa per anti-acne. Solo per uso extra cee.



Art. 9882 Unità luminosa per depilazione. 500 Clear. Solo per uso extra cee.



Art. 9884 Unità luminosa per fotoringiovanimento. Solo per uso extra cee.



Art. 99183 Unità di depilazione. 600 Dark.



Art. 9890 Pinza elettronica per elettrodo depilatore completa di cavo estraibile con connettore isolato.



Art. 9758 Manipolo sonda elettronico per Depy Complex.



Art. 9761 Manipolo porta ago con cavo e connettore isoalto lunghezza 80 mm.



Art. 9875 Sonda Fototipo "Color Test".



Art. 9727 Interruttore a pedale completo di cavo e spinotto.



Art. 9877 Piastrina amovibile per sterilizzazione e pulizia - versione grande per area 23x57 mm (13,1 cmq).



Art. 9878 Piastrina amovibile per sterilizzazione e pulizia - versione piccola per area 11x30 mm (3,0 cmq).



Art. 9886 Occhiali operatore.



Art. 19550 Occhiali cliente.



Art. 99170 Supporto porta filtro (filtro escluso).

Art. 99164 Manipolo luce pulsata nuovo.

Art. 99171 Manipolo luce pulsata ricondizionato.



Art. 99165 Set 4 riduzioni.




Art. 99166 Filtro rosso
per epilazione pelli scure.



Art. 99167 Filtro arancio
per epilazione pelli chiare.



Art. 99168 Filtro giallo per
fotoringiovanimento (optional su richiesta).

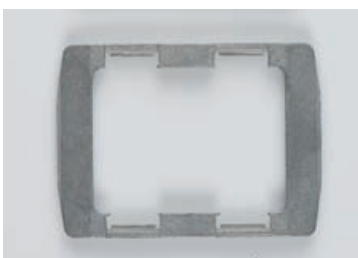

Art. 99169 Cornice porta filtro.



Art. 99200 Memory card

Optima 800kHz Intensive Ultrasound

Optima 800kHz Intensive Ultrasound nasce dall'esperienza professionale maturata dopo anni di studi e applicazioni nel campo dell'Ultrasuono Professionale applicato agli inestetismi della Cellulite e dell'Adipe.



Art. 9134

Tali esperienze, opportunamente calibrate e finalizzate alla funzione puramente estetica della persona, hanno consentito di affermare, in abbinamento all'intervento manuale dell'estetista, dopo innumerevoli test pratici, interessanti risultati anche in soggetti ove il problema della cellulite e dell'adipe era presente in modo importante.

Tali risultati attestano il raggiungimento di modificazioni radicalmente rappresentative sulle anomalie estetiche in essere, raggiunte con la massima sicurezza anche grazie alla capacità professionale e attenzione operativa riconosciute alle estetiste che hanno sviluppato i test in sinergia con il nostro Engineering Department.

Optima 800kHz, conforme alle recenti Direttive che regolamentano l'utilizzo delle apparecchiature professionali per estetica, genera un Onda Ultrasonica Unidirezionale ad Alta Intensità e Media Frequenza, in grado di raggiungere rapidamente e contrastare con efficacia l'inetetismo più difficile.

Optima 800kHz dispone di ben 2 applicatori d' ultrasuoni:

- Per le aree più vaste un manipolo dotato di ben **4 Emettitori Convergenti**, per generare vibrazione ed energia sonora convergente e ottimizzare il flusso dell'onda ultrasonica.

- Per le zone più difficili come l'addome e in prossimità delle articolazioni, il **Manipolo Mono-Emettitore**, compatto e con una potenza adeguata a trasmettere con efficacia l'onda ultrasonica.

Il meccanismo di azione biologica dell'energia ultrasonica è legato al potere meccanico-vibrante delle onde ultrasoniche. Esso esercita un micro massaggio che interessa i tessuti sui quali, il tradizionale massaggio, non determina alcuna azione.

Le onde ultrasoniche applicate al tessuto corporeo, perdono una certa porzione dell'energia emessa a causa della naturale barriera offerta dall'organismo: questo processo è conosciuto con il nome di "attenuazione" e si traduce in calore.

Il calore generato, in sinergia con l'onda ultrasonica, raggiunge l'area interessata dall'inetetismo, facilitando notevolmente il processo di riduzione.

Optima 800kHz favorisce quindi una maggiore permeabilità delle cellule adipose i cui contenuti (acidi grassi), una volta "sgretolati", vengono poi immessi nel sistema circolatorio locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico ed urinario.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230 Vca 50 - 60 Hz.
Assorbimento: MAX. 90 WATT
Generatore Ultrasuoni: 800kHz.
Max potenza uscita Ultrasuoni a contatto: 25W
Max potenza/cm² per emettitore (4): 2,5W

Accessori [pag. 95-99]

- n. l art. 99149 – Cinturino impugnatura manipolo ultrasound
- n. l art. 99153 – Penna Touch Screen
- n. l art. 99184 – Manipolo Ultrasuono 800kHz a 4 Emettitori
- n. l art. 99185 – Manipolo Ultrasuono 800kHz Mono-Emettitore
- n. l art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da 260 gr
- n. l art. 99200 – Memory card

Optima 800kHz Intensive Ultrasound


L'azione sinergica dei 4 Emettitori ad Ultrasuoni di OPTIMA 800kHz

I 4 Emettitori ad Ultrasuono agiscono in maniera sinergica per la riduzione e redistribuzione del grasso sottocutaneo, delle cellule adipose, con miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del corpo.


L'azione sinergica delle quattro testine ultrasoniche è così in grado di riattivare tutte le zone in cui si accumulano degli ammassi adiposi (es.: fianchi, cosce, glutei) ed utile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui sia presente una scarsa circolazione (cellulite).

Tra i 4 Emettitori si favorisce un aumento del metabolismo cellulare e, contemporaneamente, si intensifica l'elettrolisi nel liquido intra ed extra cellulare, favorendo la contrazione delle minuscole fibre muscolari poste nel derma con un conseguente miglioramento del trofismo tissutale.

L'Emettitore singolo, potenziato per garantire la massima erogazione, agisce anch'esso nel sottocutaneo e sulle cellule adipose, con il conseguente miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del corpo. Particolarmente adatto per l'area addominale ed in prossimità di aree di piccole dimensioni.

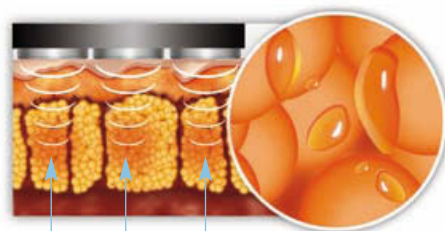

Rappresentazione dell'effetto vibrante ultrasonico con i 4 emettitori.

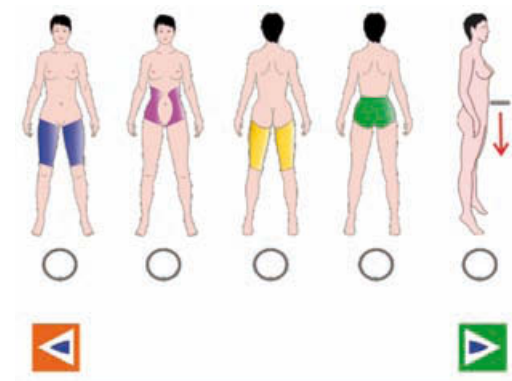

Art. 99200

Una pratica **MEMORY CARD** (10 card in dotazione) consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-impostato che personalizzato.

Optima 800kHz, può essere programmata per lavorare una o più aree specifiche mediante la selezione dell'area da trattare; l'apparecchio adeguerà automaticamente il tempo di trattamento per ogni singola zona.

Durante la fase di anamnesi sarà possibile inoltre scegliere le zone da trattare, l'ordine con la quale verranno trattate ed il tempo di permanenza su ciascuna zona.

Una volta avviato il trattamento, Optim 800kHz avviserà l'operatore estetico con messaggi visivi e sonori quando cambiare la zona da trattare e nel caso vi siano passaggi dalla fase energetica alla fase di massaggio.

Programmi disponibili

Optima 800kHz dispone di ben 27 differenti programmi:

in base ad un'anamnesi iniziale della cliente, il software sarà in grado di impostare e consigliare i parametri di lavoro più idonei, lasciando comunque all'operatore estetico la possibilità di modificare a proprio piacimento la potenza e la modulazione (effetto massaggio) di esecuzione.

MERCHANDISING Supporti pubblicitari per la vendita



Art. 110912401001 Depliant
informativi consumatrice



Art. 99179 Roto-Banner
80x210 cm

Body Kiss R.F. Face & Body



Art. 9127

Body Kiss R.F. Face & Body



Radiofrequenza nei trattamenti estetici

La metodologia ed il principio fisico è strettamente legato all'ipertermia localizzata. Le proprietà antalgiche e terapeutiche del calore, sono ben note ai ricercatori e sperimentatori che hanno applicato al corpo umano utilizzando i più disparati sistemi e metodi.

La Radiofrequenza rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei trattamenti anti-age, del rilassamento cutaneo e del rassodamento.

La Radiofrequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza, generalmente tra 1 e 6 MHz, a flusso variabile; tale flusso di energia non stimola il tessuto nervoso e muscolare ma produce un "effetto termico controllato", favorendo l'aumento della temperatura del derma.

Gli effetti della radiofrequenza non sono immediati, bensì sono gradualmente evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere il massimo effetto anche dopo 1-2 mesi dal trattamento.

Radiofrequenza viso

Il trattamento con Radiofrequenza permette di surriscaldare il sottocutaneo, per un'azione anti-aging, ristrutturante e rimodellante.

Il flusso della radiofrequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di collagene e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo collagene. È evidente che, dopo il ciclo di sedute previste, l'aspetto della pelle troverà nuovo turgore attenuando notevolmente gli antiestetici segni dell'invecchiamento cutaneo.

Radiofrequenza corpo

RF Body Kiss grazie alle sue onde è in grado di stimolare alcuni processi naturali quali la produzione del Collagene Elastina e Acido ialuronico incrementando la loro azione permettendo un riequilibrio delle aree trattate.

Accessori [pag. 95-99]

- n. 2 art. 9864 - Fasce elastiche 60 x 8cm.
- n. 8 art. 9865 - Fasce elastiche 80 x 8cm.
- n. 2 art. 9866 - Fasce elastiche 100 x 8cm.
- n. 16 art. 99146 - Placche elettrodo silicone mm 95 x 61 arrotondate R.F.
- n. 8 art. 99144 - Placche RF senza elettrodi
- n. 1 art. 99143 - Manipolo bipolare RF viso
- n. 10 art. 99147 - Memory card
- n. 16 art. 99145 - Elettrodo dorato mm 60 x 40 arrotondate R.F. - 1 pezzo
- n. 1 art. 99142 - Manipolo bipolare RF corpo
- n. 3 art. 9816 - Gel

Tramite un'onda diatermica bipolare, abbinata ai trattamenti tradizionali, RF Body Kiss, permette di trattare con ottimi risultati gli inestetismi più frequenti quali rilassamento cutaneo, adipe localizzato e cellulite.



L'innovativo sistema di applicazione della Radiofrequenza Bipolare corpo, per mezzo delle placche RF, in sinergia con il trattamento di Elettrostimolazione o di Elettrolipolisi, favorisce un benefico effetto visibile già dalle prime sedute. L'associazione delle due onde specifiche favorisce il rimodellamento cutaneo e il miglioramento del microcircolo, aiutando la corretta ripartizione del tessuto fibroso con diminuzione dei noduli antiestetici dell'edema locale, delle tossine accumulate e dei depositi di grasso, con conseguente tonificazione generale dei tessuti.

Il campo elettrico che si viene a creare fra i due elettrodi, determina un aumento del metabolismo cellulare, variando la permeabilità di membrana delle cellule stesse, con un maggior consumo di ossigeno ed un incremento della circolazione locale, favorendo gli scambi cellulari e la combustione locale dei grassi.

RF Body Kiss, oltre alla programmazione individuale dei trattamenti, dispone di ben **37 differenti programmi di lavoro**:

- 8 Mix R.F. + Elettrolipolisi
- 12 Mix R.F. Stimol
- 12 Stimolazione
- 2 Drenomassaggio elettronico
- 1 R.F. Manuale viso
- 1 R.F. Manuale corpo
- 1 R.F. Corpo con placche


Sequenza:

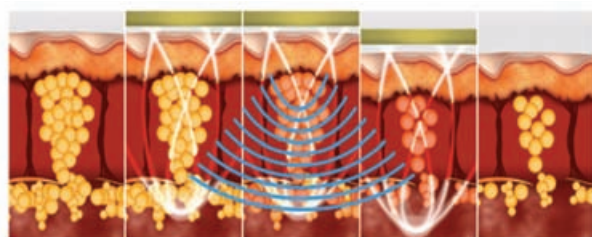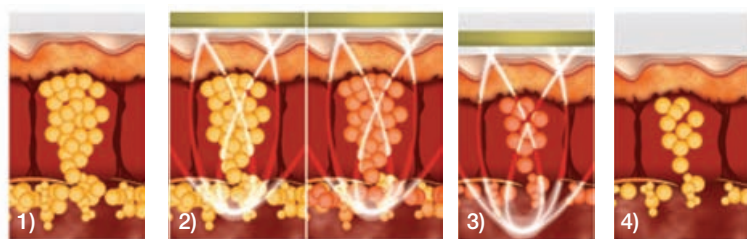

rappresenta nel disegno l'elettrolipolisi



rappresenta l'onda di R.F. (diatermia)

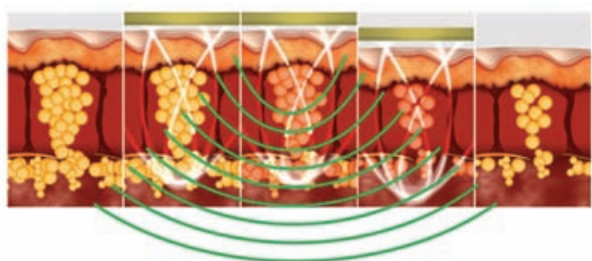

rappresenta nel disegno l'elettrostimolazione



rappresenta l'onda di R.F. (diatermia)



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Body Progress Well & Tonic

Well & Tonic è un moderno apparato per i trattamenti del corpo o del viso contro gli inestetismi della cellulite e del rilassamento cutaneo. Questa nuova tecnica, non invasiva, è risultata efficace per trattare svariati inestetismi cutanei come la cellulite, evidenziando, a livello del tessuto cutaneo, un miglioramento del flusso linfatico circolatorio nonché del metabolismo delle cellule adipose. Migliora il rilasciamento cutaneo favorendo benefici effetti anti-invecchiamento.



Art. 9085 Well & Tonic

Body Progress Well & Tonic Ultrasonic Professional

Well & Tonic Ultrasonic Professional è un moderno apparato per i trattamenti del corpo e del viso contro gli inestetismi della cellulite e del rilassamento cutaneo.

Stesse caratteristiche di Well & Tonic (art. 9085) in sinergia con l'azione degli ultrasuoni. 6 uscite indipendenti.




Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

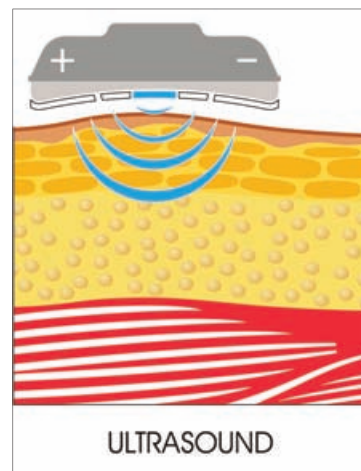

Body Progress Well & Tonic e Body Progress Well & Tonic Ultrasonic Professional

Per mezzo di applicatori specifici, si crea una **"ginnastica cutanea"** con leggere **pressioni positive**, come nei normali massaggi manuali, associata a pressione negative, che formano pliche cutanee, più o meno intensive, in funzione dei parametri di forza d'aspirazione selezionata.

Il linfodrenaggio e l'aumento di ossigenazione dei tessuti così ottenuto, permette un **riassorbimento dei liquidi di ristagno** e una **mobilizzazione del grasso sottocutaneo**. Per effettuare il trattamento correttamente, la tecnica prevede di trattare un'area maggiore rispetto a quella direttamente coinvolta dall'inestetismo.

Con Well & Tonic si effettuano trattamenti di drenaggio e massaggio ritmico con programmi di lavoro in modalità automatica e manuale. I programmi determinano la frequenza delle variazioni di aspirazione, rilascio e pressione. La regolazione dell'apparato aspirante, permette di agire con dolcezza nelle aree delicate quali: cellulite dolorosa, interno coscia o presenza di fragilità capillare. Per effetto di un'indotta iperemia, l'area trattata potrebbe mantenere un lieve rossore per circa 20-30 minuti.

In sintesi, gli effetti principali dell'azione con Well & Tonic sono:

- **DRENAGGIO LINFATICO**: conseguente naturale riduzione delle tossine
- **IPEREMIA LOCALE**: favorisce la rigenerazione ed ossigenazione dei tessuti
- **AZIONE DEFIBROSANTE**: attenua la sclerotizzazione del connettivo

Ne consegue che, dopo un adeguato ciclo di trattamenti con Well & Tonic, si possono rilevare i seguenti benefici:

- redistribuzione dei depositi grassi, con effetto di miglioramento, sia sul piano estetico che su quello funzionale, delle manifestazioni della cellulite
- rimodellamento, del profilo cutaneo, con o senza associazione di perdita di peso
- miglioramento sia dell'aspetto che del tono cutaneo
- effetto lifting delle irregolarità della superficie cutanea
- miglioramento del trofismo cutaneo favorito dall'incremento dell'azione linfatica
- prevenzione e riduzione dei segni di invecchiamento cutaneo.

Well & Tonic utilizza speciali tute protettive, Beauty Skin, necessarie per proteggere il tessuto superficiale connettivo dall'azione meccanica degli applicatori e mantenere il corretto profilo igienico del cliente.



Le tute Beauty Skin sono trattate con un processo di sanitizzazione del tessuto tramite **"SANITIZED HIGIENC TREATMENT"**, un procedimento particolare antimicotico e antibatterico.

Le tute Beauty Skin sono personali per ciclo di trattamenti, evitano il contatto diretto con gli applicatori e i manipoli, favorendo lo scorrimento dei rulli ed attenuando lo stacco del manipolo al cambio di zona. Well & Tonic sviluppa un tipo di massaggio meccanico effettuato con l'ausilio di un moderno ed ergonomico manipolo, che consente all'operatore estetico una comoda presa ed una estrema semplicità d'impiego. Il manipolo si avvale di particolari applicatori intercambiabili, rulli o sfere, che vengono impiegati in funzione dell'inestetismo da trattare. Il manipolo lavora in sinergia al trattamento di Cromofrequenza sia sul corpo che sul viso.



Corpo

PROGR. 1 stimolante - cellulite superficiale, con applicatori "Rullo". Utilizza le sfumature del colore rosso che sono stimolanti e riattivanti.

PROGR. 2 stimolante - cellulite profonda, con applicatori "Rullo". Utilizza il rosso che è il colore più penetrante, quindi in grado di arrivare in profondità.

PROGR. 3 stimolante - cellulite superficiale, con applicatore "Sfere". Utilizza le sfumature del colore rosso che sono stimolanti e riattivanti.

PROGR. 4 stimolante - cellulite profonda, con applicatore "Sfere". Utilizza il colore rosso che è più penetrante, quindi in grado di arrivare in profondità.

PROGR. 5 connettivale, con applicatore "Rulli". I colori utilizzati sono il rosso stimolante/riattivante, e l'arancione con azione su cellulite molle e edematosa.

PROGR. 6 connettivale, con applicatore "Sfere". I colori utilizzati sono il rosso



stimolante/riattivante, e l'**arancione** con azione su cellulite molle e edematosa.

PROGR. 7 drenante, con applicatore "Rulli". Colori utilizzati: l'**azzurro/blu** favoriscono la riattivazione della circolazione linfatica, il **verde** da tono ai tessuti rilassati.

PROGR. 8 drenante, con applicatore "Sfere": Stessa azione del programma 7. Colori utilizzati: l'**azzurro/blu** favoriscono la riattivazione della circolazione linfatica, il **verde** da tono ai tessuti rilassati.

PROGR. 9 antistress, con applicatore "Sfere": massaggio molto piacevole. L'utilizzo delle sfere consente di estenderlo su tutto il corpo, con una azione riattivante e rilassante tipica del massaggio. Utilizza prevalentemente i colori **blu** e **verde** con effetto rilassante.

PROGR. 10-11 corpo generale con applicatori "Rulli" e "Sfere": programma universale, non specifico. Può essere impiegato anche per soggetti maschili che tendenzialmente non presentino inestetismi evidenti (cellulite ecc.). In base alla zona ed al tessuto da trattare, possono essere utilizzati i rulli o le sfere. Alternanza di tutta la scala colori per un riequilibrio generale.

Viso

PROGR. 1 stimolante, adatto ad un tipo di pelle asfittica, da riattivare. Azione e la giusta aspirazione consentono un aumento del microcircolo, favorendo maggior nutrimento ai tessuti. Il colore utilizzato sarà il **rosso**, stimolante.

PROGR. 2 drenante: favorisce il deflusso di scorie e tossine, utilizzato soprattutto nei casi di gonfiore sotto agli occhi o esteso in tutto il viso. I colori utilizzati saranno gradazioni leggere di **rosso**.

PROGR. 3 effetto lifting: l'azione e l'aspirazione selezionate aumentano l'irrorazione nei punti critici (ad es. in presenza di rughe), conferendo elasticità ai tessuti e maggior distensione favorendo la rivitalizzazione della pelle



invecchiata. Si utilizzerà il colore **arancione** ad azione stimolante e rivitalizzante, e sfumature di **rosso chiaro (rosa)**, per un effetto delicatamente stimolante e antirughe.

PROGR. 4 rilassante: l'impiego della Cromofrequenza consente un'azione benefica sul circolo linfatico, dovuta alla leggera e superficiale stimolazione dell'aspirazione, rilassante grazie alla gamma di colori utilizzati, l'**azzurro/blu** per l'effetto rilassante e il **verde** con effetto purificante.

Che cos'è la Cromofrequenza

Secondo la fisica moderna, dall'osservazione di corpi illuminati da una sorgente di luce bianca, siamo indotti ad attribuire a essi un colore per la diversa sensazione che l'occhio ne riceve. Il colore dei corpi non è quindi da intendersi come una proprietà esclusiva dei singoli, ma come un qualcosa dipendente da tre elementi: sorgente luminosa - oggetto - occhio. Psicologi e fisici si sono trovati d'accordo nell'affermare che il colore è una sensazione visiva che si ha quando determinate onde elettromagnetiche stimolano la retina. Dalla diversa lunghezza di queste onde dipende la varietà dei colori. Componendo un raggio di luce bianca per mezzo di un prisma, si ottengono i colori fondamentali: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, turchino e violetto. Si chiamano colori complementari quelli che insieme danno la luce bianca.

Frequenze dei colori:

La luce, nei suoi sette colori che la formano, è energia radiante visibile. Essa viaggia nello spazio sotto forma di onde vibratorie che si diversificano tra loro in base alle lunghezze d'onda misurate, Ångstrom (unità di misura delle radiazioni), che equivale a un centomillesimo di centimetro. L'occhio umano riesce a percepire solo radiazioni comprese tra 4000 e 8000 Å (ångstrom). Ogni fascia di lunghezza d'onda corrisponde a un colore ed ha una specifica azione terapeutica:

ROSSO:	6200	Å	(ångstrom)	=	(620 nanometri)
ARANCIO:	5890	Å	(ångstrom)	=	(589 nanometri)
GIALLO:	5510	Å	(ångstrom)	=	(551 nanometri)
VERDE:	5120	Å	(ångstrom)	=	(512 nanometri)
BLU:	4750	Å	(ångstrom)	=	(475 nanometri)
INDACO:	4490	Å	(ångstrom)	=	(449 nanometri)
VIOLA:	4230	Å	(ångstrom)	=	(423 nanometri)

Al di sotto del viola troviamo l'ultravioletto e al di sopra del rosso l'infrarosso. La quantità di energia di ciascun colore è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Più è alta la lunghezza d'onda più forte sarà la penetrazione cutanea e minore la carica energetica.

Ne deriva che il rosso è il colore più penetrante e a seguire l'arancio, il giallo, il verde, il blu, l'indaco e il viola. Quest'ultimo arriva a profondità limitate, ma infonde un'alta quantità di energia.



Body Progress Well & Tonic Ultrasonic Professional

Per incrementare l'azione del massaggio endodermico **l'interazione degli Ultrasuoni**, applicati prima del massaggio, favorisce il disgregamento delle cellule adipose preparando l'area da trattare facilitando, in questo modo, l'azione meccanica del massaggio endodermico, aumentandone l'efficacia.


Gli ultrasuoni.

Le onde ultrasoniche, applicate al tessuto corporeo, perdono una certa porzione della loro energia a causa della naturale barriera offerta dall'organismo: questo processo è conosciuto con il nome di attenuazione e si traduce in calore. L'interazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici favorisce **l'azione meccanica, termica e chimica**.

L'**Azione meccanica** è dovuta al movimento delle particelle dei tessuti in contatto con l'onda ultrasonica. Le onde ultrasoniche prodotte favoriscono un aumento della permeabilità della membrana e la separazione dei liquidi contenuti.

L'**Azione termica** dipende essenzialmente dalle caratteristiche di resistenza del tessuto corporeo. Il passaggio delle onde ultrasoniche attraverso i tessuti "molliti" sviluppa un naturale innalzamento della temperatura, che incrementa le reazioni metaboliche e si traduce, nelle cellule adipose, in un aumento della lipolisi.

L'**Azione chimica** favorisce la variazione del pH locale e della permeabilità delle membrane cellulari.

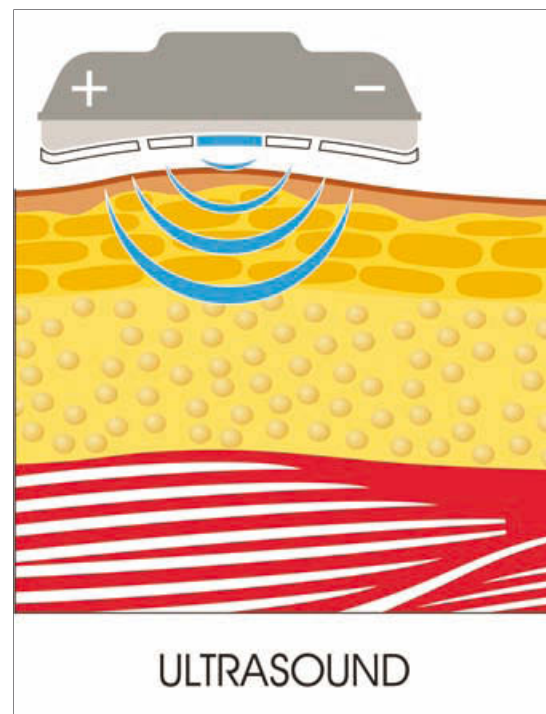

Accessori per Well & Tonic e Well & Tonic Ultrasonic Professional [pag. 95-99]

- n. 1 art. 9896 – Manipolo Porta Applicatori per trattamenti corpo, completo di Funzione Cromoterapia
- n. 1 art. 9897 – Manipolo per trattamenti viso, completo di Funzione Cromoterapia
- n. 1 art. 9898 – Applicatore Rullo Grande
- n. 1 art. 9899 – Applicatore Rullo Piccolo
- n. 2 art. 9906 – Applicatore Sfere
- n. 10 art. 9907 – Piastrina Igienica per Manipolo Viso
- n. 12 art. 9911 – Busta Porta-Tutina
- n. 5 art. 9908 – Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia ML
- n. 5 art. 9909 – Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia XL
- n. 2 art. 9910 – Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia XXL

Accessori per Well & Tonic [pag. 95-99]

- n. 10 art. 9892 – Memory Card per art. 9085

Accessori per Well & Tonic Ultrasonic Professional [pag. 95-99]

- n. 10 art. 9930 – Memory Card per art. 9087
- n. 6 art. 9861 – Placche Ultrasoniche
- n. 2 art. 9864 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x8H. cm
- n. 4 art. 9865 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x8H. cm
- n. 2 art. 9866 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x8H. cm
- n. 3 art. 9816 – Gel per elettrostimolazione

Body Progress Soft & Solve

Soft & Solve è un'apparecchiatura computerizzata di ultima generazione che, grazie alla selezione di particolari modelli d'onde elettriche lipolitiche, in sinergia combinata con l'applicazione localizzata dei raggi infrarossi, contribuisce alla riduzione del tessuto adiposo. L'emissione fotobiologica infrarossa coinvolge delicatamente i tessuti adiposi aumentandone la temperatura e l'attività naturale enzimatica, atta a favorire la lipolisi locale.



Art. 9083

Body Progress Soft & Solve

I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa tra 760 e 1000 nm (manometro) e vengono chiamati infrarossi per la vicinanza del colore rosso allo spettro (gamma di frequenza) della luce visibile, è uno dei colori percepibili all'occhio umano.

I raggi infrarossi sono in grado di attraversare tutti gli strati dell'epidermide senza riscaldarli e raggiungere così il pannicolo adiposo. La radiazione fotobiologica dell'infrarosso, una volta raggiunto l'area con l'adipe, ne aumenta la temperatura e la conseguente attività enzimatica che favorisce la lipolisi locale.

Particolarità di Soft & Solve è la **placca Infrared Professional** che, oltre ad avere una zona centrale di emissione dell'infrarosso, dispone di due elettrodi aggiuntivi per effettuare in sinergia trattamenti di elettrolipolisi, stimolazione o drenaggio localizzato. In questa particolare applicazione non si otterrà la stimolazione della fascia muscolare ma una bonificazione locale che favorisce la migrazione dei liquidi non metabolizzati attraverso il circolo linfatico.

Altrettanto importante è la possibilità, sfruttando **gli innovativi 6 differenti modelli d'onde elettromagnetiche**, di combinare tra loro le 6 differenti funzioni eccitomotricie e di utilizzare Soft & Solve come un vero e proprio elettrostimolatore anche senza l'impiego delle placche Infrared Professional, ma attraverso i tradizionali elettrodi conduttivi.

Riduzione della cellulite Elettrolipolisi.

Sviluppa un'azione tonico stimolante atta a favorire la riduzione dei depositi cellulitici, i quali, stimolando la circolazione locale, aumentano le richieste metaboliche delle cellule ed il conseguente consumo di grassi.

Miglioramento del sistema circolatorio locale stimola le strutture elastiche del derma, rassodando la cute e favorendo un drenaggio di tutte le sostanze convogliate nel liquido interstiziale, per una facile eliminazione attraverso la diuresi.

L'azione sinergica delle correnti ondulatorie eccitomotrici a bassa frequenza, sviluppa una benefica azione tonico-stimolante, finalizzata alla concreta e progressiva riduzione della massa cellulitica esistente.

Drenaggio sequenziale al viso o al corpo, attraverso il trattamento di elettrostimolazione sequenziale, apporta al circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive. Tale azione migliora sia il tono muscolare che l'aspetto estetico della pelle, favorendo l'aumento naturale della diuresi nei soggetti con ritenzione idrica.

Snellimento localizzato dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo.

Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nell'eventuale prodotto utilizzato, è evidente già dalle prime sedute.

Rassodamento delle fasce muscolari con notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e dell'aspetto della pelle.

La stimolazione di tutto il corpo è effettuata in generale con tre tipologie di trattamento, in funzione delle caratteristiche della persona da trattare. Gambe, glutei, addome e pettorali tonificati, senza escludere i muscoli facciali con una conseguente riduzione della lassità del viso migliorandone la lucentezza della pelle che, unitamente ad una attenuazione dell'effetto di affaticamento, conferiscono un aspetto rivitalizzato.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Trattamenti al viso di elettrostimolazione e linfodrenaggio

- Grande schermo digitale ad elevatissima risoluzione
- Easy Pad: sistema di visualizzazione sullo schermo del corretto posizionamento degli elettrodi.
- 43 differenti trattamenti:
 - 8 programmi Infrared + Elettrolipolisi
 - 6 programmi Infrared + Elettrostimolazione Donna
 - 7 programmi Elettrostimolazione Donna
 - 6 programmi Infrared + Elettrostimolazione Uomo
 - 6 programmi Elettrostimolazione Uomo
 - 2 programmi Infrared + Drenomassaggio
 - 8 programmi Drenomassaggio Corpo e Viso

Parametri regolabili per l'impostazione individuale:

- Erogazione delle correnti
- Erogazione dell'onda Infrarosso
- Tempo del trattamento
- Tempo per ogni fase del trattamento
- Valori di frequenza, da 2Hz. a 198Hz.
- Il tempo di pausa impostato: regolabile da -1 a + 10 secondi
- Il tempo di durata emissione impulso impostato: regolabile da 1 a 10 secondi
- Selezione del tipo di onda elettrica da utilizzare

Programmi personalizzati con **MEMORY CARD**. Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card.



Accessori [pag. 95-99]

- n. 1 art. 9869 – Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di connessione
- n. 10 art. 9845 – Cavo bipolare per elettrodi placca
- n. 2 art. 9864 – Fascia 60x80 mm grigia
- n. 8 art. 9865 – Fascia 80x80 mm grigia
- n. 2 art. 9866 – Fascia 100x80 mm grigia
- n. 8 art. 9741 – Confezione 4 elettrodi 35x45 mm
- n. 8 art. 9748 – Confezione 4 elettrodi 45x80 mm
- n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca 120x80 mm
- n. 4 art. 9770 – Confezione 30 pz. elettrodi monouso
- n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca 60x80 mm
- n. 4 art. 9772 – Fascia 40x10 mm azzurra
- n. 4 art. 9773 – Fascia 60x10 mm azzurra
- n. 4 art. 9774 – Fascia 80x10 mm azzurra
- n. 4 art. 9775 – Fascia 100x10 mm azzurra
- n. 8 art. 9893 – Placca con emettitore infrarossi
- n. 10 art. 9891 – Memory card Soft & Solve
- n. 16 art. 9894 – Elettrodi in spugna con doppia connessione per emettitore infrarosso, 56 x 90 mm
- n. 8 art. 9895 – Confezione 4 elettrodi monouso con doppia connessione per emettitore ad infrarosso, 53x96 mm

Optima Total Cavity

SOLO PER USO EXTRA CEE.

Optima nasce dall'esperienza professionale maturata in settori non riconducibili a quello dell'estetica e sviluppata nel campo specifico del sistema cavitazionale ultrasonico.



Art. 9126

Tali esperienze opportunamente calibrate e finalizzate alla funzione puramente estetica della persona, hanno consentito di affermare, in abbinamento all'intervento manuale dell'estetista, dopo innumerevoli test pratici, interessanti risultati anche in soggetti ove il problema della cellulite e dell'adipe era presente in modo importante.

Tali risultati attestano il raggiungimento di modificazioni radicalmente rappresentative sulle anomalie estetiche in essere, raggiunte con la massima sicurezza anche grazie alla capacità professionale e attenzione operativa riconosciute alle estetiste che hanno sviluppato i test in sinergia con l'Engineering Department.

Optima impiega la tecnologia ad ultrasuoni a bassa frequenza; utilizza ben **4 emettitori convergenti** sullo stesso manipolo, **con un'area di lavoro di ben 39 cm²**, per generare vibrazione ed energia sonora. Il meccanismo di azione biologica dell'energia ultrasonica è legato al potere meccanico-vibrante delle onde ultrasoniche esercitando un micro massaggio che interessa i tessuti sui quali, il tradizionale massaggio, non determina alcuna azione.

Le onde ultrasoniche applicate al tessuto corporeo, perdono una certa porzione dell'energia emessa a causa della naturale barriera offerta dall'organismo: questo processo è conosciuto con il nome di "attenuazione" e si traduce in calore.

Optima permette di agire su tutti gli inestetismi impiegando una nuova e rivoluzionaria forma di ultrasuoni a bassa frequenza, con un effetto equivalente a quello degli ultrasuoni ad alta intensità.

Optima favorisce quindi una maggiore permeabilità delle cellule adipose i cui contenuti (acidi grassi), una volta "sgretolati", vengono poi immessi nel sistema circolatorio locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico ed urinario.

L'azione sinergica delle 4 testine ad ultrasuoni di OPTIMA

Le 4 teste ad ultrasuono agiscono in maniera sinergica per la riduzione e redistribuzione del grasso sottocutaneo, delle cellule adipose, con miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del corpo.

L'azione sinergica delle quattro testine ultrasoniche è così in grado di riattivare tutte le zone in cui si accumulano degli ammassi adiposi (fianchi, ventre, ginocchia, cosce) ed utile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui sia presente una scarsa circolazione (cellulite).

Tra i 4 emettitori si favorisce un aumento del metabolismo cellulare e, contemporaneamente, si intensifica l'elettrolisi nel liquido intra ed extra cellulare, favorendo la contrazione delle minuscole fibre muscolari poste nel derma con un conseguente miglioramento del trofismo tissutale.

Memory Card

Una pratica MEMORY CARD consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-impostato che personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card nell'apposita presa dalla schermata del menu principale.

Optima, può essere programmata per lavorare una o più zone specifiche mediante la selezione dell'area da trattare; l'apparecchio adeguerà automaticamente il tempo di trattamento per ogni singola zona. Durante la fase di anamnesi sarà possibile inoltre scegliere le aree da trattare, l'ordine e il tempo di permanenza su ciascuna zona.

Una volta avviato il trattamento, Optima avviserà l'operatore estetico con messaggi visivi e sonori quando cambiare la zona da trattare e nel caso vi siano passaggi dalla fase energetica alla fase di massaggio.

Programmi disponibili

Optima dispone di ben 27 differenti programmi: in base ad un'anamnesi iniziale della cliente, il software sarà in grado di impostare e consigliare i parametri di lavoro più idonei, lasciando comunque all'operatore estetico la possibilità di modificare a proprio piacimento la potenza e la modulazione (effetto massaggio) di esecuzione.

Accessori [pag. 95-99]

- n. 2 art. 99149 - Cinturino impugnatura manipolo Cavitazione
- n. 1 art. 99148 - Manipolo Ultrasuono Cavitazione con 4 emettitori
- n. 3 art. 9816 - Gel
- n. 10 art. 99152 - Memory card
- n. 1 art. 99153 - Penna touch screen




Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.




Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

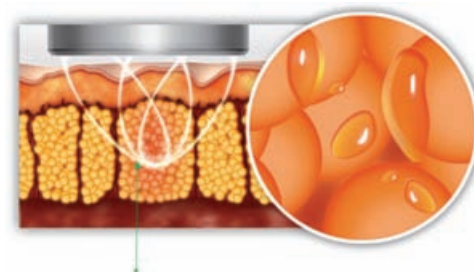

Rappresentazione dell'effetto vibrante ultrasonico con i 4 emettitori.

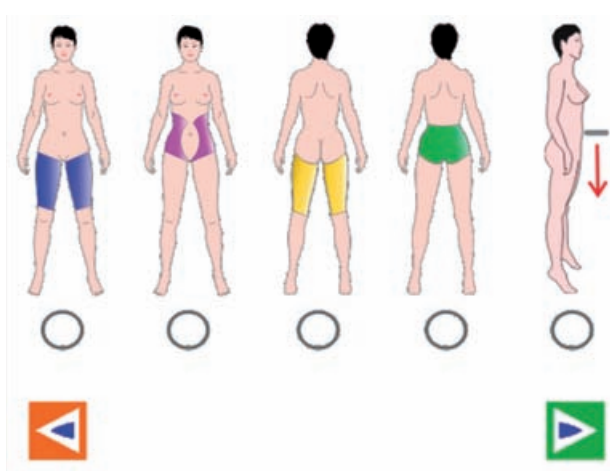

Body Progress Modeling

Apparecchiatura per trattamenti di presso massaggio appositamente testata per ottenere un effetto linfodrenante mediante l'applicazione d'appositi gambali e bracciali suddivisi in settori sovrapposti.



Art. 9078

Body Progress Modeling

L'erogazione d'aria è costantemente controllata da un microprocessore che mantiene costante il flusso d'aria e la pressione all'interno dei settori gonfiabili. Ne risulta così una compressione fisiologicamente peristaltica che come un'onda avvolge uniformemente l'arto dal basso verso l'alto, favorendo l'eliminazione delle scorie trattenute dai tessuti.

Considerando l'utilizzo del linfodrenaggio sequenziale in un programma di trattamenti estetici riducenti, Body Progress Modeling aiuta l'eliminazione del liquido interstiziale in eccesso e la riattivazione dei processi naturali locali, nonché la microcircolazione zonale.

- 10 uscite attive.
- Total Body, un set completo composto da:
 - gambali con pressori inguinali;
 - camere per area addominale;
 - bracciali completi di settori gonfiabili per le mani;
 - contenitore Marsupio.
- Programmi personalizzati con MEMORY CARD.

Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato (nuovi programmi), ripetibile con il semplice inserimento della card nell'apposita presa.

- 3 Programmi corpo generale: trattamenti che consentono di lavorare contemporaneamente gli arti inferiori e arti superiori programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.
- 6 Programmi gambe: trattamenti che agiscono sugli arti inferiori a 8 settori, programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.
- 1 Programma braccia: trattamento ascendente peristaltico a 2 settori favorisce lo scarico di liquidi garantendo una riduzione della parte trattata.
- Ampio schermo digitale "Touch Screen".

Parametri regolabili dall'operatore estetico per l'impostazione individuale:

- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- tempo di permanenza di ogni segmento gonfiabile, regolabile da 1 a 40 secondi: regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo o esclusione;
- facoltà di eludere dal programma uno o più settori gonfiabili: funzione estremamente utile nel caso vi siano aree da non trattare.

Funzione test

Attivando il pulsante relativo verrà visualizzata tutta la sequenza del trattamento selezionato.

Funzione help

Fornisce rapide spiegazioni "on line" durante l'utilizzo dell'apparecchio.

Sicurezza d'impiego

Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell'ultima generazione mantiene i valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di massaggio. Garantisce inoltre l'interruzione automatica del trattamento qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il superamento della soglia massima consentita di 0,2 ATM/132 mm HG, salvaguardando l'apparato.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

ACCESSORI [pag. 95-99]

n. 1 art. 9836 – Gambale Modeling Progress.

n. 20 art. 9783 – Panta-preso in T.N.T.

n. 10 art. 9839 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti personalizzati.

Body Progress Benexere

Apparecchio computerizzato di nuova concezione che, utilizzando in perfetta sinergia la tecnologia degli Ultrasuoni abbinata a 6 differenti modelli di onde elettromagnetiche, contribuisce alla riduzione del tessuto adiposo e della cellulite, migliorando contemporaneamente, sia il tono muscolare sia l'aspetto dell'epidermide.



Art. 9074

Gli ultrasuoni

Le onde ultrasoniche, applicate al tessuto corporeo, perdono una certa porzione della loro energia a causa della naturale barriera offerta dall'organismo: questo processo è conosciuto con il nome di attenuazione e si traduce in calore.

L'interazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici favorisce l'azione meccanica, termica e chimica.

L'azione meccanica è dovuta al movimento delle particelle dei tessuti in contatto con l'onda ultrasonica. Le onde ultrasoniche prodotte favoriscono un aumento della permeabilità della membrana e la separazione dei liquidi contenuti.

L'azione termica dipende essenzialmente dalle caratteristiche di resistenza del tessuto corporeo. Il passaggio delle onde ultrasoniche attraverso i tessuti "molliti" sviluppa un naturale innalzamento della temperatura, che incrementa le reazioni metaboliche e si traduce, nelle cellule adipose, in un aumento della lipolisi.

L'azione chimica favorisce la variazione del pH locale e della permeabilità delle membrane cellulari. Particolarità di Benexere è la placca ultrasuoni che oltre ad avere una parte metallica centrale per l'emissione dell'onda ultrasonica, dispone di ulteriori due elettrodi per effettuare in sinergia trattamenti di Elettrolipolisi o di stimolazione e drenaggio localizzato. In questa particolare applicazione non si otterrà la stimolazione della fascia muscolare ma una tonificazione locale nell'area della placca Ultrasonica. Altrettanto importante è la possibilità, sfruttando gli innovativi 6 differenti modelli d'onde elettromagnetiche, di combinare tra loro le 6 differenti funzioni eccitomotricie e di utilizzare Benexere come un vero e proprio elettrostimolatore, anche senza l'impiego delle placche Ultrasoniche, ma attraverso i tradizionali elettrodi conduttivi.



- **Riduzione della cellulite Elettrolipolisi.** Sviluppa un'azione tonico stimolante atta a favorire la riduzione dei depositi cellulitici, i quali, stimolando la circolazione locale, aumentano le richieste metaboliche delle cellule ed il conseguente consumo di grassi.
- **Miglioramento del sistema circolatorio locale** stimola le strutture elastiche del derma, rassodando la cute e favorendo un drenaggio di tutte le sostanze convogliate nel liquido interstiziale, per una facile eliminazione attraverso la diuresi.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Body Progress Benexere

- **Drenaggio sequenziale al viso o al corpo**, attraverso il trattamento di elettrostimolazione sequenziale, apporta al circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive.
- **Snellimento localizzato** dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo. Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nell'eventuale prodotto utilizzato, è evidente già dalle prime sedute.
- **Rassodamento delle fasce muscolari** con notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e dell'aspetto della pelle. La stimolazione di tutto il corpo è effettuata in generale con tre tipologie di trattamento, in funzione delle caratteristiche della persona da trattare.
- Trattamenti al viso di elettrostimolazione e linfodrenaggio
- Grande schermo digitale ad elevatissima risoluzione
- Easy Pad: sistema di visualizzazione sullo schermo del corretto posizionamento degli elettrodi.



- 43 differenti trattamenti:

- 8 programmi Ultrasuoni + Elettrolipolisi
- 6 programmi Ultrasuoni + Elettrostimolazione Donna
- 7 programmi Elettrostimolazione Donna
- 6 programmi Ultrasuoni + Elettrostimolazione Uomo
- 6 programmi Elettrostimolazione Uomo
- 2 programmi Ultrasuoni + Drenomassaggio
- 8 programmi Drenomassaggio Corpo e Viso

Parametri regolabili per l'impostazione individuale:

- Erogazione delle correnti
- Erogazione dell'onda Ultrasonica
- Tempo del trattamento
- Tempo per ogni fase del trattamento
- Valori di frequenza, da 2Hz. a 198Hz.
- Il tempo di pausa impostato: regolabile da -1 a + 10 secondi
- Il tempo di durata emissione impulso impostato: regolabile da 1 a 10 secondi
- Selezione del tipo di onda elettrica da utilizzare
- Funzione "HELP" fornisce importanti informazioni utili sull'operatività dell'apparecchio fornendo rapide spiegazioni "on line"
- Programmi personalizzati con MEMORY CARD. Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card.



Accessori [pag. 95-99]

- n. 10 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG
- n. 8 art. 9861 – Placche Ultrasoniche
- n. 8 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 8 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm
- n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 120x80 mm
- n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9864 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x8H. cm
- n. 8 art. 9865 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x8H. cm
- n. 2 art. 9866 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x8H. cm
- n. 16 art. 9867 – Elettrodo placca in gomma per placca ultrasonica
- n. 3 art. 9868 – confezione contenente 2 bende saline
- n. 4 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. 4 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 4 art. 9774 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
- n. 4 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
- n. 4 art. 9770 – Confezione contenente 50 elettrodi adesivi mono paziente, Ø 35mm
- n. 10 art. 9862 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti personalizzati
- n. 3 art. 9816 – Gel per elettrostimolazione
- n. 1 art. 9869 – Marsupio per elettrostimolazione

Optional [pag. 95-99]

- Art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG a quattro derivazioni

Beauty & Beauty Reducer

Avvalendosi del metodo di “Elettroscultura”, basato sul principio dell’elettroforesi, Beauty & Beauty Reducer sviluppa un’azione benefica finalizzata alla riduzione di circonferenza e particolarmente indicata per i soggetti con evidenti inestetismi, identificabili in vaste aree del corpo.



Art. 9097

Beauty & Beauty Reducer

In sinergia con il trattamento di elettroscultura, è possibile utilizzare il programma di rassodamento delle fasce muscolari per mezzo della funzione di elettrostimolazione, appositamente elaborata per incrementare la fase di rassodamento nelle aree trattate, apportando un notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e della pelle.

Reducer (elettroscultura)

L'azione combinata di opportuni prodotti cosmetici, abbinata alle correnti galvaniche, ondulatorie, eccito-motorie a bassa frequenza, sviluppa un benefico effetto tonico-stimolante finalizzato alla progressiva riduzione della massa cellulitica.



Snellimento localizzato dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici. L'elettroforesi favorisce l'azione positiva ed efficace di opportuni preparati cosmetici snellenti e rassodanti.

Beauty & Beauty Reducer è particolarmente indicato come elemento coadiuvante nel contesto di trattamenti volti alla prevenzione di un processo di formazione della cellulite e dell'adipe.

Miglioramento dell'elasticità dei tessuti, conseguente al naturale riequilibrio dell'attività del tessuto e degli scambi cellulari. Effetto decongestionante con maggiore evidenza per gli arti inferiori.

L'applicazione è particolarmente indicata come elemento coadiuvante nel contesto di trattamenti volti alla prevenzione di un processo di formazione della cellulite e dell'adipe.

Stimol (elettrostimolazione)

Rassodamento delle fasce muscolari con notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e dell'aspetto della pelle.

La stimolazione muscolare può essere effettuata in sinergia al trattamento di elettroscultura per rassodare e tonificare l'area dei glutei o addominale. Se utilizzata singolarmente, la funzione Stimol, dispone di ben 6 canali indipendenti per il rassodamento delle aree trattate con il trattamento di elettroscultura.

Mediante l'impiego dei cavi opzionali a 4 derivazioni (art. 9848), è possibile sdoppiare le singole uscite di elettrostimolazione sino ad interessare 12 zone d'applicazione.

Reducer + Stimol

5 programmi:

- Cellulite + Rassodamento Glutei
- Cellulite + Rassodamento Addominali
- Cellulite+ rassodamento glutei e addominali
- Cellulite compatta + drenaggio



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Reducer

7 programmi:

- Cellulite
- Cellulite Molle
- Cellulite Compatta
- Cellulite Adipe
- Drenaggio Intensivo
- Seno Addome
- Braccia, seno e Addome


Stimol

5 programmi:

- Glutei e cosce
- Addominali
- Seno
- Cosce
- Cosce ed Addominali

Grande versatilità

- 4 + 2 canali indipendenti per la funzione Stimol
- 2 canali indipendenti per la funzione Reducer
- Visualizzazione di tutte le metodologie d'applicazione degli elettrodi sul grande schermo a colori
- Impostazione rapida di tutti i parametri di lavoro
- Trattamenti personalizzati mediante l'impiego della "Confidential Card"
- Ampia e completa gamma di accessori
- Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di connessione

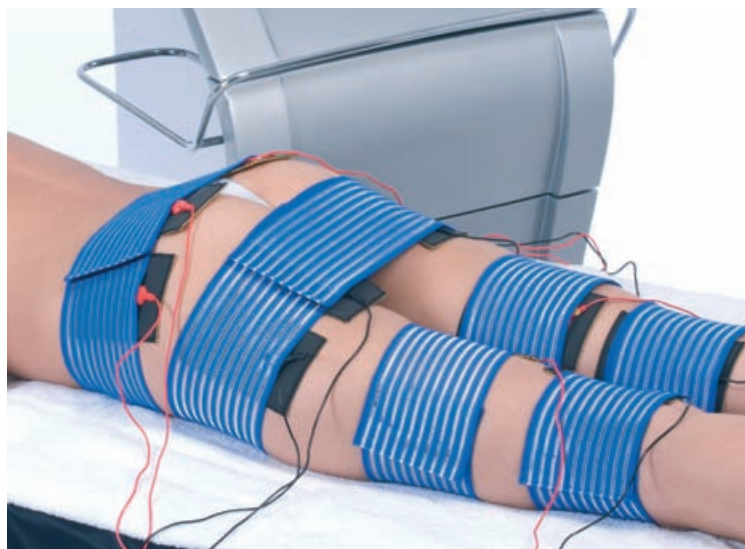

Accessori [pag. 95-99]

- n. 6 art. 9845 - Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG-IN
- n. 4 art. 9848 - Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG-IN a quattro derivazioni
- n. 1 art. 9980 - Marsupio porta-elettrodi completo di Kit cavi di connessione.
- n. 6 art. 9748 - Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 12 art. 9771 - Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico 60 x 80 mm
- n. 2 art. 9772 - Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H.cm
- n. 2 art. 9773 - Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 2 art. 9774 - Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
- n. 2 art. 9775 - Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
- n. 10 art. 9976 - Memory Card
- n. 10 art. 99154 - Adattatore attacco automatico / coccodrillo - rosso
- n. 10 art. 99155 - Adattatore attacco automatico / coccodrillo - nero
- n. 5 art. 9785 - Benda in cotone crespata ed elasticizzata 20 cm x 5 mt.
- n. 12 art. 9768 - Elettrodo placca dim. 120 x 80 mm
- n. 2 art. 9766 - Elettrodo striscia in gomma conduttiva, dimensioni: lunghezza 8 mt - altezza 2,5 cm

Body Progress Body Sculpture Ultrasonic & Infrared



Art. 9093

La selezione di particolari modelli d'onde elettriche lipolitiche, tra cui l'elettrolipolisi e l'elettrostimolazione, in sinergia combinata con l'applicazione localizzata dei **Raggi Infrarossi** e degli **Ultrasuoni**, ne aumenta l'effetto biologico sui tessuti irradiati.

L'emissione **fotobiologica infrarossa** coinvolge delicatamente i tessuti adiposi aumentandone la temperatura e quindi l'attività naturale enzimatica atta a favorire la lipolisi locale, mentre gli **Ultrasuoni** apportano una visibile riduzione del tessuto adiposo e della cellulite.

I programmi combinati di elettrostimolazione e drenaggio, diversificati con 6 differenti modelli di onde elettromagnetiche erogate in sinergia con gli **Ultrasuoni + Raggi Infrarossi**, favoriscono il miglioramento del tono muscolare, agiscono sul rilassamento cutaneo dando un benefico apporto all'aspetto dell'epidermide.

Gli ultrasuoni

Le onde ultrasoniche, applicate al tessuto corporeo, perdono una certa porzione della loro energia a causa della naturale barriera offerta dall'organismo: questo processo è conosciuto con il nome di attenuazione e si traduce in calore. L'interazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici favorisce l'**azione meccanica, termica e chimica**.


L'**Azione meccanica** è dovuta al movimento delle particelle dei tessuti in contatto con l'onda ultrasonica. Le onde ultrasoniche prodotte favoriscono un aumento della permeabilità della membrana e la separazione dei liquidi contenuti.

L'**Azione termica** dipende essenzialmente dalle caratteristiche di resistenza del tessuto corporeo. Il passaggio delle onde ultrasoniche attraverso i tessuti "molli" sviluppa un naturale innalzamento della temperatura, che incrementa le reazioni metaboliche e si traduce, nelle cellule adipose, in un aumento della lipolisi.


L'**Azione chimica** favorisce la variazione del pH locale e della permeabilità delle membrane cellulari.

Particolarità di Body Sculpture è la **placca ultrasuoni** che oltre ad avere una parte metallica centrale per l'emissione dell'onda ultrasonica, dispone di ulteriori due elettrodi per effettuare in sinergia trattamenti di Elettrolipolisi o di stimolazione e drenaggio localizzato.


In questa particolare applicazione non si otterrà la stimolazione della fascia muscolare ma una tonificazione locale nell'area della placca Ultrasonica.

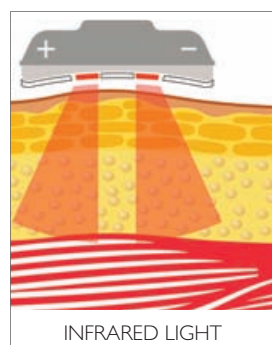


INFRARED LIGHT

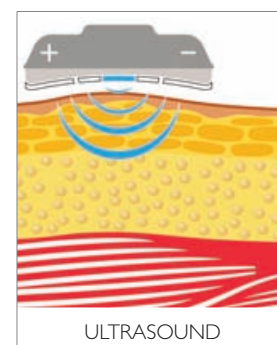

ULTRASOUND

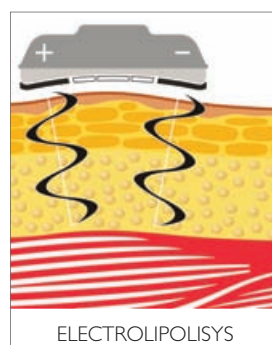

ELECTROLIPOLYSIS

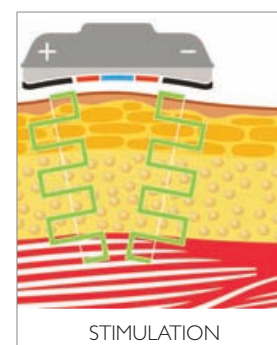

STIMULATION




Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

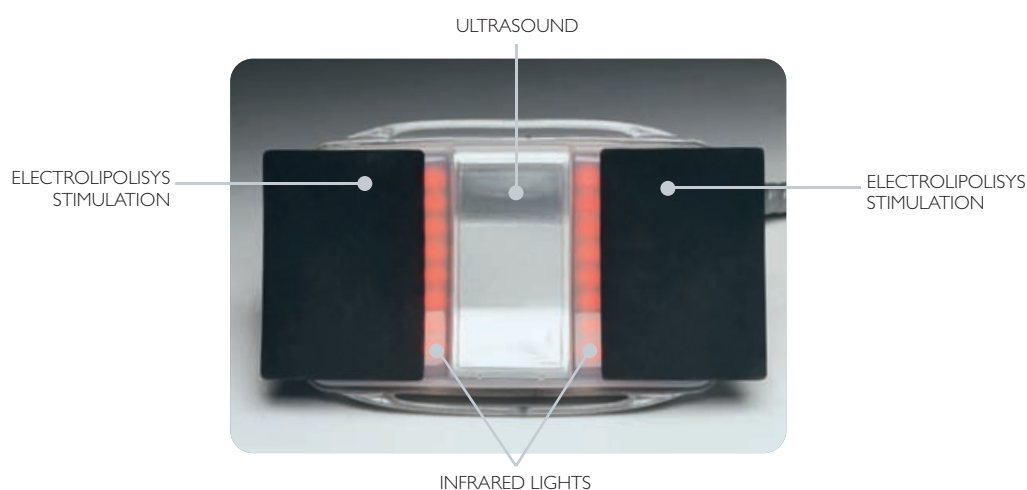

Body Progress Body Sculpture Ultrasonic & Infrared

L'infrarosso

I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa tra 760 e 1 nm (manometro) e vengono chiamati infrarossi per la vicinanza del colore rosso allo spettro (gamma di frequenza) della luce visibile, è uno dei colori percepibili all'occhio umano.

I raggi infrarossi sono in grado di attraversare tutti gli strati dell'epidermide senza riscaldarli e raggiungere così il pannicolo adiposo.

La radiazione fotobiologia dell'infrarosso, una volta raggiunto l'area con l'adipe, ne aumenta la temperatura e la conseguente attività enzimatica che favorisce la lipolisi locale.

I Trattamenti

Altrettanto importante è la possibilità, sfruttando gli **innovativi 6 differenti modelli d'onde elettromagnetiche**, di combinare tra loro le 6 differenti funzioni eccitomotrici e di utilizzare Body Sculpture come un vero e proprio elettrostimolatore anche senza l'impiego delle placche Ultrasoniche, ma attraverso i tradizionali elettrodi conduttivi.

- **Riduzione della cellulite Elettrolipolisi.** Sviluppa un'azione tonico stimolante atta a favorire la riduzione dei depositi cellulitici, i quali, stimolando la circolazione locale, aumentano le richieste metaboliche delle cellule ed il conseguente consumo di grassi.



- **Miglioramento del sistema circolatorio locale** stimola le strutture elastiche del derma, rassodando la cute e favorendo un drenaggio di tutte le sostanze convogliate nel liquido interstiziale, per una facile eliminazione attraverso la diuresi. L'azione sinergica delle correnti ondulatorie eccitomotrici a bassa frequenza, sviluppa una benefica azione tonico-stimolante, finalizzata alla concreta e progressiva riduzione della massa cellulitica esistente.
- **Drenaggio sequenziale al viso o al corpo**, attraverso il trattamento di elettrostimolazione sequenziale, apporta al circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive. Tale azione migliora sia il tono muscolare che l'aspetto estetico della pelle, favorendo l'aumento naturale della diuresi nei soggetti con ritenzione idrica.



- **Snellimento localizzato** dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo. Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nell'eventuale prodotto utilizzato, è evidente già dalle prime sedute.
- **Rassodamento delle fasce muscolari** con notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e dell'aspetto della pelle. La stimolazione di tutto il corpo è effettuata in generale con tre tipologie di trattamento, in funzione delle caratteristiche della persona da trattare. Gambe, glutei, addome e pettorali tonificati, senza escludere i muscoli facciali con una conseguente riduzione della lassità del viso migliorandone la lucentezza della pelle che, unitamente ad una attenuazione dell'effetto di affaticamento, conferiscono un aspetto rivitalizzato.
- **Trattamenti al viso** di elettrostimolazione e linfodrenaggio.

La Tecnologia.

- **Grande schermo digitale** ad elevatissima risoluzione
- **Easy Pad:** sistema di visualizzazione sullo schermo del corretto posizionamento degli elettrodi.
- **43 programmi di lavoro**
- **Programmi personalizzabili su Memory Card**



- Trattamenti professionali con:

- Infrarosso + Ultrasuoni + Elettrolipolisi
- Infrarosso + Ultrasuoni + Elettrostimolazione
- Infrarosso + Ultrasuoni + Drenaggio
- Elettrostimolazione Corpo e Viso
- Linfodrenaggio Corpo e Viso

Body Sculpture dispone di ben 8 Placche Mix Ultrasuoni + Infrarosso, per garantire un trattamento completo in ogni area del corpo, unitamente ad un'ampia gamma di accessori.

Parametri regolabili per l'impostazione individuale:

- Erogazione delle correnti
- Erogazione dell'onda Ultrasonica
- Tempo del trattamento
- Tempo per ogni fase del trattamento
- Valori di frequenza, da 2Hz. a 198Hz.
- Il tempo di pausa impostato: regolabile da -1 a + 10 secondi
- Il tempo di durata emissione impulso impostato: regolabile da 1 a 10 secondi
- Selezione del tipo di onda elettrica da utilizzare



- **Funzione "HELP"** fornisce importanti informazioni utili sull'operatività dell'apparecchio fornendo rapide spiegazioni "on line"
- **Programmi personalizzati con MEMORY CARD.** Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card.
- Il pratico marsupio consente di riporre tutti gli elettrodi nelle apposite tasche laterali, mantenendo sempre in perfetto ordine la stazione di lavoro. Inoltre, all'interno di ogni tasca, sono predisposti i connettori di collegamento per tutti gli elettrodi, rendendo estremamente veloce e pratico il collegamento degli stessi.



Accessori [pag. 95-99]

- n. 10 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG
- n. 8 art. 9933 – Placche Mix Ultrasuoni + Infrarosso
- n. 8 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 8 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm
- n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 120x80 mm
- n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9864 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x8H. cm
- n. 8 art. 9865 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x8H. cm
- n. 2 art. 9866 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x8H. cm
- n. 16 art. 9867 – Elettrodo placca in gomma per placca ultrasonica, dim. 60x85 mm
- n. 4 art. 9868 – confezione contenente 2 bende saline
- n. 4 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. 4 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 4 art. 9774 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
- n. 4 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
- n. 4 art. 9770 – Confezione contenente 30 elettrodi adesivi mono paziente, Ø 35mm
- n. 10 art. 9932 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti personalizzati
- n. 3 art. 9816 – Gel per elettrostimolazione e ultrasuoni
- n. 1 art. 9869 – Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di connessione

Beauty Partner IntraMeso System

È un'apparecchiatura innovativa e rivoluzionaria che, grazie ai particolari impulsi a simmetria variabile, agisce direttamente sulla membrana cellulare apportando benefici effetti per gli inestetismi legati al tono cutaneo e alla cellulite.



Art. 9099

Beauty Partner raggiunge gli strati più profondi del derma, rapidamente e semplicemente, è efficace, con risultati visibili fin dalla prima applicazione.

Beauty Partner, con l'esclusivo IntraMeso System, associato a mirati ed efficaci prodotti cosmetici, favorisce la risoluzione di estetismi quali:

- rughe
- tonificazione viso
- cellulite ed adiposità localizzata
- rassodamento seno e glutei
- smagliature
- idratazione e nutrizione della pelle

Come funziona?

La **veicolazione transdermica** avviene applicando una particolare forma d'onda a simmetria variabile favorendo l'apertura dei canali interstiziali in tempi assolutamente più brevi, se comparata ai tradizionali metodi conosciuti come, ad esempio, la ionoforesi o l'elettrolisi in generale.



L'IntraMeso System utilizza particolari manipoli, con applicatori muniti di camera di ionizzazione del prodotto, in sinergia all'esclusivo sistema di convogliamento del prodotto, consentendo la veicolazione dei principi attivi senza l'ausilio di gel conduttivi.

Gli applicatori, studiati appositamente per trattamenti al viso ed al corpo, sostituiscono perfettamente la funzionalità degli aghi agendo dalla superficie senza intaccare il derma, dando, ai prodotti utilizzati non diluiti dal gel conduttore, un'efficacia più rimarcata e tempi di trattamento ridotti.

È importantissimo effettuare un ottimo trattamento Scrub prima di utilizzare l'IntraMeso System, il successo è legato all'associazione di due metodi fondamentali, pulizia della cute per la rimozione dello strato corneo in eccesso, e, veicolazione del prodotto anche se composto da sostanze ad elevato peso molecolare.

Beauty Partner, è dotato di Scrub ad ultrasuoni, per una pulizia profonda ad azione intrafollicolare e Scrub superficiale per mezzo di opportune spazzole rotanti.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Beauty Partner IntraMeso System

Beauty Partner, oltre alla programmazione individuale, dispone di ben tre differenti programmi di lavoro per effettuare trattamenti: "Soft – Medium & Intensive", che permettono di gestire automaticamente l'erogazione delle correnti ionizzanti senza l'intervento manuale dell'operatore estetico, rendendo l'operatività dell'apparecchio estremamente semplice e sicura.



Trattamenti:

- Programmi predefiniti per trattamento viso e décolleté
- Programmi per trattamento corpo
- 3 programmi automatici di lavoro "Soft", "Medium", "Intensive"
- 1 programma "Libero" per trattamenti personalizzati

Scrub

- Ultrasuono 25KHz
Pelle sensibile – Pelle grassa – Pelle secca.
- Brush
Set completo di spazzole

Dati riempimento cartuccia erogatore

Dose prodotti: siringa da 10 cc inserita nel manipolo

Dosatore prodotti: direttamente con la siringa sul manipolo

Connessione manipolo: cavo extra flessibile



Caratteristiche tecniche

Potenza massima: 140 W

Frequenza emessa: 5 – 100 Hz

Area trattata applicatore viso: 2.5 cmq.

Area trattata applicatore corpo: 9 cmq

Sistema di carico prodotto: Manuale

Collegamento piastra di massa: Cavo extraflessibile con pinza e connettore rapidi.

Accessori [pag. 95-99]

n. l art. 9959 – Manipolo IntraMeso

n. l art. 9961 – Applicatore viso

n. l art. 9960 – Applicatore corpo

n. l art. 9832 – Manipolo Ultrasuoni

n. l art. 9840 – Manipolo porta spazzole

n. l art. 9720 – Spazzola dura in setola ø 40 mm

n. l art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm

n. l art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm

n. l art. 9723 – Spazzola dura in setola ø 20 mm

n. l art. 9725 – Spazzola dura in setola ø 100 mm

n. l art. 9726 – Spazzola dura in setola ø 70 mm

n. 20 art. 9978 – Siringa 10ml.

n. l art. 9962 – Comando a pedale

n. l art. 9965 – Placca di riferimento monopaziente, dim. 132cmq
conf. da 5 pz.

n. l art. 9966 – Placca di riferimento monopaziente, dim. 75cmq
conf. da 5 pz.

n. l art. 9967 – Cavo di connessione per placca di riferimento

n. l art. 9986 – Soluzione antiossidante - effetto tensore - 100 ml

n. l art. 9987 - Soluzione per adiposità localizzata - effetto lipolitico - 100 ml

Body Progress Perfect Beauty Thermo Concept



Body Progress Perfect Beauty Thermo Concept



L'apparecchiatura professionale per trattamenti riducenti **Perfect Beauty**, offre all'operatore estetico l'opportunità di realizzare con estrema semplicità di utilizzo ed in totale sicurezza, specifici trattamenti personalizzati per il dimagrimento localizzato, mediante l'impiego di 6 fasce termiche **Infrared System Termicband** e dell'innovativa **Fisiosauna a Raggi Infrarossi a 5 settori indipendenti**.

Si avvale dei principi biofisici del calore e dei relativi criteri d'utilizzazione termica applicata al corpo umano: un aumento della temperatura induce ad un incremento delle reazioni metaboliche agendo sugli adipociti stimolandone il naturale scambio cellulare, favorendo il riequilibrio del proprio metabolismo che, per mezzo dei raggi infrarossi, raggiunge anche negli strati più profondi dell'adipe.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Perfect Beauty sfrutta i principi biofisici del calore ed i relativi criteri dell'utilizzazione dell'energia termica sul corpo umano; l'incremento della temperatura corporea di soli 3°C, ad esempio da 37° a 40° C., **apporta un notevole aumento dell'attività metabolica** garantendo, il totale comfort, del cliente trattato.

Trattamento con Fisiosauna.

La dinamica ed uniforme distribuzione del calore differenziato è la vera chiave della nuovissima **Fisiosauna** a raggi infrarossi che, grazie all'azione termica controllata, prodotta da **5 speciali elementi termoriscaldanti ad infrarosso**, permette di effettuare trattamenti con diversi stadi di temperatura in abbinamento ad opportuni prodotti cosmetici e termali, agendo anche in specifiche aree del corpo.

Metodiche di trattamento effettuabili con Fisiosauna e fasce termoriscaldanti INFRARED TERMICBAND,

- Snellimento generale e locale, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nel prodotto utilizzato, come ad esempio la paraffina, fanghi, alghe, è evidente già dalle prime sedute.
- Facilita l'assorbimento e quindi la positiva azione benefica di preparati cosmetici snellenti, rassodanti, aromatici o biologici.
- Nel trattamento contro la cellulite il meccanismo d'azione può sintetizzarsi nella stimolazione del ricambio, nella vasodilatazione periferica e nella notevole diminuzione d'acqua.

5 programmi specifici per trattamenti con fisiosauna per l'applicazione idonei prodotti cosmetici:

- 1 olii essenziali
- 2 cere di paraffina
- 3 creme anti-cellulite
- 4 fanghi e/o alghe
- 5 delicato per soggetti con iper-sensibilità al calore nell'area degli arti inferiori


16 programmi per trattamenti con Termicband per l'applicazione idonei prodotti cosmetici:

- 1 cellulite compatta
- 2 cellulite edematosa
- 3 cellulite molle
- 4 snellimento gambe
- 5 snellimento braccia
- 6 donna corpo generale
- 7 soft gambe
- 8 snellimento glutei e cosce
- 9 soft vasodilatante
- 10 adipe donna
- 11 donna ginoide
- 12 donna androide
- 13 donna small
- 14 uomo adipe addominale
- 15 uomo androide
- 16 uomo corpo generale

Tecnologia d'avanguardia

- Creazione di programmi confidenziali mediante l'utilizzo della Memory Key
- Funzione Help fornisce rapide spiegazioni "on line" durante l'utilizzo dell'apparecchio

- 5 differenti aree riscaldanti per la fisiosauna
- Elementi riscaldanti estraibili separatamente
- Singola regolazione di temperatura degli elementi riscaldanti
- Possibilità di esclusione di una o più aree riscaldanti
- 6 canali indipendenti
- 16 programmi di lavoro studiati per differenti tipologie d'inetestismo e prodotti cosmetici.

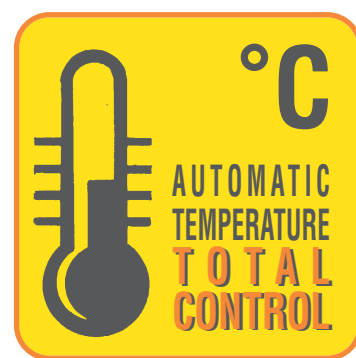

Accessori [pag. 95-99]

- n. 5 art. 21212 – Telo per fanghi atossico dim. 220 x 180 cm.
- n. 1 art. 9940 - Fisio coperta completa di 5 elementi termoriscaldanti dimensioni: 190 x 160 cm.
- n. 5 art. 9783 – panta – presso
- n. 2 art. 9812 – fascia termoriscaldante per addome
- n. 1 art. 9813 – fascia termoriscaldante per coscia sinistra
- n. 1 art. 9814 – fascia termoriscaldante per coscia destra
- n. 10 art. 9931 – Memory Card
- n. 2 art. 9818 - Fascia termoriscaldante per braccia
- n. 4 art. 9868 – confezione contenente 2 bende saline

Check In

Sistema professionale per **l'analisi della pelle, della cellulite e dei capelli.**



Art. 9111

Un innovativo e completo sistema per l'analisi per la valutazione dei principali parametri della pelle, della cellulite e dei capelli.

- Semplice da usare.
- Test personalizzato grazie a check-up specifici per le varie aree del corpo e del viso.
- Suggerimenti e consigli professionali immediatamente disponibili a video, stampabili su apposito scontrino cartaceo e/o visibili sul vostro computer trasferibili per mezzo di una comunissima chiave USB.
- Archiviazione dei dati del cliente con possibilità di monitoraggio delle date nel tempo.

Perché utilizzare Check In?

- Garantire al cliente un test di analisi completo che possa confermare la "diagnosi" dell'operatore estetico.
- Incrementare la fedeltà del cliente.
- Supportare ed aumentare le vendite delle linee di prodotti cosmetici e trattamenti.
- Offrire una nuova opportunità di differenziazione nel servizio e nella professionalità.

Elaborazione dati ed immagini

Ancora più facile ed intuitivo "navigare" all'interno della programmazione **Check In**; il pratico display Touch screen vi permette di impostare facilmente il test singolo o il programma di analisi da eseguire con una semplicissima guida on line, passo dopo passo, che vi conduce sino al termine del test. Estremamente semplice la consultazione dei commenti, dei risultati e degli archivi.

Test individuali eseguibili con Check In

- Idratazione
- Elasticità
- Sebo
- pH
- Melanina
- Fototipo
- Temperatura – Stadio della cellulite
- Età biologica

Programmi dettagliati

- Viso (generale)
- Pelle sensibile
- Anti-Age (2 livelli)
- Whitening
- Tolleranza a Sole UV
- Mani
- Cuoio Capelluto
- Cellulite, condizioni circolatorie e ritenzione idrica.
- Valutazione della variazione di temperatura e mappatura termica digitale dell'area interessata. Denominazione del grado di cellulite tramite analisi termica e valutazione visiva e tattile della pelle.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Check In

Lo Scontrino

- Dati del test
- Interpretazione grafica dei dati
- Commenti e consigli sul risultato del test.

Stampa in formato A4



- Tutti i dati del test
- Interpretazione grafica dei dati dei singoli parametri
- Risultati dettagliati e grafici in relazione ai programmi combinati
- Immagini e consigli dettagliati
- Stampa delle schermate del database cliente.

Optional

Analisi della pelle effettuata con Microcamera


Check In è predisposta per il collegamento all'unità di Microcamera per ampliare la gamma di test e integrare le misurazioni effettuate con le sonde per mezzo dell'analisi e dell'elaborazione delle immagini.

Inoltre, speciali filtri polarizzati, permettono alla microcamera di ottimizzare la visualizzazione di elementi presenti al di sotto della superficie cutanea, quali capillari e accumuli di melanina.


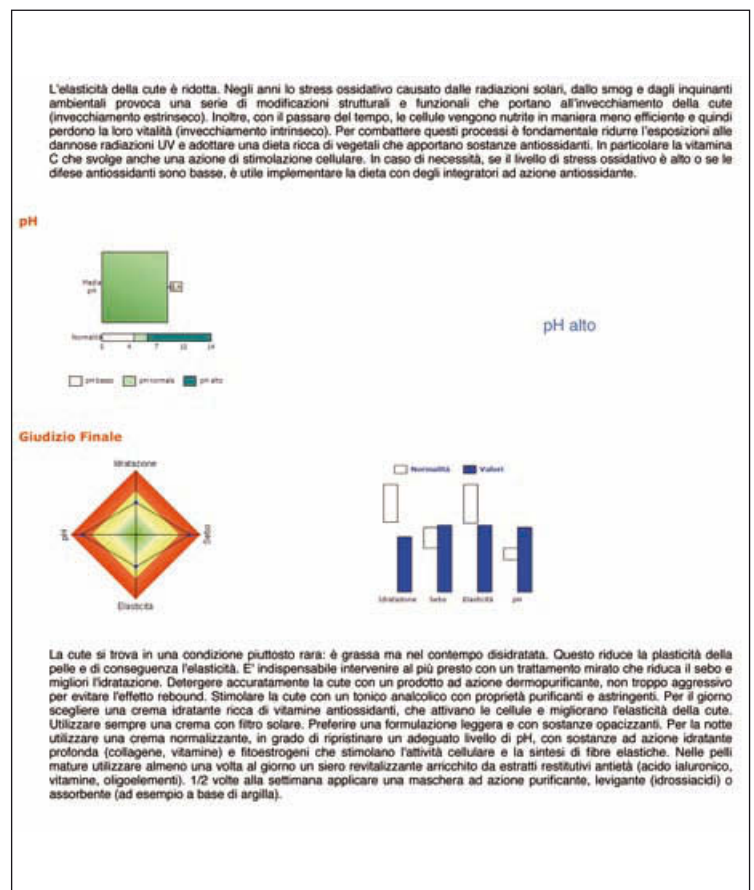
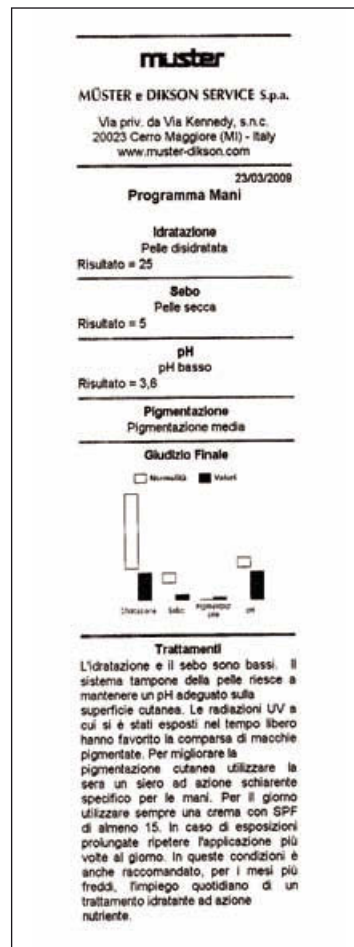


L'ampio range di ingrandimenti disponibili (10 - 400x) permette di visualizzare in maniera ottimale:



- Dettagli delle minime imperfezioni cutanee
- Panoramica generale delle pelle

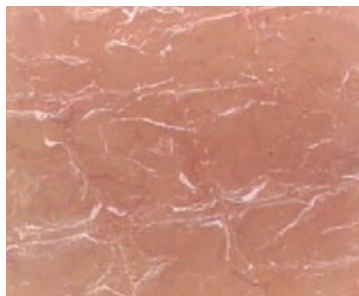

- Condizioni dei capelli, del cuoio capelluto

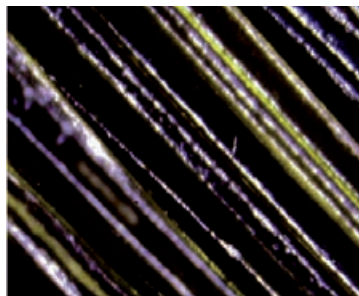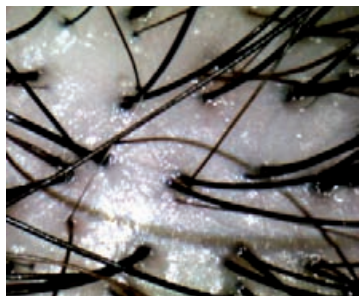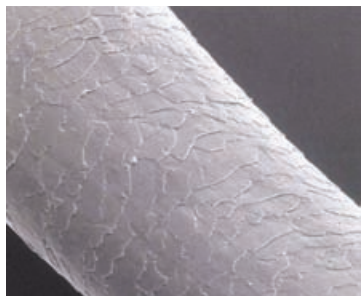

- Particolari condizioni quali la pelle sensibile, l'acne e la cellulite

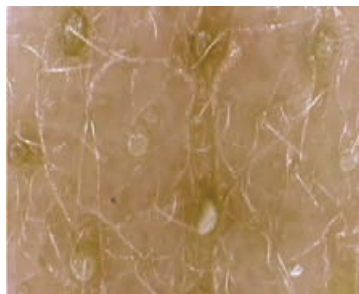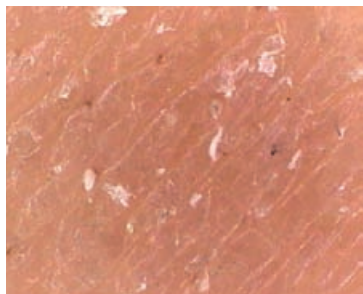

Optional [pag. 95-99]

art. 9995 - Kit microcamera con lenti e filtri

Accessori [pag. 95-99]

- n.l art. 9988 - Sonda idratazione
- n.l art. 9989 - Sonda melanina
- n.l art. 9990 - Sonda elasticità
- n.l art. 9991 - Sonda sebo
- n.l art. 9993 - Sonda pH
- n.l art. 9992 - Sonda temperatura
- n.l art. 99116 - Banda per mappa termica
- n.l art. 9994 - Ricarica sebo
- n.l art. 99117 - Kit taratura e pulizia sonda pH

Body Program Reducer Beautiful Shape

Avvalendosi del metodo di “Elettroscultura”, basato sul principio dell’elettroforesi, Muster Reducer sviluppa un’azione benefica finalizzata alla riduzione di circonferenza e particolarmente indicata per soggetti con evidenti inestetismi, identificabili in vaste aree del corpo.



Art. 9012

L'azione sinergica di opportuni prodotti cosmetici con correnti galvaniche, ondulatorie, eccitomotrici a bassa frequenza ed intensità, sviluppa un benefico effetto tonico-stimolante, finalizzato alla progressiva riduzione della massa cellulitica esistente.

Snellimento localizzato dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici.

L'elettroforesi favorisce l'azione positiva ed efficace di opportuni preparati cosmetici snellenti e rassodanti.

L'applicazione è particolarmente indicata come elemento coadiuvante nel contesto di trattamenti, volti alla prevenzione di un processo di formazione della cellulite e dell'adipe.

Miglioramento dell'elasticità dei tessuti, conseguente al naturale riequilibrio dell'attività del tessuto e degli scambi cellulari.

Effetto decongestionante, con maggiore evidenza per gli arti inferiori.




Accessori [pag. 95-99]

- n. 1 art. 9788 – Cavo a 16 poli
- n. 4 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9784/R – Adattatore rosso per elettrodo placca
- n. 2 art. 9784/N – Adattatore nero per elettrodo placca
- n. 2 art. 9776 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 150x10H cm
- n. 2 art. 9766 – Elettrodo striscia in gomma conduttiva, dimensioni: lunghezza 8 mt altezza 2,5 cm
- n. 5 art. 9785 – Benda in cotone crespato ed elasticizzato, dimensioni: lunghezza 5 mt altezza 20 cm

Body Program Tone Up

Apparecchio professionale di elettrostimolazione a 4 canali indipendenti per trattamenti estetici di tonificazione e mantenimento della forma fisica.

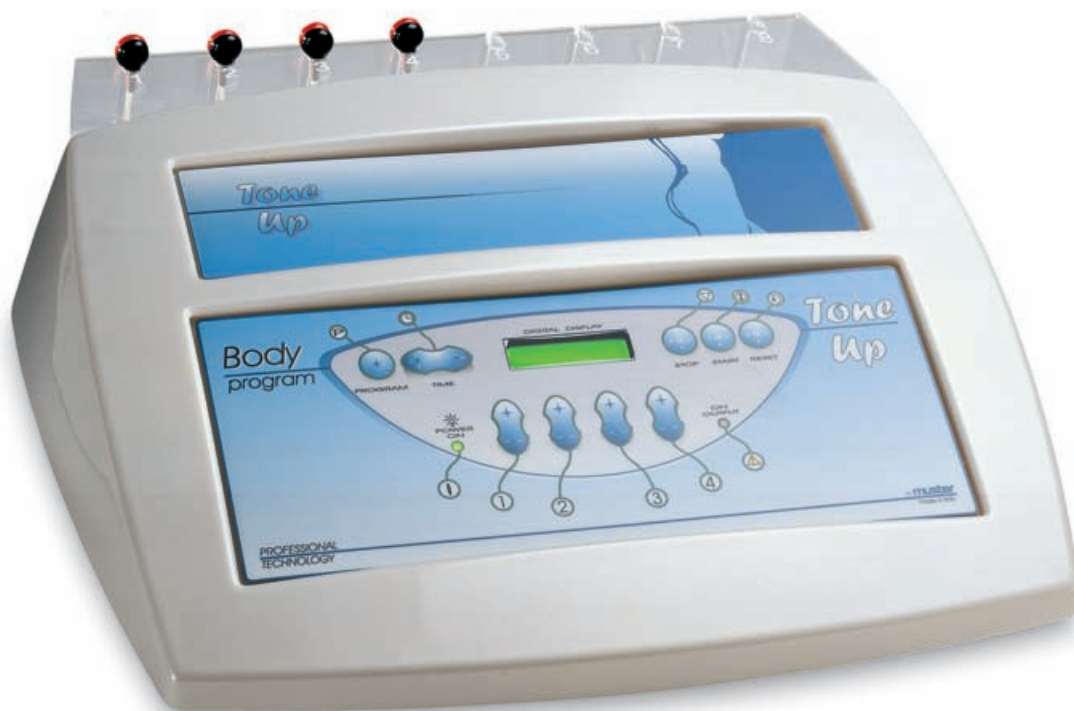

Art. 9064A - versione con porta accessori

Art. 9064 - versione senza porta accessori

L'apporto ottenuto con un'applicazione di Body Program Tone UP è pari circa tre ore di ginnastica attiva: la reazione muscolare non è solo di tonificazione poiché la particolare "onda rotatoria lunga" agisce sugli eccessi adiposi e pannicoli cellulitici, determinando inoltre un effetto dimagrante. L'azione sinergica delle correnti ondulatorie eccitomotrici a bassa frequenza, sviluppa un benefico effetto tonico-stimolante, finalizzato alla concreta e progressiva riduzione della massa cellulitica esistente. Lo snellimento localizzato, dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo, è il risultato delle correnti impiegate, coadiuvate dall'azione delle sostanze attive presenti nell'eventuale prodotto cosmetico utilizzato. La varietà di programmi disponibili permette di selezionare con estrema semplicità il trattamento più opportuno:

- 1) tonificazione cosce
- 2) cellulite cosce
- 3) tonificazione glutei
- 4) glutei e addominali
- 5) tonificazione addominali
- 6) cellulite glutei
- 7) tonificazione arti superiori
- 8) tonificazione arti superiori e muscoli dorsali
- 9) rassodamento seno
- 10) rassodamento dorsale
- 11) tonificazione viso
- 12) sport allenamento cosce
- 13) sport aumento massa cosce
- 14) sport allenamento gamba
- 15) sport aumento massa.



Accessori [pag. 95-99]

- n. 4 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto **PLUG**
- n. 2 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 8 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 2 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm

Optional [pag. 95-99]

- Art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto **PLUG** a quattro derivazioni per sdoppiare i canali aumentando la capacità dell'apparecchio sino a 8 uscite per 16 elettrodi

Body Program Press Tonic

Apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio sequenziale, esercita sul circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive, migliorando sia il tono muscolare che l'aspetto estetico della cute. L'aumento naturale della diuresi nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.

Principali caratteristiche

- 8 settori per l'alimentazione d'aria a processo sequenziale o totale.
- Gambali a 7 + 2 settori indipendenti.
- Gestione elettronica di tutte le funzioni.
- 6 differenti programmi di pressomassaggio.
- Creazione di programmi confidenziali mediante l'utilizzo della Memory Key.

Parametri regolabili dall'operatore estetico per l'impostazione individuale:

- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo o esclusione;
- memory card per memorizzare i parametri di ogni programma.

Funzione test

Attivando il pulsante verrà visualizzata tutta la sequenza del trattamento selezionato.

Sicurezza d'impiego

Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell'ultima generazione mantiene i valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di massaggio. Garantisce inoltre l'interruzione automatica del trattamento qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il superamento della soglia massima consentita, pari a 0,2ATM/132mmHG.





Art. 9034/E



Accessori [pag. 95-99]

- n. 1 art. 9826 – Gambale modello LUX.
- n. 5 art. 9783 – Panta-presso in T.N.T.
- n. 10 art. 9945 – Memory Card.

Optional [pag. 95-99]

- Art. 9827 – Gambale modello LUX con marsupio.
- Art. 9828 – Set bracciali con corpetto di sostegno.

Body Program In Shape Digital Press

Apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio sequenziale, esercita sul circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive, migliorando sia il tono muscolare che l'aspetto estetico della cute. L'aumento naturale della diuresi nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.

Principali caratteristiche

- 8 settori per l'alimentazione d'aria a processo sequenziale o totale.
- Gambali a 7 + 2 settori indipendenti.
- Gestione elettronica di tutte le funzioni - Display Touch Screen
- 16 differenti programmi di pressomassaggio.
- Creazione di programmi confidenziali mediante l'utilizzo della Memory Key.

Parametri regolabili dall'operatore estetico per l'impostazione individuale:

- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- permanenza in pressione di ogni segmento gonfiabile regolabile;
- regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo regolabile;
- facoltà di eludere dal programma uno o più settori gonfiabili, funzione estremamente utile nel caso vi siano aree da non trattare.

Funzione test

Attivando il pulsante verrà visualizzata tutta la sequenza del trattamento selezionato.

Controllo Settori Gonfiabili

Abilitando la funzione, l'apparecchio verifica il corretto funzionamento dei gambali e segnala eventuali anomalie dei settori gonfiabili.

Sicurezza d'impiego

Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell'ultima generazione mantiene i valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di massaggio. Garantisce inoltre l'interruzione automatica del trattamento qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il superamento della soglia massima consentita, pari a 0,2ATM/132mmHG.





Art. 9125



Accessori [pag. 95-99]

- n. 1 art. 9826 – Gambale modello LUX.
- n. 5 art. 9783 – Panta-presso in T.N.T.
- n. 10 art. 99200 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti personalizzati.

Optional [pag. 95-99]

- Art. 9827 – Gambale modello LUX con marsupio.
- Art. 9828 – Set bracciali con corpetto di sostegno.

Body Program Power Tone



L'apparecchio elabora opportune correnti sinusoidali a media ed alta frequenza, dette di "Kotz", che favoriscono marcatamente l'aumento della perimetria del fascio muscolare, riducendo altresì la lassità dello stesso; si riscontrano anche positivi effetti circa la maggiore forza muscolare.

Rispetto ai tradizionali metodi di elettrostimolazione, che utilizzano altre correnti, quelle di "Kotz" determinano un effetto di contenimento delle eventuali sensazioni di dolore. L'impiego delle correnti ad alta e media frequenza, applicate alla fascia muscolare, non determina in sé la contrazione; è la variazione della differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno della fibra che ne provoca una specifica risposta, ripristinando il tono-trofismo del muscolo.

I trattamenti eseguiti con PowerTone agiscono sulla forza muscolare (cioè sull'area di sezione trasversale del muscolo) e fanno di un ciclo di trattamento un vero e proprio programma di "allenamento"; tutta la produzione di energia in eccesso viene convertita in calore, aumentando così l'attività muscolare, ed agendo positivamente sulla forza muscolare.



Lo Snellimento localizzato è dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo. Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nell'eventuale prodotto utilizzato, è evidente già dalle prime sedute.



Art. 9057A - versione con porta accessori
Art. 9057/E - versione senza porta accessori

Principali caratteristiche:

- Schermo grafico interattivo di ampie dimensioni con funzione "Touch Screen"
- Otto canali indipendenti
- Gestione elettronica di tutte le funzioni
- 21 programmi, elaborati in collaborazione con professionisti del settore, per effettuare trattamenti al corpo mirati che considerano l'aspetto morfologico del soggetto da trattare:
 - elettrostimolazione corpo
 - potenziamento muscolare
 - tonificazione
- Visualizzazione del trattamento impostato
- Visualizza sullo schermo la posizione corretta degli elettrodi per ogni combinazione di trattamento selezionata, fornendo un pratico ed immediato supporto all'operatore estetico
- Parametri regolabili per l'impostazione individuale delle correnti
- Memory Key: programmi personalizzati per ogni cliente con l'inserimento dei dati anagrafici, del tipo di trattamento e del numero delle sedute previsto
- Funzione "HELP": fornisce importanti informazioni utili sull'operatività dell'apparecchio con rapide spiegazioni "on line".



Accessori [pag. 95-99]

- n. 8 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto **PLUG**
- n. 4 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 4 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm
- n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 120x80 mm
- n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. 2 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 2 art. 9774 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
- n. 2 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
- n. 2 art. 9776 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 150x10H. cm
- n. 2 art. 9770 – Confezione contenente 30 elettrodi adesivi mono paziente, Ø 27 mm
- n. 1 art. 9779 – Memory Key, memoria supplementare per trattamenti personalizzati

Optional [pag. 95-99]

- Art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto **PLUG** a quattro derivazioni per sdoppiare i canali aumentando la capacità dell'apparecchio sino a 16 uscite per 32 elettrodi

Fisiosaune

Le Fisiosaune per trattamenti riducenti localizzati Muster, offrono all'operatore estetico l'opportunità di realizzare trattamenti specifici anti-cellulite e dimagrimento, con estrema semplicità d'impiego e grande efficacia.




Art. 9118 Fisiosauna Comfort con rivestimento esterno in PVC atossico.




Art. 9119 Fisiosauna Extra Comfort

- Rivestimento esterno morbido trapuntato in PVC atossico
- Intercapedine ad elevato isolamento termico
- Forma conica per ottimizzare l'irradiazione sul corpo

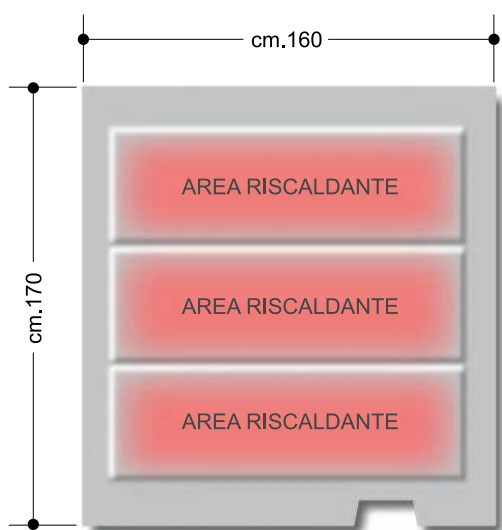

Fisiosauna Comfort

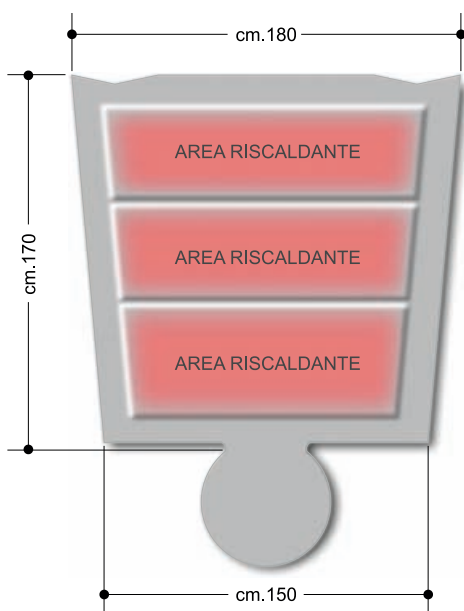

Fisiosauna Extra Comfort



230V - 50 Hz - 300 W

La dinamica ed uniforme distribuzione del calore differenziato permette, grazie all'azione termica controllata elettronicamente e prodotta da speciali elementi termo riscaldanti di effettuare trattamenti con differenti gradienti di temperatura anche in abbinamento ad opportuni prodotti cosmetici e termali.

Trattamenti:

- Snellimento generale e locale, dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo quale risultato della sudorazione. Esso viene coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nel prodotto utilizzato (paraffina, fanghi, alghe) ed è evidente già dalle prime sedute.
- Facilita l'assorbimento e la benefica azione di preparati cosmetici snellenti, rassodanti, aromatici o biologici; infatti le vie di penetrazione transfollicolare, vale a dire gli orifizi e i canali dei follicoli pilo-sebacei, vengono progressivamente liberati da rifiuti e impurità mediante la sudorazione.
- Svolge un'azione depurativa di tali vie predisponendole in modo favorevole ai preparati cosmetici "di profondità", utili per raggiungere gli strati più lontani dell'epidermide.

Nel trattamento contro la cellulite il meccanismo d'azione può sintetizzarsi nella stimolazione del ricambio, nella vasodilatazione periferica e nella notevole diminuzione d'acqua.

- Stimolazione della reattività antinfiammatoria del trofismo muscolare ed epidermico.

Dispositivo elettronico di comando per ogni singolo settore riscaldante

Sensori per il rilevamento e monitoraggio della temperatura

Impostazione della temperatura da 20°C. a 65°C.

Impostazione del tempo di trattamento con programma automatico di spegnimento da 10 a 60 minuti

Impostazione del tempo di trattamento con programma manuale e spegnimento automatico dopo 4 ore.

Termocoperte

Concepiti per l'intenso utilizzo frequente degli Istituti di Bellezza, sono realizzate con la massima cura e, grazie all'impiego di specifici materiali, garantiscono all'Estetista l'esecuzione di trattamenti professionali in totale sicurezza e con la massima praticità d'uso.



Principali caratteristiche:

- commutatore a 3 posizioni per l'impostazione delle temperature di lavoro
- rivestimento esterno di grande robustezza, realizzato in materiale lavabile
- aste flessibili interne per salvaguardare la termocoperta da eventuali dannose piegature durante l'utilizzo
- resistenza elettrica protetta da filo di guardia che ne interrompe il funzionamento nel caso si verifichino sovratemperature.



cm 150x50

Art. 9055/E



cm 180x95

Art. 9056/E

BODY PROGRAM ACCESSORIES



Art. 9741 Confezione contenente 4 elettrodi: placca con attacco automatico, dim. 35x45 mm.




Art. 9748 Confezione contenente 4 elettrodi: placca con attacco automatico, dim. 45x80 mm.



Art. 9766 Elettrodo striscia in gomma conduttrice per elettroscultura h 5 cm - L 8 mt.




Art. 9768 Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco automatico, dim. 120x80 mm.

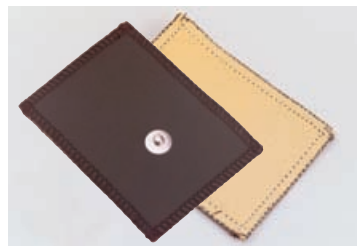

Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco automatico, dim. 60x80 mm.



Art. 9770 Confezione contenente elettrodi: placca monouso circolari, diam. 27 mm (30 pz.).

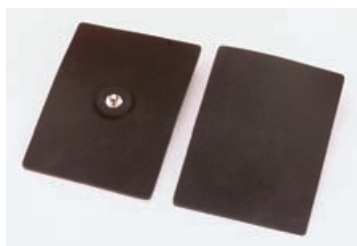

Art. 9867 Elettrodo placca in gomma conduttiva per placca ultrasonica.



Art. 9894 Elettrodi rivestiti in spugna con doppia connessione per emettitore infrarosso, 56 x 90 mm (1 pezzo).




Art. 9895 Confezione 4 elettrodi monouso con doppia connessione per emettitore ad infrarosso, 53x96 mm.



Art. 9965 Piastra Intraderm 132 cmq conf. da 5 pz.



Art. 9966 Piastra Intraderm 75 cmq conf. da 5 pz.

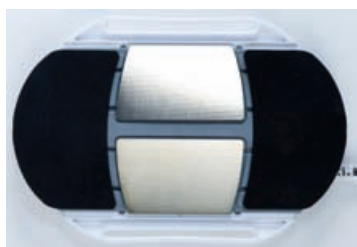

Art. 99144 Placche R.F. senza elettrodi.



Art. 99145 Elettrodo dorato dim. 60x40 mm conf. da 1 pz. arrotondate R.F.



Art. 99146 Placche elettrodo silicone dim. 95x61 mm arrotondate R.F.



Art. 9784N Adattatore per placca con innesto spinotto \varnothing 4 mm (nero).



Art. 9784R Adattatore per placca con innesto spinotto \varnothing 4 mm (rosso).



Art. 31909023 Spinotto coccodrillo per elettroscultura - rosso.



Art. 32909023 Spinotto coccodrillo per elettroscultura - nero.



Art. 99154 Adattatore attacco automatico / coccodrillo - rosso.



Art. 99155 Adattatore attacco automatico / coccodrillo - nero.



Art. 9816 Confezione di gel conduttivo da 260 gr.



Art. 9986 Soluzione antiossidante effetto tensore - 100 ml.



Art. 9987 Soluzione per adiposità localizzata - effetto lipolitico - 100 ml.



Art. 9772 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 40x10H cm.



Art. 9773 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 60x10H cm.



Art. 9774 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 80x10H cm.



Art. 9775 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 100x10H cm.



Art. 9776 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 150x10H cm.



Art. 9805 Fascia termoriscaldante per addome adattabile all'apparecchio Total Thermal.



Art. 9806 Fascia termoriscaldante per coscia destra adattabile all'apparecchio Total Thermal.



Art. 9807 Fascia termoriscaldante per coscia sinistra adattabile all'apparecchio Total Thermal.



Art. 9812 Fascia termoriscaldante per addome adattabile all'apparecchio Thermal 5.



Art. 9813 Fascia termoriscaldante per coscia sinistra adattabile all'apparecchio Thermal 5.



Art. 9814 Fascia termoriscaldante per coscia destra adattabile all'art. 9050/E.



Art. 9818 Fascia termoriscaldante per braccia adattabile all'apparecchio Thermal 5.



Art. 9864 Fascia elastica per fissaggio placca ultrasonica, dim. 60x8H cm.



Art. 9865 Fascia elastica per fissaggio placca ultrasonica, dim. 80x8H cm.



Art. 9866 Fascia elastica per fissaggio placca ultrasonica, dim. 100x8H cm.



Art. 9832 Manipolo per apparecchio Ultrasuoni.



Art. 9840 Manipolo porta-spazzole con spinotto Plug.



Art. 9861 Placca ultrasonica completa di elettrodi in gomma conduttiva.



Art. 9893 Placca con emettitore infrarossi.



Art. 9896 Manipolo Porta Applicatori per trattamenti corpo, completo di Funzione Cromoterapia.



Art. 9898 Applicatore Rullo Grande.



Art. 9897 Manipolo per trattamenti viso, completo di Funzione Cromoterapia.



Art. 9899 Applicatore Rullo Piccolo.



Art. 9906 Applicatore Sfere.



Art. 9907 Piastrina Igienica per Manipolo Viso.



Art. 9933 Placche Mix Ultrasuoni + Infrarosso.



Art. 9959 Manipolo IntraMeso. Solo manipolo, applicatore escluso.



Art. 9960 Applicatore corpo.




Art. 9961 Applicatore viso.



Art. 99142 Manipolo bipolare R.F. corpo.
Art. 99161 Manipolo corpo R.F. per Body Kiss attacco 2 Plug



Art. 99148 Manipolo ultrasuono cavitazione con 4 emettitori.

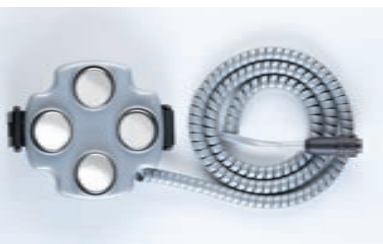

Art. 99184 Manipolo Ultrasuono 800kHz a 4 Emettitori



Art. 99185 Manipolo Ultrasuono 800kHz Mono-Emettitore



Art. 99143 Manipolo bipolare R.F. viso.



Art. 99149 Cinturino impugnatura manipolo ultrasuono 4 testine per art. 99148 e art. 99184.




Art. 9830 Cavetto bipolare con spinotto jack per la connessione all'apparecchio e 2 contatti di tipo automatico.



Art. 9831 Cavetto bipolare a 4 derivazioni con spinotto jack per la connessione all'apparecchio e 4 contatti di tipo automatico.



Art. 9845 Cavo bipolare con spinotto Plug per la connessione dell'apparecchio a 2 contatti automatici.

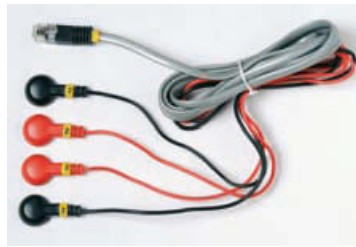

Art. 9848 Cavo per elettrostimolazione con spinotto Plug a 4 derivazioni per apparecchio: 9020/E - 9030/E - 9057/E - 9058/E - 9074 - 9077.



Art. 9788 Cavo 16 poli per elettroscultura.
- Art 9023/E



Art. 9962 Comando a pedale.



Art. 9967 Cavo di connessione massa.



Art. 9826 Gambali per pressoterapia mod. Lux, completi di tubetti e raccordi per il collegamento all'appar. Camere d'aria sovrapposte e chiusura a velcro.



Art. 9827 Gambali per pressoterapia mod. Lux, completi di marsupio per il contenimento di tutto il gambale e del relativo kit di tubetti di connessione.



Art. 9828 Bracciali per pressoterapia completi di corpetto per il corretto posizionamento degli elementi gonfiabili.



Art. 9836 Gambali e kit braccia con marsupio per pressoterapia Modeling.



Art. 9869 Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di connessione.



Art. 9980 Marsupio porta-elettrodi completo di Kit cavi di connessione, per elettroscultura.



Art. 9802 Fisiocoperta per Total Thermal completa di elementi riscaldanti rivestimento esterno e connettori per il collegamento all'apparecchio.



Art. 9940 Fisiocoperta completa di 5 elementi termoriscaldanti dim. 190x160 cm.



Art. 21226 Pantaloni - Presso in T.N.T. (conf. 10 pezzi)



Art. 9785 Benda in cotone crespata ed elasticizzata 20 cm x 5 mt per elettroscultura (1 pezzo).



Art. 9868 Confezione contenente 2 bende a soluzione salina.



Art. 9911 Busta Porta-Tutina.



Art. 9908 Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia M/L.



Art. 9909 Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia XL.



Art. 9910 Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia XXL.



Art. 21212 Telo atossico per fanghi.



Art. 9978 Siringa 10 ml 1 pezzo.



Art. 99153 Penna touch screen.



Art. 9988 Sonda idratazione.



Art. 9989 Sonda melanina.



Art. 9990 Sonda elasticità.




Art. 9991 Sonda sebo.



Art. 9992 Sonda temperatura.



Art. 9993 Sonda pH.

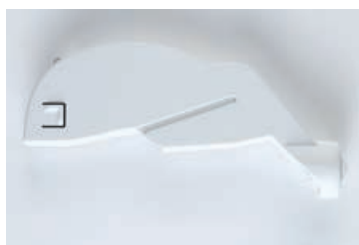

Art. 9994 Ricarica sebo.



Art. 99116 Banda per mappa termica.



Art. 99117 Kit taratura e pulizia sonda pH.



Art. 9995 Kit Microcamera con lenti e filtri.



Art. 9720 Spazzola dura in setola
ø 40 mm.



Art. 9721 Spazzola morbida in pelo
di capra ø 40 mm.



Art. 9722 Spazzola morbida in pelo
di capra ø 20 mm.



Art. 9723 Spazzola dura in setola
ø 20 mm.



Art. 9725 Spazzola in setola
ø 100 mm.



Art. 9726 Spazzola in setola
ø 70 mm.



Art. 9779 Memory key per art.
9030/E, 9033/E, 9050/E, 9057/E,
9058/E.



Art. 9862 Memory Card per
Benexere.



Art. 9891 Memory Card Soft & Solve.



Art. 9931 Memory Card per Perfect
Beauty.



Art. 9932 Memory Card per Body
Sculpture.



Art. 99200 Memory card



Art. 9976 Memory Card per Beauty
& Beauty Reducer.

Beauty Progress Classique

Cere depilatorie di qualità per uso professionale. Formula classica.



CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE CON BISSIDO DI TITANIO

Morbidezza e setosità durante l'applicazione. Azione tonificante sulla pelle. Dermatologicamente testata. Eccezionale stendibilità - facile da applicare - strappo delicato grazie alle sostanze naturali con cui è formulata. Adatta anche per pelli delicate.

Art. 15010100 Cartuccia corpo - 100 ml

Art. 15010400 Vaso multidose - 400 ml



CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE CON ESTRATTI NATURALI DI ALOHE

Lenitiva ed ammorbidente. Cera professionale di facile applicazione e di gran resa.

Formula "Dermatologicamente testata".

Art. 15040100 Cartuccia corpo - 100 ml

Art. 15040400 Vaso multidose - 400 ml



CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE AL MIELE E CERA D'API NATURALI

Assicura una presa perfetta sul pelo per un risultato sicuro. Dermatologicamente testata. Eccezionale stendibilità - facile da applicare - strappo delicato grazie alle sostanze naturali con cui è formulata. Adatta anche per pelli delicate.

Art. 15020400 Vaso multidose - 400 ml

Art. 15020800 Vaso multidose Maxi - 800 ml

CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE AL MIELE NATURALE

Azione addolcente - grande morbidezza.

Dermatologicamente testata.

Art. 15050110 Cartuccia viso - 100 ml

Art. 15020100 Cartuccia corpo - 100 ml



CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE CON ESTRATTI NATURALI DI MALVA E CAMOMILLA

Ad effetto rinfrescante ed ammorbidente che migliora la delicatezza nello strappo. Dermatologicamente testata. È di facile applicazione e consente uno strappo rapido e preciso senza irritare la pelle.

Art. 15030100 Cartuccia corpo - 100 ml

Art. 15030400 Vaso multidose - 400 ml

Beauty Progress Exclusive

Cere depilatorie per uso professionale. Formula speciale di elevatissima qualità.



CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE AL MIELE E CERA D'API NATURALE

Assicura una presa perfetta sul pelo per un risultato sicuro.
Dermatologicamente testata. Eccezionale stendibilità - facile da applicare - strappo delicato grazie alle sostanze naturali con cui è formulata.
Adatta anche per pelli delicate.

Art. 30010110 Cartuccia viso - 100 ml

Art. 30010100 Cartuccia corpo - 100 ml

Art. 30010400 Vaso multidose - 400 ml



CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE CON BISSIDO DI TITANIO E PROTEINE DELLA SETA

Morbidezza e setosità durante l'applicazione; azione tonificante sulla pelle.
Dermatologicamente testata. Eccezionale stendibilità - facile da applicare - strappo delicato grazie alle sostanze naturali con cui è formulata.
Adatta anche per pelli delicate.

Art. 30020100 Cartuccia corpo - 100 ml

Art. 30020400 Vaso multidose - 400 ml

Art. 30020800 Vaso multidose Maxi - 800 ml

Beauty Progress Aromatique

Cere depilatorie di qualità per uso professionale.
Formula idrosolubile.



CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE CON ESTRATTI NATURALI DI ALOHE

Lenitiva ed ammorbidente. Dermatologicamente testata.

Art. 30040100 Cartuccia corpo - 100 ml

CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE CON ESTRATTI NATURALI DI MALVA E CAMOMILLA

Ad effetto rinfrescante ed ammorbidente che migliora la delicatezza nello strappo. Dermatologicamente testata. È di facile applicazione e consente uno strappo rapido e preciso senza irritare la pelle.

Art. 30050400 Vaso multidose - 400 ml



CERA DEPILATORIA IDROSOLUBILE CON ZUCCHERO NATURALE E MIELE

Per una depilazione dolce e delicata in ogni stagione.
Facile applicazione ed alta resa. Dermatologicamente testata.

Art. 10110400 Vaso multidose - 400 ml - 500 g.

Art. 10110800 Vaso multidose Maxi - 800 ml - 1000 g.

Beauty Progress Bio Classique

Cere depilatorie di qualità per uso professionale. Formula classica.



CERA DEPIULATORIA A CALDO CON CERA D'API NATURALE

Contiene Cera d'Api, ingrediente naturale, energetico e nutriente. La Cera d'Api è la secrezione dell'ape che produce il miele; contiene polline e propoli che sviluppano un'azione antisettica. La combinazione di speciali resine con La Cera d'Api assicura al trattamento depilante un'azione dolce sulla pelle. Adatta per pelli stanche e senescenti.

Art. 20110500 Vaschetta 500 ml



CERA DEPIULATORIA A CALDO ALLA CLOROFILLA NATURALE

L'alto contenuto di Paraffina e Cere Naturali consente a questo trattamento di sviluppare correttamente le sue funzioni. I componenti favoriscono la formazione di una massa plastica e morbida che depila perfettamente senza aggredire la pelle. La Clorofilla, linfa vitale delle piante, agisce a livello cutaneo come rinfrescante ed ammorbidente. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Art. 20120500 Vaschetta 500 ml

Beauty Progress Bio Exclusive

Bagni di paraffina per uso professionale. Formula speciale di elevatissima qualità.



BAGNI DI PURISSIMA PARAFFINA CON ESTRATTI DI ALOHEVERA

Svilupa una profonda azione idratante ed ammorbidente. Particolarmente indicata per i "Bagni di Paraffina" alle mani ed ai piedi per ammorbidire la cute e togliere rossori e, nonché aumentare in modo naturale l'idratazione cutanea. Ottima per veicolare specifici trattamenti cosmetici.

Art. 30110500 Vaschetta 500 ml



BAGNI DI PURISSIMA PARAFFINA CON ESTRATTI NATURALI DI PESCA

Svilupa una profonda azione idratante ed ammorbidente, lascia una pelle setosa al tatto. Particolarmente indicata per i "Bagni di Paraffina" alle mani ed ai piedi per ammorbidire la cute e togliere rossori e screpolature, nonché aumentare in modo naturale l'idratazione cutanea. Ottima per veicolare specifici trattamenti cosmetici.

Art. 30120500 Vaschetta 500 ml

Beauty Progress Douces

Trattamenti di qualità per l'Estetica professionale.



OLIO POST-DEPILAZIONE CON ESTRATTI NATURALI DI MALVA E CAMOMILLA

Formula arricchita con estratti vegetali ad azione lenitiva idratante. Elimina i residui di cera e riduce le eventuali sensazioni di fastidio dovute allo strappo. Non lascia alcuna sensazione di untuosità.

Art. 41010500 Flacone - 500 ml



OLIO POST-DEPILAZIONE CON AZULENE - DETERGENTE

Particolarmente indicato dopo l'uso di cerette liposolubili, per una pulizia dolce e rapida. Elimina eventuali residui di cera e sviluppa una piacevole azione ammorbidente lasciando la pelle liscia e vellutata. Non lascia alcuna sensazione di untuosità.

Art. 41015500 Flacone - 500 ml



OLIO POST-DEPILAZIONE CON ESTRATTI NATURALI DI ALOE VERA

Particolarmente indicato dopo l'uso di cerette liposolubili, per una pulizia dolce e rapida. Elimina eventuali residui di cera e sviluppa una piacevole azione ammorbidente lasciando la pelle liscia e vellutata. Non lascia alcuna sensazione di untuosità.

Art. 41020500 Flacone - 500 ml



OLIO NATURALE POST-DEPILAZIONE. AMMORBIDENTE - LENITIVO

Formula altamente cosmetica. Particolarmente indicato per pelli delicate e sensibili. Contiene Olio di Sesamo in perfetta sinergia con l'Olio di Mandorle dolci, Lanolina e Olio d'Oliva deacidificato. Applicato dopo l'epilazione, sviluppa un'azione fortemente idratante ed ammorbidente, lasciando la pelle vellutata. Non lascia alcuna sensazione di untuosità.

Art. 41025100 Flacone - 100 ml



LATTE RINFRESCANTE POST- DEPILAZIONE - DETERGENTE

Emulsione emolliente e lenitiva con spiccata azione rinfrescante. Ammorbidente, nutriente e fortemente idratante. Utilizzato dopo l'epilazione, facilita l'asportazione dei residui di cera e contribuisce al ripristino del naturale mantello idrolipidico. Riduce gli effetti irritanti dello strappo e lascia la pelle fresca, pulita e tonificata.

Art. 41050500 Flacone - 500 ml

Sly

120W
all'accensione
Per raggiungere immediatamente
la temperatura di lavoro!



MANIPOLO SCALDACERA

Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz
Art. 250



Waxy

120W
all'accensione
Per raggiungere immediatamente
la temperatura di lavoro!



MANIPOLO SCALDACERA

Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz
Art. 238



Très Jolie

200W
all'accensione
Per raggiungere immediatamente
la temperatura di lavoro!



Indicatore del livello di cera
contenuto nella cartuccia.



Imposta tu la temperatura
ideale per il trattamento,
agendo sulla manopola di
regolazione.

MANIPOLO SCALDACERA A RULLO

Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
- Regolazione elettronica della temperatura.
- Pronto all'uso in soli 10 minuti!
- Doppia resistenza per riscaldare la cera più velocemente.
- Con "indicatore" del livello di cera contenuto nella
cartuccia per una facile verifica.
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz
Art. 259



Depyllo



Spia d'accensione



MANIPOLO SCALDACERA A RULLO

Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
- Doppia resistenza per riscaldare la cera più velocemente.
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz
Art. 30014



Bixy

2 INTERRUTTORI
DISTINTI



OFF-OFF



ON - OFF



ON-ON



BASE DI CONNESSIONE PER 2 MANIPOLI SCALDACERA

(La base non comprende i 2 manipoli).

Alimentazione 230V - 50Hz - 100W

Art. 3001 I



Trittico



BASE DI CONNESSIONE PER 3 MANIPOLI SCALDACERA

(La base non comprende i 3 manipoli).

Alimentazione I 10-240V - 50/60Hz - max 100W

Art. 30007



Wax & Wax



Anello di protezione (5 pz. in dotazione).

Alimentazione 230V - 50Hz

Art. 233



WAX & WAX PROFESSIONAL

Scaldacera per ceretta in barattolo.

- Caldaietta con finitura antiaderente.

- Involucro in materiale antiurto ad elevata resistenza termica.

Caresse



MÜSTER CARESSE

Scalda paraffina.

- Regolazione di temperatura
- 230V - 650W **CE**

Art. 25830

La confezione contiene:

- confez. da 60 guanti monouso - confez. da 60 calzari monouso
- n° 2 guanti in spugna - n° 2 calzari in spugna
- n° 1 anello distanziatore - n° 4 panetti di cera di paraffina da 250 gr. cad.

Accessori



Art. 25833 (CVC) - Confezione di guanti monouso (60 pz.)



Art. 25834 (CVC) - Confezione di calzari monouso (60 pz.)



Art. 25831 (SH - CVC) - n° 2 guanti in spugna



Art. 25832 (SH - CVC) - n° 2 calzari in spugna

Scaldillo



In più: secchiello per cera a caldo o in pezzi

SCALDILLO PROFESSIONAL

Scaldacera professionale per ceretta in barattolo con regolazione della temperatura. Alimentazione 230V - 50Hz



Art. 30013

Velvety



In più: secchiello per cera a caldo o in pezzi

VELVETY

Scaldacera professionale per ceretta in barattolo con regolazione della temperatura. Alimentazione 230V - 50Hz



Art. 30012

Owo




OWO

Sterilizzatore professionale con lampada germicida per materiali termosensibili (non resistenti al calore).

- Involucro verniciato in colore alluminio
- Alimentazione: 230V - 50Hz - 13 W

Art. 991

X-Steril

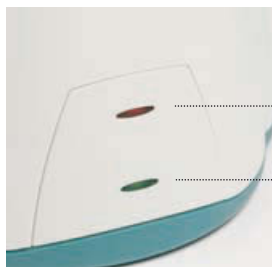

Spia rossa:
fase di pre-riscaldamento

Spia verde:
temperatura OK
per la sterilizzazione

Art. 873/12

Confezione sfere di ricambio

X-STERIL PROFESSIONAL

Sterilizzatore a microsfele

- Temperatura operativa: 250°
- Risultati eccellenti in soli 30 secondi
- Involucro in materiale antiurto ad elevata resistenza termica
- Alimentazione: 230V - 50Hz



Art. 232



Dylan



34 - WHITE



50 - LILAC



36 - RED

FORNETTO UNGHIE

- 4 lampade da 9W cad.
- Interruttore generale di accensione ON/OFF.
- Funzione LASTING: funzionamento in continuato senza temporizzazione.
- Funzione TIMING: funzionamento con temporizzazione 90" / 120" / 180".
- Alimentazione 230V - 50Hz

Art. 25896



Interruttore generale di accensione ON/OFF.



4 lampade da 9W cad



Fornetti Unghie



SMILE

- 4 lampade da 9W cad.
 - Selettore tempo di accensione lampada:
continuo / 120 secondi
 - Alimentazione 230V - 50Hz
- Art. 25892



LAMPADA DI RICAMBIO DA 9W
per Art. 25892 Smile
Art. 25893



LUCIGNOLO

- 1 lampada da 9W
 - Interruttore accensione lampada
 - Piedini antiscivolo
 - Braccio rotante
 - Alimentazione 14W - 230V - 50Hz
- Art. 25894



LAMPADA DI RICAMBIO DA 9W
per Art. 25894 Lucignolo
Art. 25876

Mistral



Aspiratore professionale per limatura unghie.
 - Morbida imbottitura poggiamani rivestita in ecopelle.
 - 230V - 50Hz **CE**
Art. 25878



Sacchetto di ricambio per aspiratore mistral
Art. 25879 (SHC)

Lente a luce fredda



Minilente a luce fredda con braccio orientabile, 3 diottrie.
 - Alimentazione e accensione elettronica
 - Attacco da tavolo
 - Ideale per ricostruzione unghie e manicure
 - 12W
 - 230V - 50Hz **CE**
 - Dimensioni imballo: cm 16,5 x 10,5 x 30
Art. 30050

Lenti a luce fredda



Art. 30055

Minilente luce fredda da tavolo,
3 diotrie.

- 12W

- 220-240V - 50Hz **CE**

Dimensioni imballo: cm 32,5 x 23,2 x 19,4

Art. 30056

Minilente luce fredda da tavolo,
3 diotrie, 48 led.

- Alimentazione elettronica

- Bassissimo consumo

- Lunga durata dell'unità luminosa

- 5W

- 220-240V - 50Hz **CE**

Dimensioni imballo: cm 32,5 x 23,2 x 19,4





Lampada a luce fredda.
Alimentazione e accensione elettronica

- Accensione immediata
- Maggior durata della lampadina
- Luminosità più intensa
- Estensione braccio cm 117
- 22W
- 220-240V - 50Hz **CE**

Dimensioni imballo: cm 75,4 x 23,1 x 9,5

Art. 30057/MU Versione da muro. 3 diotrie.
Art. 30057/ST Versione da stativo. 3 diotrie.
Art. 30057/TV Versione da tavolo. 3 diotrie.

Art. 30058/MU Versione da muro. 5 diotrie.
Art. 30058/ST Versione da stativo. 5 diotrie.
Art. 30058/TV Versione da tavolo. 5 diotrie.



Lampada a luce fredda.

- Alimentazione elettronica
- Bassissimo consumo
- Lunga durata dell'unità luminosa
- Estensione braccio cm 117
- 5W
- 220-240V - 50Hz **CE**

Dimensioni imballo: cm 75,4 x 23,1 x 9,5

Art. 30059/MU Versione da muro. 3 diotrie. 48 led.
Art. 30059/ST Versione da stativo. 3 diotrie. 48 led.
Art. 30059/TV Versione da tavolo. 3 diotrie. 48 led.

Art. 30060/MU Versione da muro. 5 diotrie. 48 led.
Art. 30060/ST Versione da stativo. 5 diotrie. 48 led.
Art. 30060/TV Versione da tavolo. 5 diotrie. 48 led.

Lenti a luce fredda



Art. 3005I/ST

Lampada a luce fredda con 2 lenti intercambiabili (3 e 5 diotrie).

Alimentazione e accensione elettronica

- Accensione immediata
- Maggior durata della lampadina
- Luminosità più intensa
- Estensione braccio cm 134
- 22W
- 230V - 50Hz



Art. 3005I/TV Versione da tavolo con morsetto

Art. 3005I/MU Versione per installazione a parete

Dimensioni imballo: cm 25,5 x 11,5 x 48

Vaporillo



TESTINA ORIENTABILE



Vapozone professionale. Applicatore per oli essenziali.

Testina orientabile.

Completo di stativo su ruote.

230 V ~ 50 Hz 750W

Art. 1000



Vapippo



Potente getto
di vapore.
VERAMENTE
PROFESSIONALE.

Vapozono professionale con Testina orientabile.
con borsa da trasporto
230V ~ 50Hz 750 W **CE**
Art. 892

Vapo-Cleaner

DISINCROSTANTE PER VAPORIZZATORI
Confezione contenente 5 bustine da 30 g cad.
Art. 16206




Visage



VISAGE ELECTRONIC

Vapozone professionale con applicatore per oli essenziali.
Braccio regolabile e testina orientabile.

Completo di stativo su ruote.

230V ~ 50Hz 750 W 

Art. 980




Rigoletto



Vapozone professionale.

Testina uscita vapore orientabile.

Completo di stativo su ruote.

230V ~ 50Hz 750 W 

Art. 149



Frese - Burs

FRESE DIAMANTE Grana media - Gambo 2,35 mm

25848 (SH) - Ø 1,4 mm.
LUNGHEZZA 1,2 mm.



25849 (SH) - Ø 2,3 mm.
LUNGHEZZA 2 mm.



25850 (SH) - Ø 3,5 mm.
LUNGHEZZA 3,2 mm.



25851 (SH) - Ø 2,1 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.



25852 (SH) - Ø 1,2 mm.
LUNGHEZZA 6 mm.



25853 (SH) - Ø 5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25854 (SH) - Ø 1,6 mm.
LUNGHEZZA 5 mm.



25855 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 11 mm.



25856 (SH) - Ø 4,5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25857 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 14 mm.



25858 (SH) - Ø 4 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.



FRESE DIAMANTE Grana grossa - Gambo 2,35 mm

25859 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25860 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 11 mm.



25861 (SH) - Ø 4,5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25862 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 14 mm.



FRESE CARBONIO

25883 (SHC) - CILINDRICA (grana grossa).



25884 (SHC) - CILINDRICA (grana media).



25885 (SHC) - CONICA GRANDE
(grana media).



25886 (SHC) - CONICA PICCOLA
(grana media).



FRESE ABRASIVE Grana grossa - Gambo 2,35 mm

25846 (SF) - Ø 10 mm.
LUNGHEZZA 16 mm.



25847 (SF) - Ø 13 mm.
LUNGHEZZA 18 mm.



FRESE INTERCAMBIABILI

25887 (SHC) - PUNTA PER
CILINDRETTI LEVIGANTI.



25888 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana grossa).



25889 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana media).



25890 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana fine).



FRESE ABRASIVE Grana fine - Gambo 2,35 mm

25840 (SF) - Ø 3 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.



25841 (SF) - Ø 4 mm.
LUNGHEZZA 10 mm.



25842 (SF) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 10 mm.



25845 (SF) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25843 (SF) - Ø 10 mm.
LUNGHEZZA 16 mm.



25844 (SF) - Ø 13 mm.
LUNGHEZZA 15 mm.



Rotax 30K

ROTAX 30K

Micromotore professionale.
manicure - pedicure - ricostruzione
unghie.

Il manipolo micromotore contiene
un sistema di raffreddamento forzato
interno che garantisce una perfetta
operatività del motore.

220-240V~ - 50/60Hz - 35 W

Art. 25899

Principali caratteristiche tecniche

- Giri motore: 25.000 r.p.m.
- SUPER Compatto e leggero
- Regolazione fine di potenza
- Mandrino per frese con gambo Ø 2,35mm



Podosense special

Micromotore professionale per trattamenti di pedicure, manicure e ricostruzione unghie. Il manipolo micromotore contiene un sistema di raffreddamento forzato interno che garantisce una perfetta operatività del motore.

Art. 25882



Principali caratteristiche tecniche

- Giri motore: da 3500 a 27.000 r.p.m.
- Inversione del senso di rotazione
- Azionamento micromotore: con e senza comando a pedale
- Regolazione fine di potenza
- Compatto e leggero
- Mandrino per frese con gambo Ø 2,35 mm
- Alimentazione: 230V - 50Hz.



Accessori

- n. l art. 25837 – Micromotore
- n. l art. 25838 – Comando a pedale
- n. l art. 9850 – Supporto micromotore in gomma anti-scivolo

Hydro Care



IDROMASSAGGIO PIEDI

- 4 funzioni differenziate
- Alimentazione: 230V - 50Hz.

Art. 25880



Infrared System

Bodyguard



BODYGUARD - SECURITY LIFE

Spina automatica salvavita. Per un sicuro utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche fino a 2000W. Garantisce la sicurezza per il soggetto a contatto con l'apparecchiatura ed i suoi accessori e la sicurezza dell'apparato da scariche e sbalzi di tensione. Studiato per l'uso professionale negli istituti di bellezza.

Art. 25800

Tokiwa

Lettino da massaggio in legno trattato antiacqua.

Regolazione autobloccante. Imbottitura amovibile in F.pelle bianca.

Lucidatura: wengé - bianco acidato.

Studiato anche per trattamenti benessere e termali effettuati con fanghi, alghe, ecc..

Dimensioni: cm 184 x 70 x 80 h

Art. 219 Versione senza portarotolo

Art. 219/P Versione con portarotolo



Optional
Art. 297 Poggiatesta estraibile

Relax



Schienale regolabile

LETTINO DA MASSAGGI

con struttura in legno lucidato wengé.

Imbottitura rivestita in ecopelle bianca.

Ampio piano portaoggetti.

Dimensioni: cm 182 x 67 x 80h

Art. I53 - RELAX

Art. I53/P - RELAX PLUS Versione con portarotolo.



Art. I53/V - RELAX S

Versione con foro poggia viso, senza portarotolo.

Art. I53/VP - RELAX S PLUS

Versione con foro poggia viso e portarotolo.



Optional

Art. I53/C - Cuscino copriforo poggia viso.



LETTINO DA MASSAGGIO A 1 SNODO

Con regolazione autobloccante. Struttura in acciaio cromato con imbottitura rivestita in f. pelle bianca. Versione con portarotolo.
Art. 281/P

Dimensioni:
cm 188 x 62 x 77 h



LETTINO DA MASSAGGIO A 2 SNODI

Con regolazioni autobloccanti. Struttura in acciaio cromato con imbottitura rivestita in f. pelle bianca. Versione con portarotolo.
Art. 282/P


Dimensioni:
cm 183 x 62 x 82 h



Posizionabile a terra per massaggi shiatsu.



Poggiatesta regolabile ed asportabile.

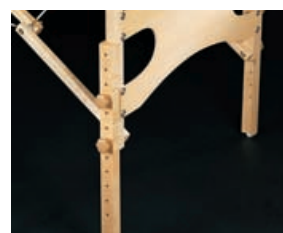

Regolazione altezza lettino.

LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE A VALIGIA

Con struttura in legno ed imbottiture rivestite in f. pelle bianca.
Completo di borsa da trasporto e portarotolo.

Art. 208

Dimensioni:

cm 92 x 76 x 21 h (chiuso)

cm 183 x 76 x 68/93 h (aperto)

Easy



Regolazione telescopica dell'altezza



Marsupio poggiabraccia.



Materassino asportabile double face, bianco/argento.

LETTINO MASSAGGI PIEGHEVOLE A VALIGIA

con struttura tubolare in alluminio, sistema di apertura facilitato.

Schienale regolabile con snodo autobloccante.

Completo di borsa da trasporto. Materassino asportabile "double-face".

Leggerissimo: solo 11 Kg.

Dimensioni: cm 73,5 x 60 x 16 h (chiuso) - cm 183 x 60 x 68/85 h (aperto)

Art. 189

Kiwos



CARRELLO PORTA-APPARECCHI PER ESTETICA IN LEGNO TRATTATO ANTIACQUA.

Colori disponibili: wengé - ciliegio - bianco acidato.

Art. 220

Sofia



POLTRONA SOFIA

Poltrona pedicure rivestita in f.pelle colore bianco. Pompa idraulica con freno, schienale reclinabile, poggiatesta regolabile, doppio poggia gambe regolabile separatamente.

Dimensioni: cm 60 x 77 x 116/126 h (chiusa) - cm 185 x 77 x 98/108 h (sdraiata)

Art. 74/W



LETTINO DA MASSAGGIO A 2 SNODI

con regolazioni autobloccanti. Struttura in acciaio verniciato con imbottitura rivestita in f.pelle bianca. Braccioli asportabili a distacco rapido. Portarotolo.

Dimensioni: cm 183,5 x 81 x 61/75 h

Art. 204



LETTINO DA MASSAGGIO A 2 SNODI

con regolazioni autobloccanti. Pompa idraulica per la regolazione dell'altezza. Struttura in acciaio verniciato con imbottitura rivestita in f.pelle bianca. Braccioli asportabili a distacco rapido. Portarotolo.

Dimensioni: cm 183,5 x 81 x 75 h

Art. 206

Michelangelo



LETTINO MICHELANGELO

4 motori per impostare facilmente ogni posizione operativa.

Dimensioni: cm 190 x 60 x 59/88 h (schienale sdraiato)

Art. 134



Braccioli asportabili



Cuscino copriforo

Raffaello



Braccioli asportabili



Cuscino copriforo

LETTINO RAFFAELLO

3 motori per impostare facilmente le posizioni operative.

Dimensioni: cm 188 x 62 x 59/84 h (schienale sdraiato)

Art. 133

Hiro

HIRO

Carrello porta apparecchi ed accessori.

Legno lucidato wengè.

- Dimensioni: cm 54 x 44 x 80 h

- Dimensioni imballo: cm 49 x 77 x 10

Art. 124



HIRO PLUS

Carrello porta apparecchi ed accessori completo di cassetto su guide.

Legno lucidato wengè.

- Dimensioni: cm 54 x 44 x 80 h

- Dimensioni imballo: cm 49 x 77 x 10

cm 39 x 54 x 17 (cassetto)

Art. 124/C



Noble



NOBLE

- 3 piani in vetro temperato.
 - Dimensioni: cm 55 x 44 x 80 h
 - Dimensioni imballo: cm 76 x 45,5 x 15
- Art. 293**

Magic



MAGIC

- Carrello porta apparecchi ed accessori con 4 piani in vetro temperato con sacca portatutto laterale (sostituibile).
- Dimensioni: cm 74 x 43 x 91 h
 - Dimensioni imballo: cm 85 x 53 x 17 h
- Art. 222**



KASTEL

Poggiagambe per pedicure con piano d'appoggio regolabile in altezza ed inclinazione.

Altezza variabile da 40 a 54 cm.

Art. 209



MIMMO

Seggiolino operativo con regolazione in altezza a vite

Art. 214

Carrello Porta Biancheria



Struttura metallica. Sacca in nylon con cordino di chiusura.

- Dimensioni: diametro cm 44 - cm 61 h

- Dimensioni imballo: cm 46X54X6,5

Art. 31201





DIEGO

Seggiolino da taglio con schienalino, poggiatesta e pompa a gas per la regolazione in altezza.

Seduta h max 82 cm - h min 70 cm.

Disponibile esclusivamente con rivestimento in f. pelle bianca 01-700, oppure nera 01-50.

Art. 321



LIZZY

Seggiolino da taglio con pompa a gas per la regolazione in altezza. Versione con schienalino.

Seduta h max 85 cm - h min 61 cm.

Art. 54/S - Silver

Art. 54/N - Nero

Art. 54/W - Bianco

Art. 54/R - Rosso

Art. 54/M - Marrone



MIRKO

Seggiolino da taglio con pompa a gas per la regolazione in altezza.
Versione con schienalino.

Seduta h max 82 cm - h min 70 cm

Art. 320/S



Art. 320 Versione senza schienalino.



MIRKO

Seggiolino da taglio con poggipiedi e pompa a gas per la regolazione in altezza. Versione con schienalino.


Seduta h max 82 cm - h min 70 cm

Art. 320/SP



Art. 320/P Versione senza schienalino.

Cromoterapia

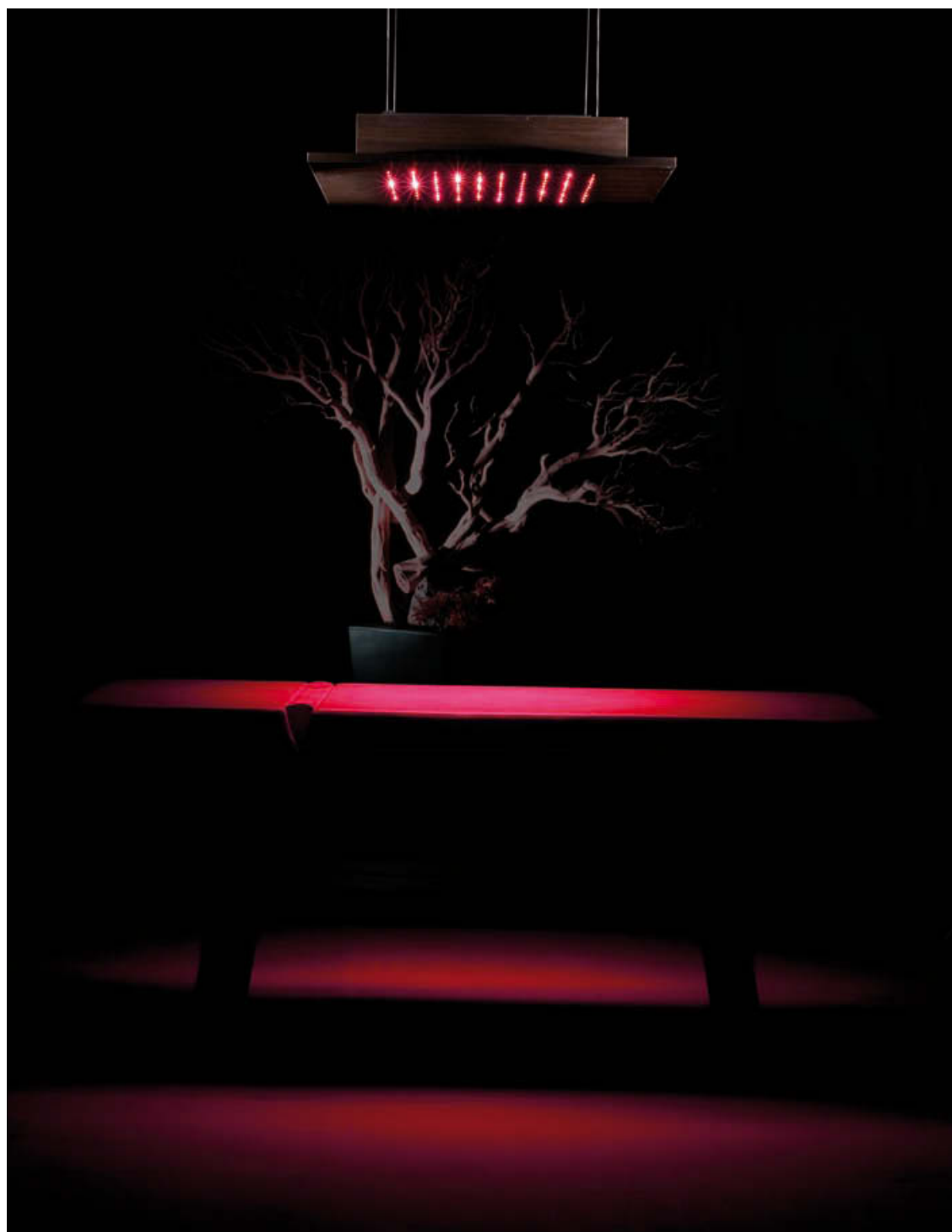

Rosso

Art. 118/L Désiré

Cielino emozionale per trattamenti di Cromoterapia.

Tecnologia LED (ecology system = basso consumo energetico).

Provisto di telecomando per bloccare la Cromoterapia sui colori primari o per commutare sul programma automatico di variazione cromatica in sequenza.

Completo di cordino in acciaio da utilizzare per la pendinatura.

Dimensioni: 80x80 cm

230 V ~ 50 Hz

6,5 W



Telecomando

Che cos'è la Cromoterapia

Secondo la fisica moderna che osserva i corpi illuminati da una sorgente di luce bianca, siamo indotti ad attribuire ad essi un colore per la diversa sensazione che l'occhio ne riceve.

Il colore dei corpi non è quindi da intendersi come una loro esclusiva proprietà, ma come un qualcosa dipendente da tre elementi:

- sorgente luminosa
- oggetto
- occhio.

Psicologi e fisici si sono trovati d'accordo nell'affermare che il colore è una sensazione visiva che si ha quando determinate onde elettromagnetiche stimolano la retina. Dalla diversa lunghezza di queste onde dipende la varietà dei colori.

Componendo un raggio di luce bianca per mezzo di un prisma, si ottengono i colori fondamentali: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco e viola.

Frequenze dei colori:

La luce, nei suoi sette colori che la formano, è energia radiante visibile.

Essa viaggia nello spazio sotto forma di onde vibratorie che si diversificano tra loro in base alle lunghezze d'onda misurate.

L'occhio umano riesce a percepire solo radiazioni comprese tra 4000 e 8000 Å (angstrom).

Ogni fascia di lunghezza d'onda corrisponde a un colore ed ha una specifica azione terapeutica:

- ROSSO: 620 nanometri
- ARANCIO: 589 nanometri
- GIALLO: 551 nanometri
- VERDE: 512 nanometri
- BLU: 475 nanometri
- INDACO: 449 nanometri
- VIOLA: 423 nanometri

Al di sotto del viola troviamo l'ultravioletto e al di sopra del rosso l'infrarosso. La quantità di energia di ciascun colore è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Più è alta la lunghezza d'onda, più forte sarà la penetrazione cutanea e minore la carica energetica.

Ne deriva che il rosso è il colore più penetrante e a seguire l'arancio, il giallo, il verde, il blu, l'indaco e il viola.

Quest'ultimo arriva a profondità limitate, ma infonde un'alta quantità di energia.



Arancio



Giallo



Verde



Blu



Indaco



Viola


Un “tuffo” nel mondo della bellezza!

La grande Show Room di Cerro Maggiore, alle porte di Milano, lungo l'autostrada che collega l'aeroporto della Malpensa con il capoluogo Lombardo, offre l'opportunità unica di un “tuffo” nel mondo della bellezza.

Un mondo che Münster & Dikson conosce bene: su una superficie di 3000 mq sono visibili soluzioni, apparecchiature, attrezzature ed esempi d'ambientazione dedicati all'universo professionale dell'Estetica e dell'Acconciatura.

Luci, colori e finiture interpretano gli arredi e le sedute per offrire le soluzioni più singolari e diversificate, mentre il rigore tecnico delle apparecchiature e la loro linea affascinante lasciano intuire facilmente la qualità e la gran classe dei Centri che l'azienda cura nella loro realizzazione.

Una mission che Münster & Dikson vive intensamente attraverso l'interpretazione delle esigenze e dei desideri della clientela: per questo l'azienda mette in campo la sua quarantennale esperienza, unita alle intuizioni dei suoi architetti ed alla professionalità innovativa dei suoi tecnici in un mix capace di sorprendere!

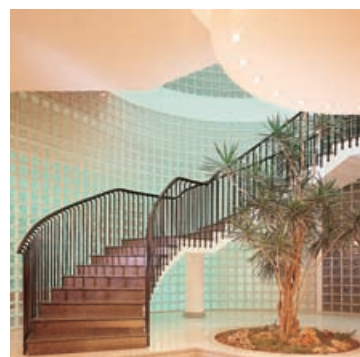



Via Cà Rossa 1 - 20023 Cerro Maggiore (Milano) Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525359
e-mail: sales@muster-dikson.com - www.muster-dikson.com

Export Department
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com